



Chrome In-Line Filter



Chrome In-Line Filter

Beskrivelse

Chrome In-Line Filteret fra produktserien T-safe Pro Water Filtration er særligt udviklet til at fjerne bakterier som f.eks. *Pseudomonas aeruginosa* og *Legionella pneumophila* fra postevand for at forhindre sygdomme forårsaget af infektioner i offentlige bygninger og hotelindustrien.

Filteret er velegnet til brug ved sårbehandling, badekar til brandsårsbehandling, vandfødsler, håndvask, almindelige bade samt tapning af drikkevand.

T-safe Chrome In-line Filter er en komplet enhed udstyret med to 3 mm hangevind. Filteret leveres med en vandbegrænser, der beskytter filteret mod pludselige vandtrykstød. Filteret er et point-of-use-filter og skal installeres så tæt på udløbet som muligt. Jo længere væk fra udløbet filteret installeres, desto større er risikoen for bakterievækst i området mellem filter og udløb.

T-safe Chrome In-Line Filter tilbageholder effektivt bakterier i en periode på op til 92 dage inden for de begrænsninger for anvendelse, som er beskrevet heri.


Denne brugsanvisning dækker følgende produkter:

Vare	Varenummer
Chrome In-Line Filter	02-803236
Udskiftningsfilter	02-000242


Montering af komplet enhed 02-803236

Monter produktet direkte fra emballagen. Sørg for at filteret ikke kommer i kontakt med kontamineringskilder inden installationen.


1. Kontrollér, at installationsafstanden mellem ind- og udløb stemmer overens.

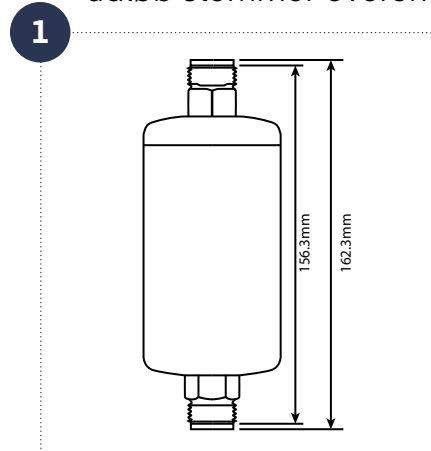


2. Sørg for, at den formonterede filterretning svarer til rørets gennemstrømningsretning.

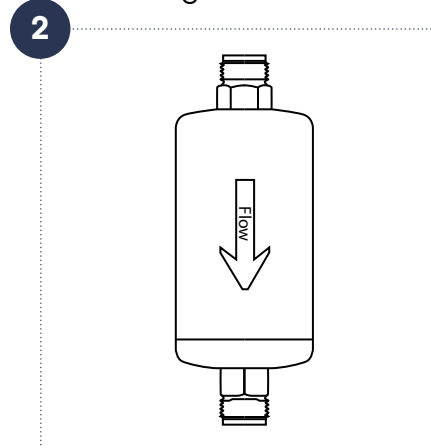

3. Installer filteret med en 3 mm pakning i begge ender for at sikre, at det holder tæt.

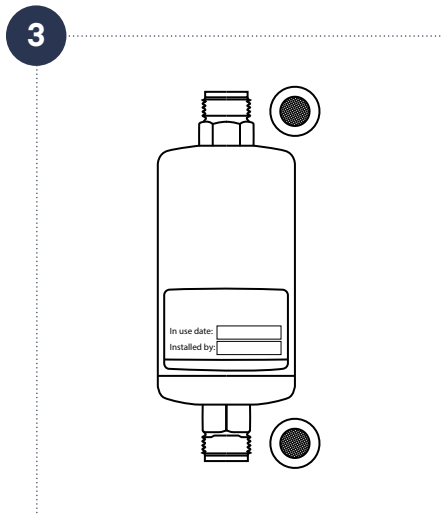


4. Stram ind- og udløbsforbindelserne.

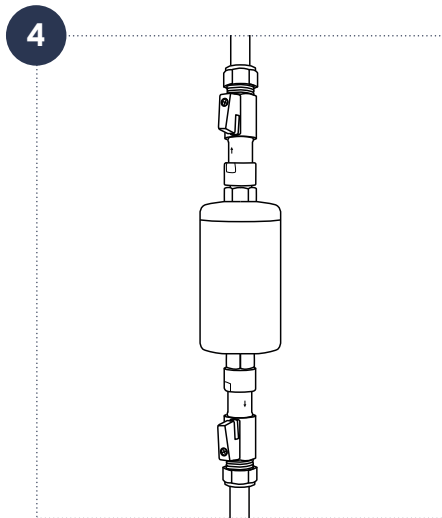


Montering af udskiftningsfilter 02-000242

Monter produktet direkte fra emballagen. Sørg for at filteret ikke kommer i kontakt med kontamineringskilder inden installationen.

1. Fjern hele filterhuset fra installationen

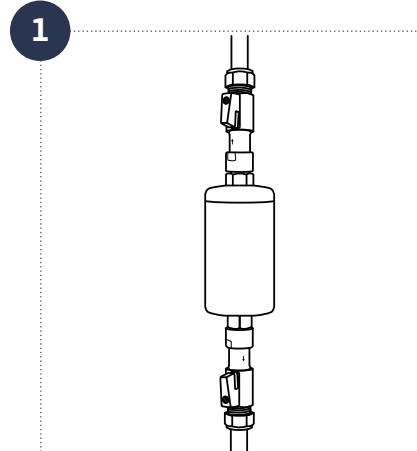


2. Åbn filterhuset – sørg for, at udløbsdelen peger opad – skru derefter den lille udløbsdel af. Pas på overskydende vand fra huset, når filteret åbnes.

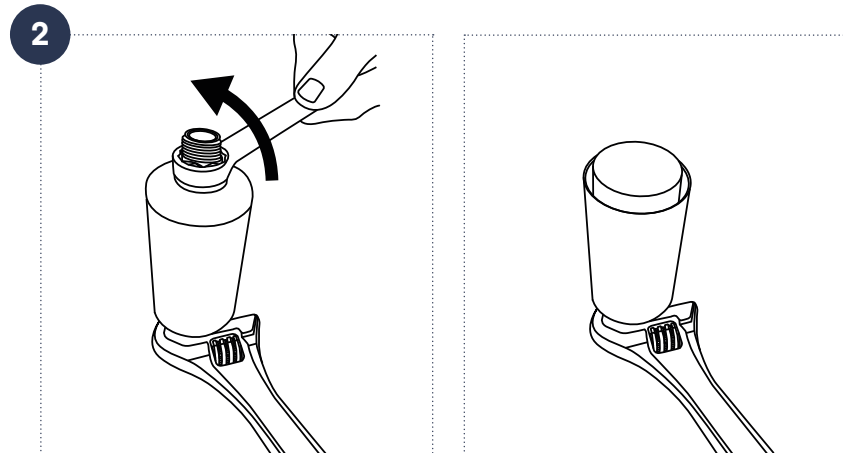


3. Fjern og bortskaf det brugte filter – kom den i en pose til bortskaffelse uden at komme i kontakt med den.

3

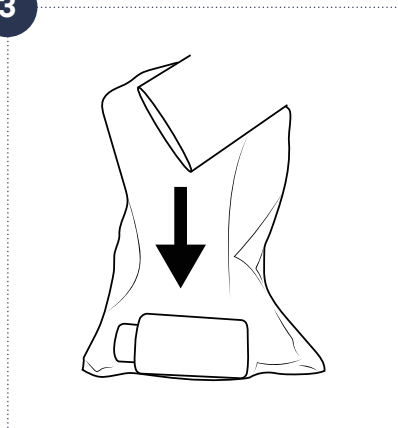

4. Fjern og kassér den store pakning (hvid Ø 42 x 3 mm) og den sorte O-ring (Ø 50 x 2 mm) ved den lille udløbsdel.

4

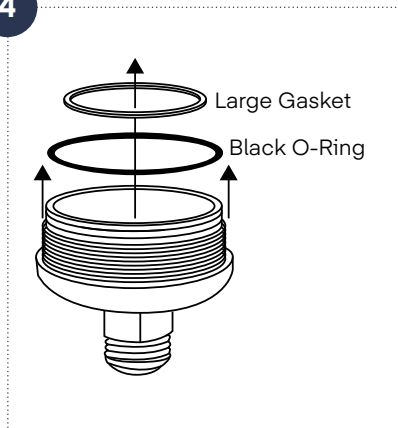


5. Rengør og desinficer den lille udløbsdel indeni (eller begge dele). Sørg for, at alt organisk materiale er fjernet.

5




- Rengøring og desinfektion skal udføres, hver gang filteret udskiftes.
- Rengør filterhuset med en ren, ikke-slibende og fnugfri klud og/ eller en børste for at fjerne genstridige rester.
- Desinficer med en klud (klor eller ætanol – 1000 ppm), eller sprøjt med 75-100 % ætanol eller et lignende desinficeringsmiddel, der egner sig til kromoverflader.
- Vær meget forsigtig ved den lille udløbsende for ikke at kontaminere overfladen mellem den hvide pakning og udløbet.


6. Fjern "Installeret dato"-mærkaten fra huset.

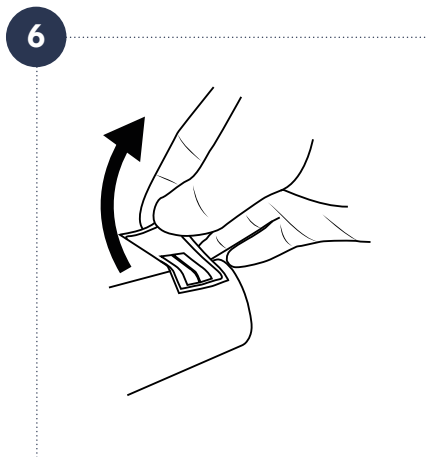


7. Skift handsker, eller desinficer hænderne.

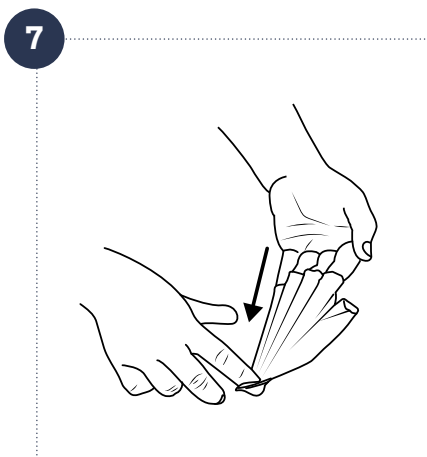

8. Monter den nye, store hvid pakning (Ø 42 x 3 mm) inden i det lille udløb samt en ny sort O-ring Ø 50 x 2 på ydersiden.

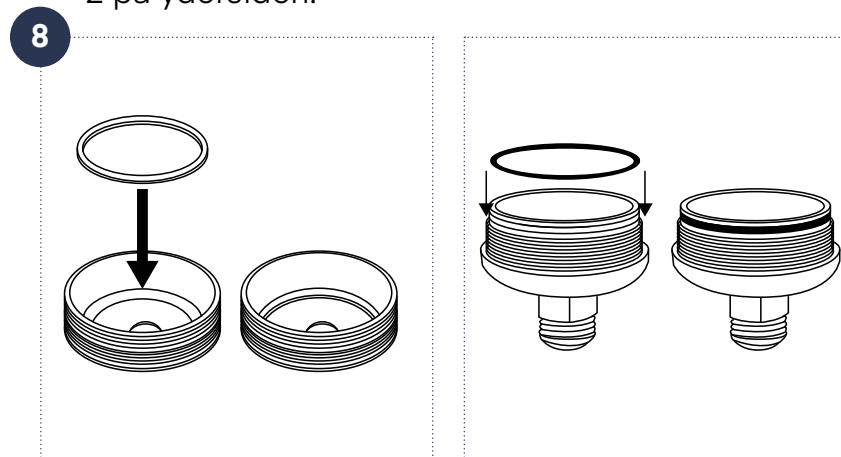


9. Sæt den nye filterpatron i ved at montere filteret i den lille udløbsdel.

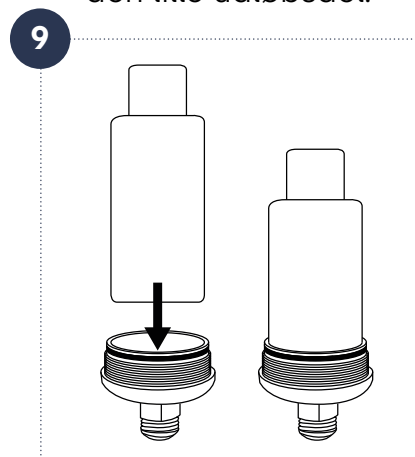


10. Saml hele filteret igen. Stram godt til.

10

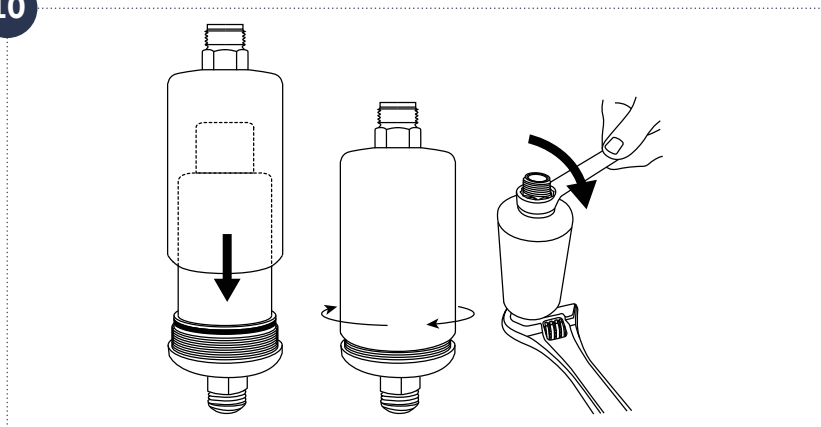


11. Sæt en ny "Installeret dato"-mærkat uden på filterhuset, og skriv installationsdatoen.

11

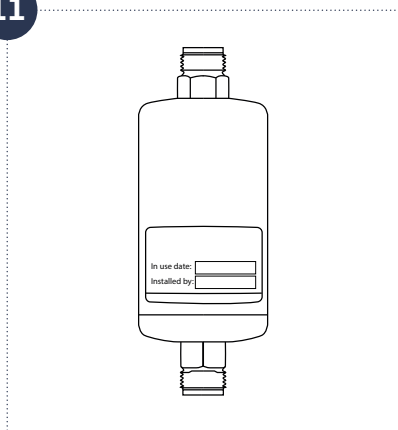

12. Genmonter filteret ved hjælp af 3 mm pakninger. Sørg for at vende filteret korrekt i processen. Rengøring Hvis der er etableret professionelle rengøringsprocedurer, kan filterets udvendige overflader rengøres med en ny engangsklud. Sørg specielt for ikke at kontaminere filterets udløb. Filteret må ikke afmonteres under rengøring.

12

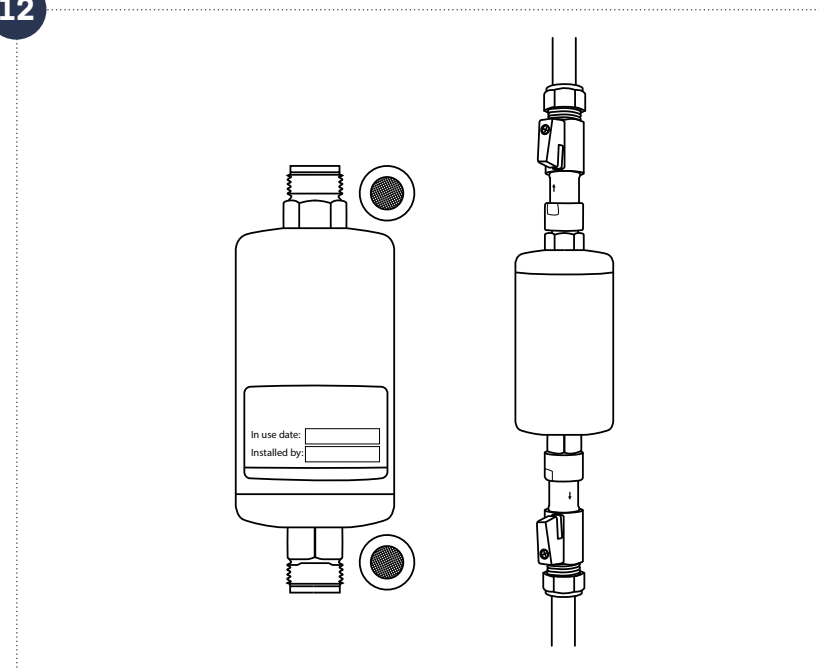

Rengøring

Hvis der er etableret professionelle rengøringsprocedurer, kan filterets udvendige overflader rengøres med en ny engangsklud. Sørg specielt for ikke at kontaminere filterets udløb. Filteret må ikke afmonteres under rengøring.

Eksponering for kemisk og termisk vandbehandling

Filteret kan tåle følgende kontinuerlige desinfektionsbehandlinger:

- 30 ppm klorindioxid
- 15 ppm fri klorin (hypoklorit)
- 10 ppm ozon
- 1 ppm brintoverilte
- 1 ppm monokloramin Chokbehandling
- Op til 1000 ppm fri klorin i 1 time ved stuetemperatur
- pH 12 i 1 time ved stuetemperatur
- 1000 ppm pereddikesyre i 2 timer ved 60° C

Filteret kan tåle termisk desinfektion op til 6 gange i løbet af filterets brugslevetid under følgende forhold: 70° C i 5 minutter.

Bortskaffelse

Filteret og ikke-metalliske dele kan bortskaffes som almindeligt affald i overensstemmelse med gældende lokale regler under affaldskode 180104 og i overensstemmelse med EU-direktiv 75/442/EØS.

De blyfri messingmetaldele kan rengøres, afkalkes og desinficeres, så de kan genanvendes med en ny filterpatron. Når metaldelene skal bortskaffes, skal det sikres, at de genanvendes korrekt i henhold til de lokale retningslinjer.

Opbevaring – filter, der ikke er taget i brug

Produktet skal opbevares ved temperaturer mellem 5° C og 40° C og ved en fugtighed på maks. 60 %. Udløbsdato: Se etiket på emballagen eller mærkningen på produktet.

Forholdsregler

- Brug ikke filteret, hvis pakken er åben eller beskadiget, eller filteret er synligt beskadiget
- Afmonter ikke filteret i brugsperioden
- Undgå mekanisk påvirkning, og slå ikke på filteret med tunge eller metalliske genstande, da dette kan beskadige filteret
- Filterets udløb må ikke komme i direkte kontakt med hud eller hår
- Filteret må ikke anvendes kontinuerligt ved vandtemperaturer over 60 °C. Det optimale driftsområde er 10° C - 45° C
- Filteret kan ikke tåle tryk over 5 bar
- Hvis filteret udsættes for et uforholdsmæssigt stort vandtryk, kan det medføre, at filteret falder sammen (pludseligt fald i vandgennemstrømning). Filteret skal i så fald kasseres.
- Filteret må ikke tilbageskylles

- Kontamineringsgraden og mængden af filterbloke
 - rende partikler og stoffer i vandet kan forkorte filte
 - rets levetid
- Filteret må ikke skylles eller rengøres i en vaskemaskine eller autoklave
- Filteret skal bortskaffes, hvis udløbsdatoen er passeret
- Filteret eller adapteren må ikke modificeres eller ændres

BEMÆRK

- Brug ikke vandet til kontaktlinser
- Vandkvaliteten er ikke egnet til farmaceutisk brug
- Filteret vil hverken ændre smagen eller lugten eller den kemiske sammensætning i vandet og medfører ikke ændringer i koncentrationen af salte, metaller, kalkaflejringer, kemiske stoffer, pesticider og farvestoffer

Der tages forbehold for trykfejl.



T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com

t-safe.com