

**Filtro de Ducha
Easy-Fix**

T safe

Filtro de Ducha Easy-Fix

Descripción

El Filtro de Ducha Easy-Fix T-safe de la gama de Filtración de Agua Profesional T-safe está expresamente diseñado para eliminar del agua corriente bacterias como *Legionella pneumophila* y *Pseudomonas aeruginosa*, entre otras, con el fin de prevenir infecciones en espacios comerciales.

El Filtro de Ducha Easy-Fix T-safe es una pieza completa que incluye una rosca hembra de ½". El filtro se suministra con un regulador de caudal de agua que lo protege de los picos repentinos de presión.

El filtro retiene eficazmente las bacterias un tiempo máximo de 92 días, con las limitaciones de uso aquí descritas.


La presente instrucción de uso cubre los siguientes productos:

Artículo	Código
Filtro de Ducha Easy-Fix	02-092031
Filtro de Repuesto (solo filtro)	02-000200
Filtro de Repuesto (pieza completa)	02-000201

Instalación de la unidad completa 02-092031


1. Montar la unidad completa en una rosca estándar de ½" (macho). Hay que asegurarse de que esté bien apretado para que no se produzcan fugas.

1

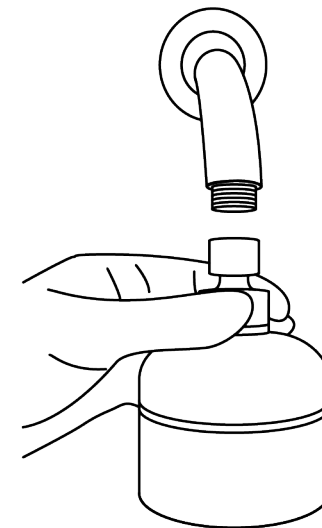


Instalación del filtro de repuesto (solo filtro) 02-000200


1. Separe la cubierta de la carcasa. Utilice la herramienta adjunta y gire hacia la izquierda el anillo de cierre (en el sentido de las agujas del reloj).

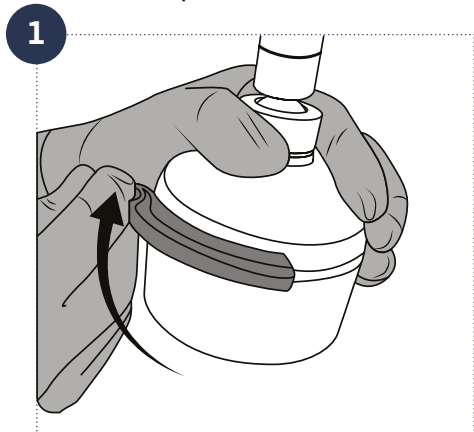


2. Es sencillo retirar el filtro usado girándolo y tirando de él suavemente. Asegúrese de desechar correctamente el filtro usado.

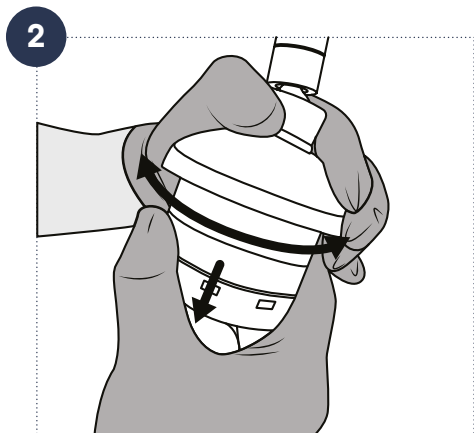

3. Coloque el nuevo filtro presionándolo y girándolo.

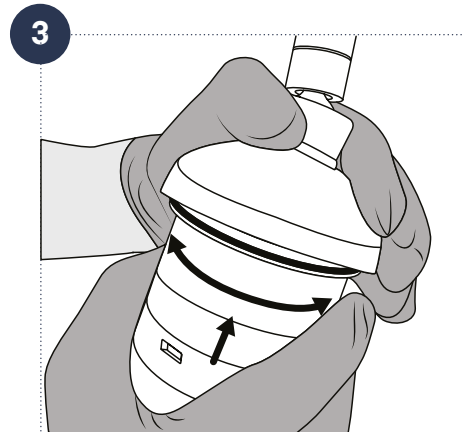

4. Vuelva a unir la cubierta a la carcasa. Asegure la cubierta a la carcasa girando el anillo de cierre en sentido contrario a las agujas del reloj.

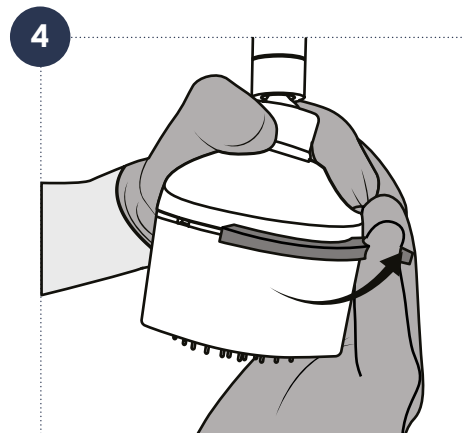

Instalación del filtro de repuesto (pieza completa) 02-000201

1. Retire el filtro usado de la junta desenroscando toda la pieza y coloque la nueva unidad de filtro completa. Asegúrese de apretarla para evitar fugas.

1



Limpieza

En el caso de que se apliquen procedimientos de limpieza profesional, las superficies externas del producto del filtro podrán limpiarse con un paño desechable. Hay que tener especial cuidado de no contaminar ninguna salida del producto del filtro. No desconecte el filtro durante la limpieza.

Exposición al tratamiento químico y térmico con agua

El filtro puede tolerar los siguientes tratamientos de desinfección continuada:

- 30 ppm de dióxido de cloro
- 15 ppm de cloro libre (hipoclorito)
- 10 ppm de ozono
- 1 ppm de peróxido de hidrógeno
- 1 ppm de monoclaramina

Tratamiento de choque:

- Hasta 1000 ppm de cloro libre durante 1 hora a temperatura ambiente
- pH 12 durante 1 hora a temperatura ambiente
- 1000 ppm de ácido peracético durante 2 horas a 60° C

El filtro puede tolerar la desinfección térmica hasta 6 veces durante su vida útil en las condiciones siguientes: a 70° C durante 5 minutos.

Eliminación

El cartucho del filtro y las piezas no metálicas pueden desecharse con los residuos normales conforme a lo dispuesto en la normativa local aplicable con el número de categoría de residuo 180104 y conforme a lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE de la Unión Europea.

Las piezas metálicas de latón sin plomo pueden limpiarse, descalcificarse y desinfectarse para reutilizarse con un cartucho del filtro de repuesto. Cuando deseche las piezas metálicas, asegúrese de reciclarlas correctamente siguiendo las directrices locales.

Almacenamiento - Filtro no encargado

El producto debe almacenarse a una temperatura entre 5° C y 40° C con una humedad máxima del 60 %. Fecha de caducidad: Ver la etiqueta del envase o el marcado del producto.

Precauciones

- No utilizar el filtro si el envase está abierto o dañado, o el filtro está visiblemente dañado
- No desconectar el filtro durante el periodo de uso
- Evitar impactos mecánicos y no golpear el filtro con objetos pesados o metálicos, ya que podría resultar dañado
- La salida del filtro no debe entrar en contacto directo con la piel ni el pelo
- El filtro no debe utilizarse de forma continuada con agua a una temperatura que supere los 60° C. Rango operativo óptimo de 10-45° C

- El filtro no tolera una presión por encima de los 5 bares
- Si el filtro se somete a una presión excesivamente elevada llega a colapsar (disminución repentina del flujo del agua). A continuación, desechar el filtro
- No enjuagar el filtro
- El nivel de contaminación y la cantidad de partículas y sustancias obstructoras presentes en el agua pueden reducir la vida útil del filtro
- No enjuagar ni limpiar el filtro en un lavavajillas o un autoclave
- Desechar el filtro cuando supere la fecha de caducidad
- No modificar ni realizar cambios en el filtro ni el adaptador

NOTA

- No utilizar el agua como líquido para las lentillas
- La calidad del agua no es idónea para el uso farmacéutico
- El filtro no alterará el sabor ni el olor o la composición química del agua y no provocará ningún cambio en la concentración de sales, metales, cal, sustancias químicas, pesticidas y tintes

No se asumirá ninguna responsabilidad por erratas o errores tipográficos.



T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com

t-safe.com