



**Filtro Doccia  
Easy-Fix**

**T safe**

## Filtro Doccia Easy-Fix

### Descrizione

Il Filtro T-safe per Doccia a Parete Easy-Fix della gamma Filtraggio T-Safe Pro Water è stato specificamente progettato per rimuovere batteri tra cui *Legionella pneumophila* e *Pseudomonas aeruginosa* dall'acqua del rubinetto e prevenire le infezioni in ambienti commerciali.

Il Filtro Doccia T-Safe Easy-Fix a Parete è un'unità completa con filettatura femmina da ½". Il filtro viene fornito con un regolatore di flusso dell'acqua che lo protegge da picchi di pressione improvvisi dell'acqua.

Il filtro tratterà in modo efficace i batteri per un periodo massimo di 92 giorni con i limiti d'uso qui descritti.


Queste Istruzioni d'uso si riferiscono ai seguenti prodotti:

| Articolo                                  | Codice    |
|-------------------------------------------|-----------|
| Filtro Doccia a Parete Easy-Fix           | 02-092031 |
| Filtro di Ricambio (solo filtro)          | 02-000200 |
| Filtro di Ricambio (dispositivo completo) | 02-000201 |

## Installazione dell'unità completa 02-092031


1. Montare l'unità completa su una filettatura standard da ½" (maschio). Assicurarsi di serrare in modo da evitare perdite.

1

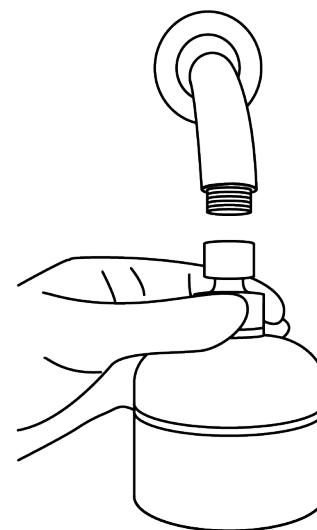


## Installazione del filtro di ricambio (solo filtro) 02-000200


1. Rimuovere la copertura dal corpo. Utilizzare lo strumento in dotazione e ruotare l'anello di bloccaggio verso sinistra (in senso orario).

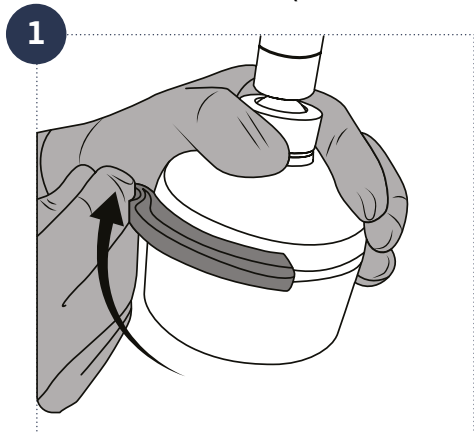


2. Ruotando delicatamente e tirando il filtro, la rimozione del filtro utilizzato risulta facile. Assicurarsi che il filtro utilizzato sia smaltito correttamente.

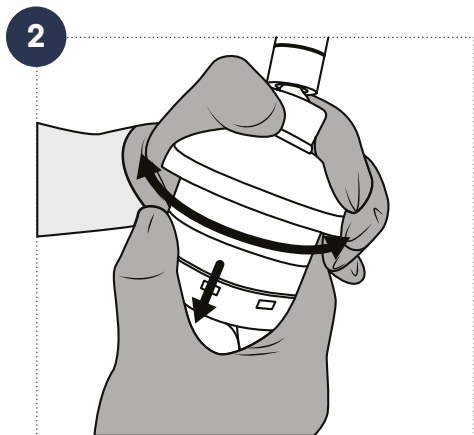

3. Inserire il nuovo filtro premendo e ruotando.

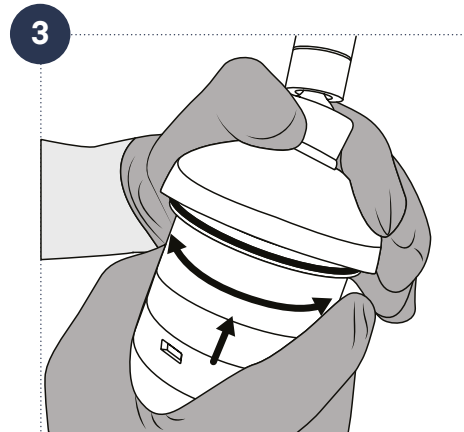

4. Applicare il coperchio sul corpo. Fissare il coperchio al corpo ruotando l'anello di bloccaggio in senso antiorario.

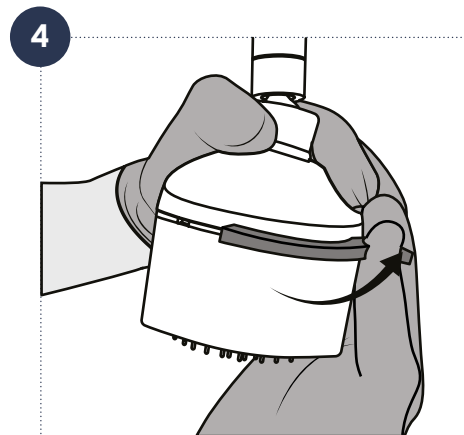

## Installazione del filtro di ricambio (dispositivo completo) 02-000201

1. Rimuovere il filtro utilizzato dal giunto sferico svitando l'unità completa e montare la nuova unità filtro completa. Assicurarsi di serrare in modo che non si verifichino perdite.

1



## Pulizia

Se sono previste procedure di pulizia professionali, le superfici esterne del filtro possono essere pulite utilizzando una salvietta monouso nuova. È necessario prestare particolare attenzione per evitare la contaminazione delle uscite del filtro. Non scollegare il filtro durante la pulizia.

## Esposizione al trattamento chimico e termico delle acque

Il filtro può tollerare i seguenti trattamenti di disinfezione continui:

- 30 ppm di biossido di cloro
- 15 ppm di cloro libero (ipoclorito)
- 10 ppm di ozono
- 1 ppm di perossido di idrogeno
- 1 ppm di monoclorammina

## Trattamento d'urto:

- fino a 1000 ppm di cloro libero per 1 ora a temperatura ambiente
- pH 12 per 1 ora a temperatura ambiente
- 1000 ppm di acido peracetico per 2 ore a 60° C

Il filtro può tollerare la disinfezione termica per un massimo di 6 volte nel corso del suo intero ciclo di vita nelle seguenti condizioni: 70° C per 5 minuti.

## Smaltimento

È possibile smaltire la cartuccia del filtro e le parti non metalliche nei rifiuti ordinari in conformità alle normative locali applicabili nell'ambito della categoria codice rifiuti 180104 e alla direttiva UE 75/442/CEE.

Le parti metalliche in ottone senza piombo possono essere pulite, disincrostate e riutilizzate con una cartuccia di ricambio. Quando si smaltiscono le parti metalliche, assicurarsi di riciclarle in modo corretto attenendosi alle linee guida locali.

## Conservazione – filtro non messo in servizio

Conservare a temperature comprese tra 5° C e 40° C e a un'umidità massima del 60%. Data di scadenza: vedere l'etichetta sulla confezione o le indicazioni riportate sul prodotto.

## Precauzioni

- Non utilizzare il filtro se la confezione è aperta o danneggiata o se il filtro è visibilmente danneggiato
- Non scollegare il filtro durante il periodo di utilizzo
- Evitare l'impatto meccanico e non colpire il filtro con oggetti pesanti o metallici, in quanto potrebbe danneggiarsi
- L'uscita del filtro non deve venire a contatto diretto con la pelle o i capelli
- Non usare il filtro in modo continuativo con temperature dell'acqua superiori a 60° C. La temperatura operativa ottimale è compresa tra 10° C e 45° C

- Il filtro non è in grado di sostenere una pressione superiore a 5 bar
- Se viene sottoposto a una pressione dell'acqua troppo elevata, il filtro cederà (riduzione improvvisa del flusso d'acqua). In questo caso, smaltire il filtro
- Il filtro non può essere sottoposto a controlavaggio
- Il livello di contaminazione e la quantità di particelle e sostanze presenti nell'acqua in grado di intasare il filtro possono ridurre la durata
- Non risciacquare o lavare il filtro in lavastoviglie o autoclave
- Una volta scaduto, smaltire il filtro
- Non modificare o apportare modifiche al filtro o all'adattatore

## NOTA

- Non utilizzare soluzioni di pulizia per le lenti a contatto
- La qualità dell'acqua non è idonea all'uso in ambito farmaceutico
- Il filtro non cambia il sapore o l'odore né la composizione chimica dell'acqua e non modifica la concentrazione di sali, metalli, incrostazioni di calcare, sostanze chimiche, pesticidi e coloranti

*Nessuna responsabilità per errori tipografici e di stampa.*



**T-safe A/S**

Gydevang 1  
3450 Allerød  
Denmark

t: +45 48 17 22 82  
e: [info@t-safe.com](mailto:info@t-safe.com)

**[t-safe.com](http://t-safe.com)**