



Chrome Wall Shower Filter



Chrome Wall Shower Filter

Beskrivelse

Chrome Wall Shower Filter fra produktserien T-safe Pro Water Filtration er særligt udviklet til at fjerne bakterier som f.eks. *Pseudomonas aeruginosa* og *Legionella pneumophila* fra postevand for at forhindre sygdomme forårsaget af infektioner i offentlige bygninger og hotelindustrien.

T-safe Chrome Wall Shower Filter tilbageholder effektivt bakterier i en periode på op til 92 dage inden for de begrænsninger for anvendelse, som er beskrevet heri.


Denne brugsanvisning dækker følgende produkter:

Vare	Varenummer
Chrome Wall Shower Filter	02-803150
Udskiftningsfilter	02-000143


Installation af komplet enhed 02-803170

Installer produktet direkte fra emballagen, og sørg for, at filteret ikke kommer i kontakt med smittekilder, før det installeres.


1. Sørg for, at det vandrør, filteret skal monteres på, maksimalt stikker 16 mm ud fra væggen.

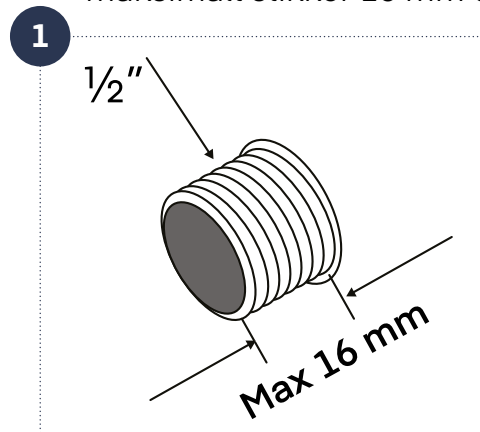


2. Start med at montere bagpladen på røret. Markér derefter de steder på væggen, hvor der skal bores huller. Afmonter bagpladen igen, når borehullerne er markeret.

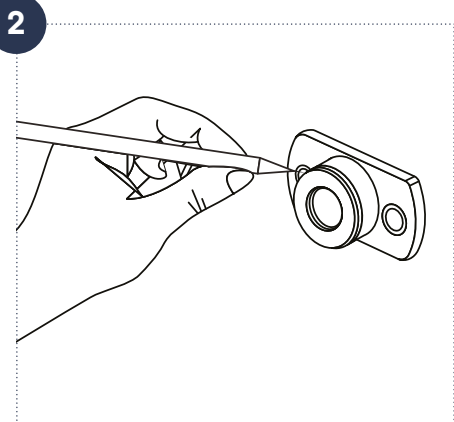


3. Brug et bor med Ø6 til at bore huller i væggen på de markerede steder. Sæt de medfølgende rawlplugs i hullerne.

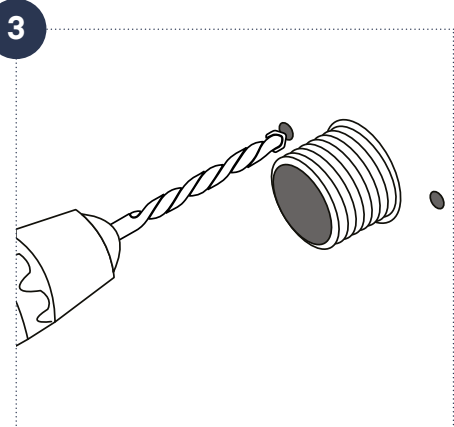


4. Monter egnet tætningsmateriale omkring røret for at sikre en tæt installation.

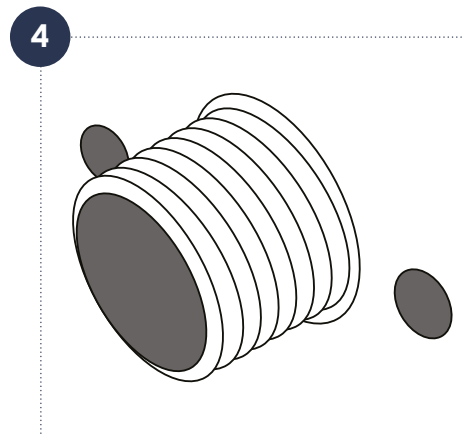

5. Monter bagpladen på væggen igen ved hjælp af de skruer, der følger med produktet.

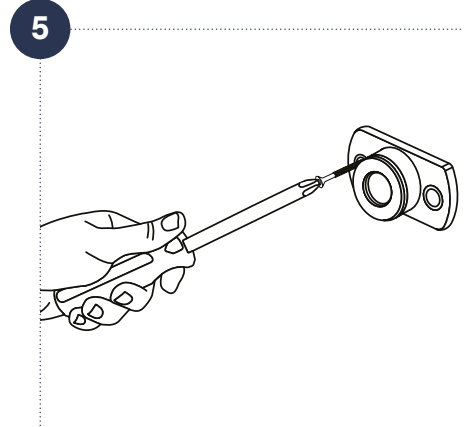


6. Monter brusehovedet på bagpladen. Tryk brusehovedet på plads, og fastgør det ved at stramme den skrue, som er placeret over eller under produktet, alt afhængigt af modellen.

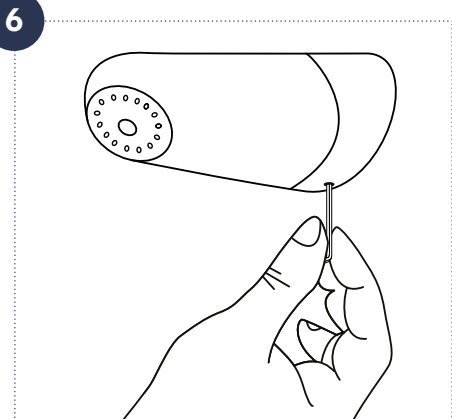


Installation af udskiftningsfilter 02-000242

Installer produktet direkte fra emballagen, og sørg for, at filteret ikke kommer i kontakt med smittekilder, før det installeres.


1. Start med at løsne den skrue, der er placeret over eller under produktet alt afhængigt af modellen.

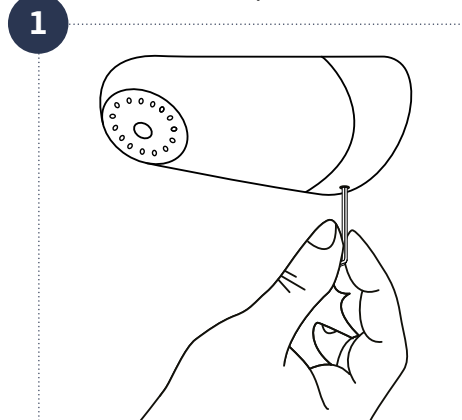


2. Afmonter brusehovedet ved at dreje det mod uret, samtidig med at du trækker det udad og væk fra væggen.

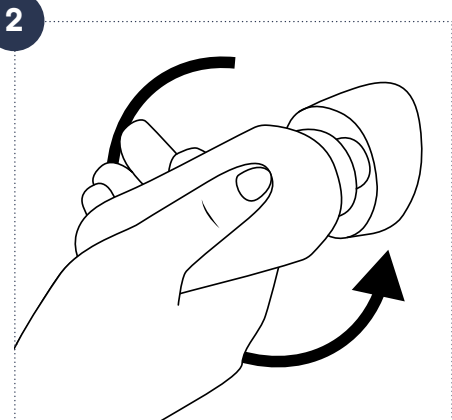


3. Drej og træk i filteret for at afmontere det. Bortskaf filteret i henhold til den normale procedure for bortskaffelse af affald.

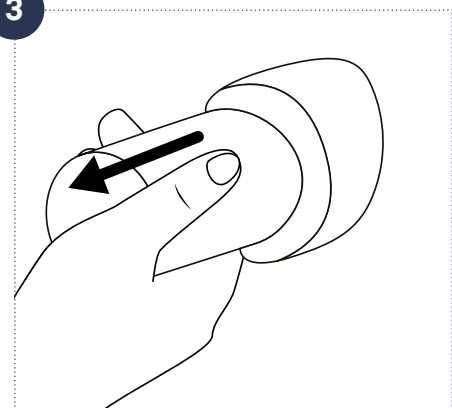


4. Rengør, afkalk og desinficer brusehovedet og bundstykket i henhold til de lokale retningslinjer.

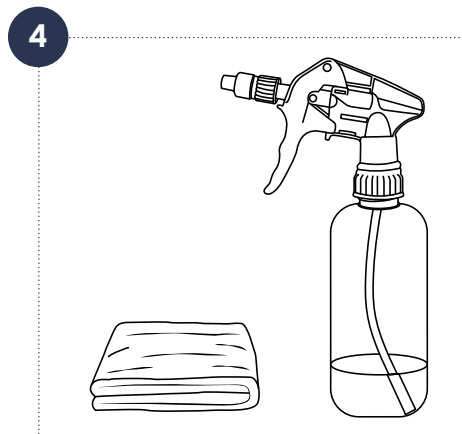


5. Udskift O-ringen i beslaget.

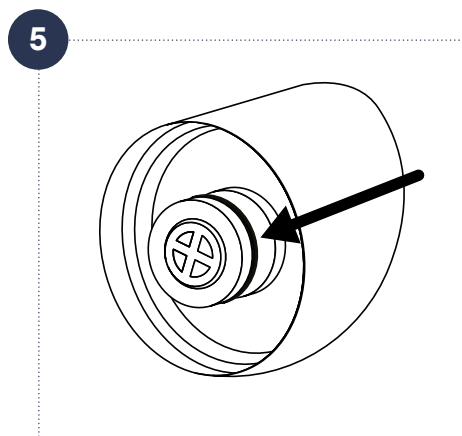

6. Monter det nye filter ved at trykke det ind og dreje det med uret på samme tid.

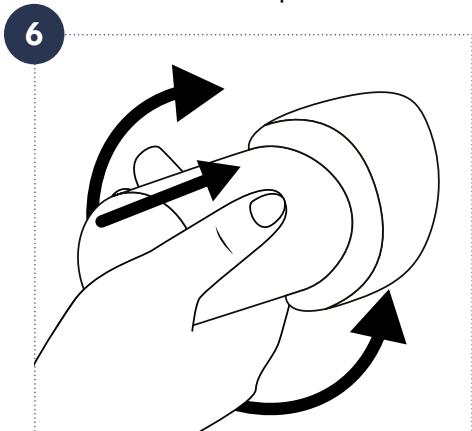

7. Monter brusehovedet på beslaget igen ved at dreje det med uret. Fastgør brusehovedet ved at stramme den skrue, der er placeret over eller under produktet alt afhængigt af modellen.

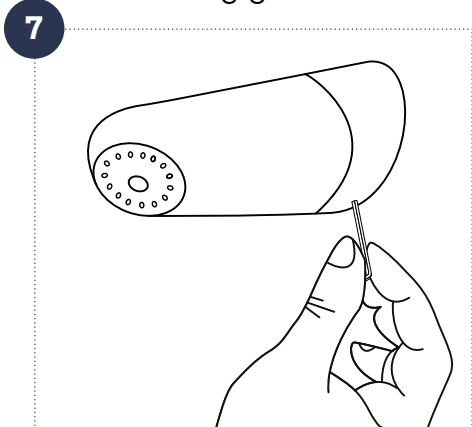

Eksposering for kemisk og termisk vandbehandling

Filteret kan tåle følgende kontinuerlige desinfektionsbehandlinger:

- 30 ppm klorindioxid
- 15 ppm fri klorin (hypoklorit)
- 10 ppm ozon
- 1 ppm brintoverilte
- 1 ppm monokloramin

Chokbehandling

- Op til 1000 ppm fri klorin i 1 time ved stuetemperatur
- pH 12 i 1 time ved stuetemperatur
- 1000 ppm pereddikesyre i 2 timer ved 60° C

Filteret kan tåle termisk desinfektion op til 6 gange i løbet af filterets brugslivetid under følgende forhold: 70° C i 5 minutter.

Bortskaffelse

Filteret og ikke-metalliske dele kan bortskaffes som almindeligt affald i overensstemmelse med gældende lokale regler under affaldskode 180104 og i overensstemmelse med EU-direktiv 75/442/EØS.

De blyfri messingmetaldele kan rengøres, afkalkes og desinficeres, så de kan genanvendes med en ny filterpatron. Når metaldelene skal bortskaffes, skal det sikres, at de genanvendes korrekt i henhold til de lokale retningslinjer.

Opbevaring – filter, der ikke er taget i brug

Produktet skal opbevares ved temperaturer mellem 5° C og 40° C og ved en fugtighed på maks. 60 %. Udløbsdato: Se etiket på emballagen eller mærkningen på produktet.

Forholdsregler

- Brug ikke filteret, hvis pakken er åben eller beskadiget, eller filteret er synligt beskadiget
- Afmonter ikke filteret i brugsperioden
- Undgå mekanisk påvirkning, og slå ikke på filteret med tunge eller metalliske genstande, da dette kan beskadige filteret
- Filterets udløb må ikke komme i direkte kontakt med hud eller hår
- Filteret må ikke anvendes kontinuerligt ved vandtemperaturer over 60 °C. Det optimale driftsområde er 10° C - 45° C
- Filteret kan ikke tåle tryk over 5 bar
- Hvis filteret udsættes for et uforholdsmæssigt stort vandtryk, kan det medføre, at filteret falder sammen (pludseligt fald i vandgennemstrømning). Filteret skal i så fald kasseres
- Filteret må ikke tilbageskylles
- Kontamineringsgraden og mængden af filterblokerende partikler og stoffer i vandet kan forkorte filterets levetid
- Filteret må ikke skylles eller rengøres i en vaskemaskine eller autoklave

- Filteret skal bortskaffes, hvis udløbsdatoen er passeret
- Filteret eller adapteren må ikke modificeres eller ændres

BEMÆRK

- Brug ikke vandet til kontaktlinser
- Vandkvaliteten er ikke egnet til farmaceutisk brug
- Filteret vil hverken ændre smagen eller lugten eller den kemiske sammensætning i vandet og medfører ikke ændringer i koncentrationen af salte, metaller, kalkaflejringer, kemiske stoffer, pesticider og farvestoffer

Der tages forbehold for trykfejl



T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com

t-safe.com