

Gebruiksaanwijzing

Knijpdouche Filter



Knijpdouche Filter

Beschrijving

Het Knijpdouche Filter van de T-safe Pro Water Filtration-serie is speciaal ontworpen om bacteriën zoals o.a. *Legionella pneumophila* en *Pseudomonas aeruginosa* uit het leidingwater te verwijderen om infecties in commerciële omgevingen te voorkomen.

Het filter houdt bacteriën effectief vast voor een duur van maximaal 92 dagen, binnen de gebruiksbeperkingen zoals hierin beschreven.

Deze IFU heeft betrekking op de volgende producten:


Artikel	Code
Knijpdouche Filter	02-803200
Vervangend Filter	02-000153
Dummy-patroon	02-000092

Installatie van complete eenheid

Installeer het product zoals het uit de verpakking komt, en zorg dat de filter vóór installatie niet met besmettingsbronnen in aanraking komt.


1

De meegeleverde pakking is voor de slang en is bedoeld om de eerder geïnstalleerde pakking te vervangen. Dit gebeurt elke keer dat er een nieuw T-safe filter wordt gemonteerd, om ervoor te zorgen dat de verbinding altijd goed vastzit.

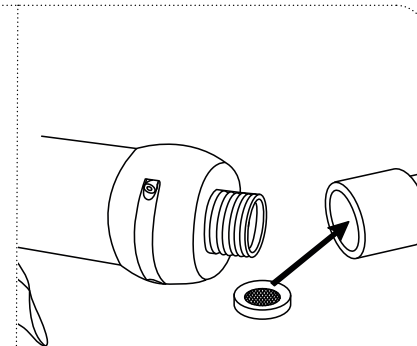

2

Bevestig de slang stevig aan het Knijpdouche Filter: het is nu klaar voor gebruik.

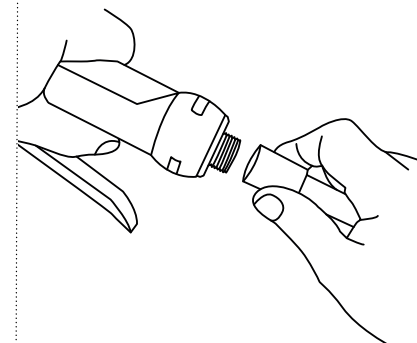


Installatie van Vervangend Filter of Dummy-patroon

Installeer het product zoals het uit de verpakking komt, en zorg dat de filter vóór installatie niet met besmettingsbronnen in aanraking komt.


1

Begin met het losdraaien van de twee schroeven aan de onderkant van het Knijpdouche Filter. Gebruik een inbussleutel van 1,5 mm.

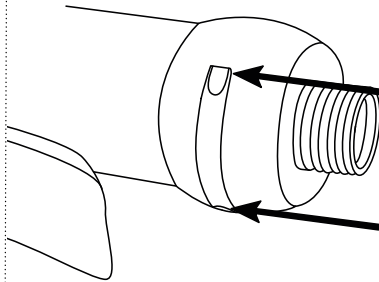


2

Trek de twee vergrendelingspallen aan beide kanten naar buiten om het filter los te maken.

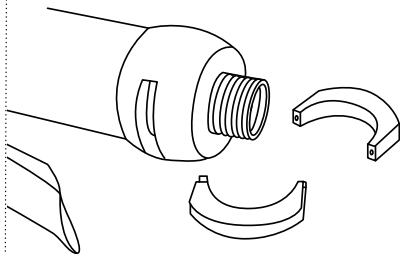


3

Verwijder het filter van het handvat en gooi het weg op de gebruikelijke manier.

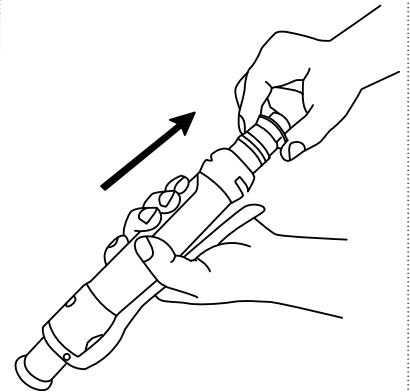


4

Reinig, ontkalk en desinfecteer de behuizing van het Knijpdouche in overeenstemming met de lokale richtlijnen.

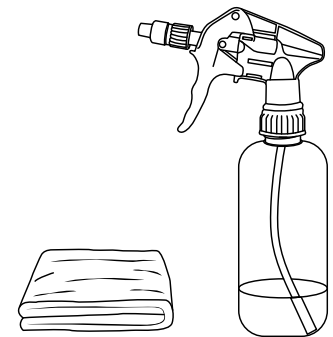


5

Plaats het nieuwe filter of de dummy.

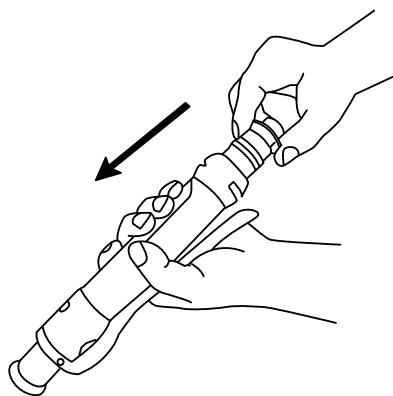


6

Plaats de vergrendelingspallen en draai de schroeven vast met een inbussleutel van maat 1,5 mm.

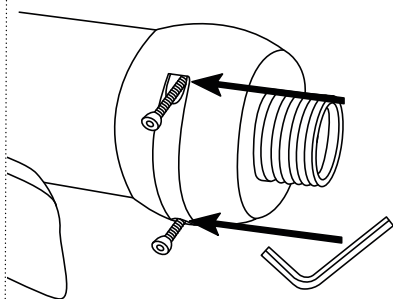

7

Vervang de eerder geïnstalleerde pakking in de slang op conische wijze en bevestig de slang stevig aan het Knijpdouche Filter. Het is nu klaar voor gebruik.

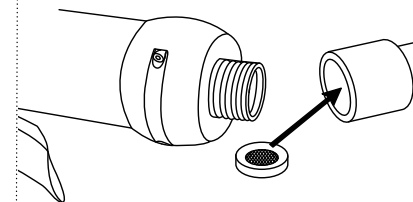

Reiniging

Als er professionele reinigingsprocedures gebruikt worden, mogen de externe oppervlakken van de hele filter met een nieuw wegwerpdoekje gereinigd worden. Er moet extra op worden gelet dat de uitlaten van de filter niet verontreinigd worden. Maak de filter tijdens het reinigen niet los.

Blootstelling aan chemische en thermische waterbehandeling

De filter kan de volgende voortdurende desinfectiebehandelingen verdragen:

- 30 ppm chloordioxide
- 15 ppm vrije chloor (hypochloriet)
- 10 ppm ozon
- 30 ppm waterstofperoxide
- 10 ppm chloramine

Schokbehandeling:

- tot 1.000 ppm vrije chloor gedurende 1 uur bij kamertemperatuur
- pH 12 gedurende 1 uur bij kamertemperatuur
- 1.000 ppm perazijnzuur gedurende 2 uur bij 60° C

De filter kan tijdens de levensduur tot wel 6 keer thermische desinfectie verdragen onder de volgende omstandigheden: 70° C gedurende 5 minuten.

Afvalverwijdering

Het filterpatroon en de niet-metalen onderdelen kunnen in de gewone vuilnisbak worden gegooid, in over-

eenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften onder afvalcategorienummer 180104 en conform EU-richtlijn 75/442/EEG.

De loodvrije messing onderdelen kunnen worden gereinigd, ontkalkt en gedesinfecteerd voor hergebruik met een vervangend filterpatroon. Zorg bij het afvoeren van metalen onderdelen dat deze op de juiste wijze worden gerecycled, volgens de lokale richtlijnen.

Opslag – niet-geïnstalleerde filter

Het product moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 5° C en 40° C en bij een luchtvochtigheidsgraad van max. 60%. Uiterste gebruiksdatum: zie het etiket op de verpakking of de markering op het product.

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de filter niet als de verpakking geopend of beschadigd is, of als de filter zichtbaar beschadigd is
- Maak de filter niet los tijdens de gehele gebruiksduur
- Voorkom mechanische belasting en sla niet op de filter met zware of metalen voorwerpen. Dit kan de filter beschadigen
- De uitlaat van de filter mag niet rechtstreeks in contact komen met huid of haar
- De filter mag niet continu worden gebruikt bij een watertemperatuur van meer dan 60° C. Het optimale bereik voor gebruik is 10° C - 45° C
- De filter is niet bestand tegen een druk van meer dan 5 bar

- Als de filter wordt blootgesteld aan een te hoge waterdruk, zal deze stukgaan (plotselinge toename van de waterstroom). In dat geval moet de filter worden weggegooid
- De filter kan niet tegen de werkingsrichting in worden uitgespoeld
- Het besmettingsniveau en de hoeveelheid deeltjes en stoffen in het water die de filter blokkeert, kunnen de gebruiksduur van de filter verkorten
- De filter mag niet worden gespoeld of gereinigd in een vaatwasser of autoclaaf
- De filter moet worden weggegooid als de uiterste gebruiksdatum is verstreken
- Breng geen wijzigingen aan de filter of de adapter aan

OPMERKING

- Gebruik het water niet voor contactlenzen
- De kwaliteit van het water is niet geschikt voor farmaceutisch gebruik
- De filter wijzigt de smaak, de geur en de chemische samenstelling van het water niet en leidt evenmin tot verandering in de concentratie van zouten, metalen, kalk, chemicaliën, pesticiden en kleurstoffen

Niet aansprakelijk voor druk- of typfouten.



T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød
Denmark

t: +45 48 17 22 82
e: info@t-safe.com

t-safe.com