



Brugsanvisning

DA

Chrome Wall Shower Filter



Beskrivelse


Chrome Wall Shower Filter fra produktserien T-safe Pro Water Filtration er særligt udviklet til at fjerne bakterier som f.eks. *Pseudomonas aeruginosa* og *Legionella pneumophila* fra postevand for at forhindre sygdomme forårsaget af infektioner i offentlige bygninger og hotelindustrien.

T-safe Chrome Wall Shower Filter tilbageholder effektivt bakterier i en periode på op til 92 dage inden for de begrænsninger for anvendelse, som er beskrevet heri.


Denne brugsanvisning dækker følgende produkter

Vare	Varenummer
Chrome Wall Shower Filter	02-803150
Udskiftningsfilter	02-000143
Waterway Cartridge	02-000145


Installering

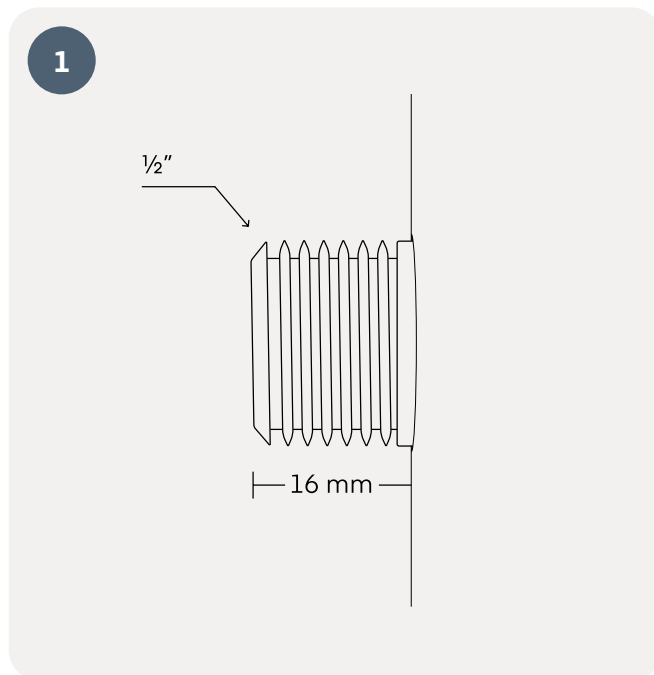

Sørg for, at det vandrør, filteret skal monteres på, maksimalt stikker 16 mm ud fra væggen.

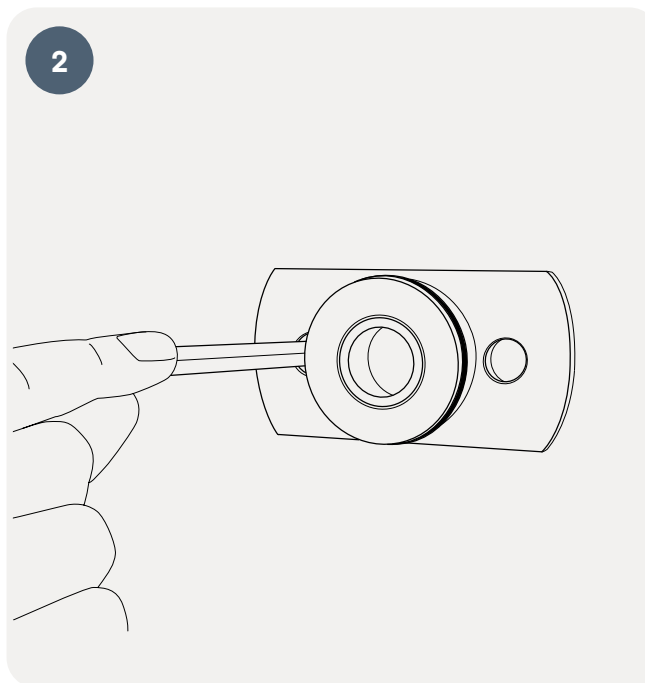


Start med at montere bagpladen på røret. Markér derefter de steder på væggen, hvor der skal bores huller. Afmonter bagpladen igen, når borehullerne er markeret.

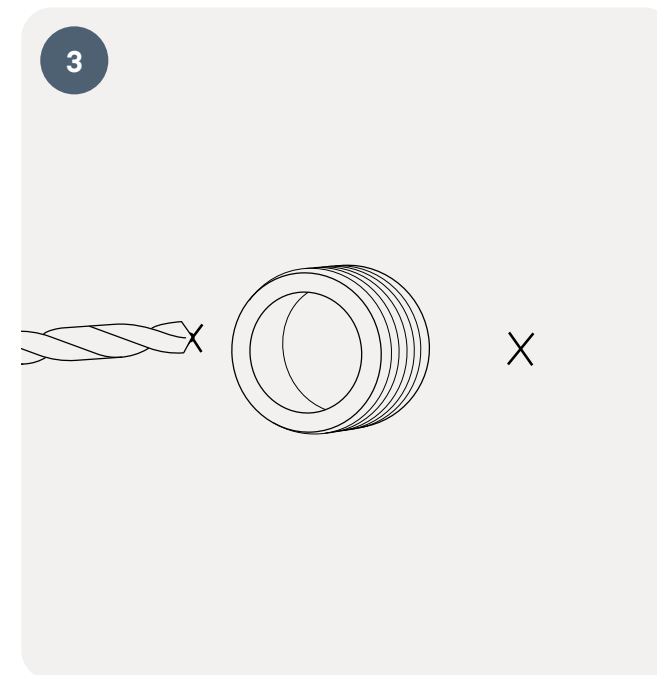


Brug et bor med Ø6 mm til at bore huller i væggen på de markerede steder. Sæt de medfølgende rawplugs i hullerne.

4

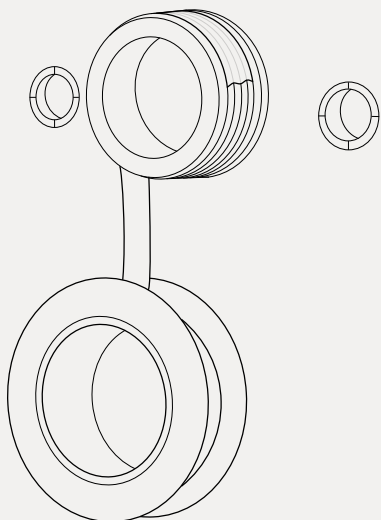


Monter egnet tætningsmateriale omkring røret for at sikre en tæt installation.

5

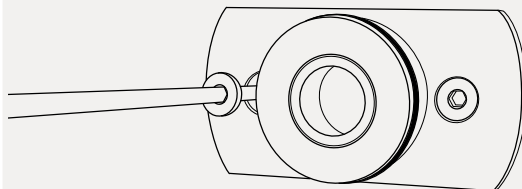

Monter bagpladen på væggen igen ved hjælp af de skruer, der følger med produktet.


6

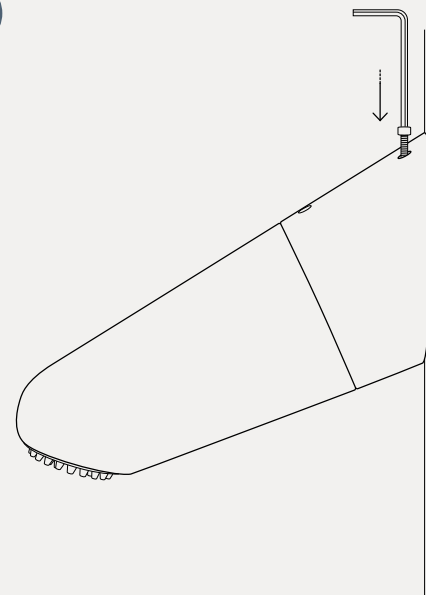


Monter brusehovedet på bagpladen. Tryk brusehovedet på plads, og fastgør det ved at stramme den skrue, som er placeret over eller under produktet, alt afhængigt af modellen.

Installering af udskiftningsfilter eller waterway cartridge

Installer produktet direkte fra emballagen.
Sørg for at filteret ikke kommer i kontakt med
kontamineringskilder inden installationen.

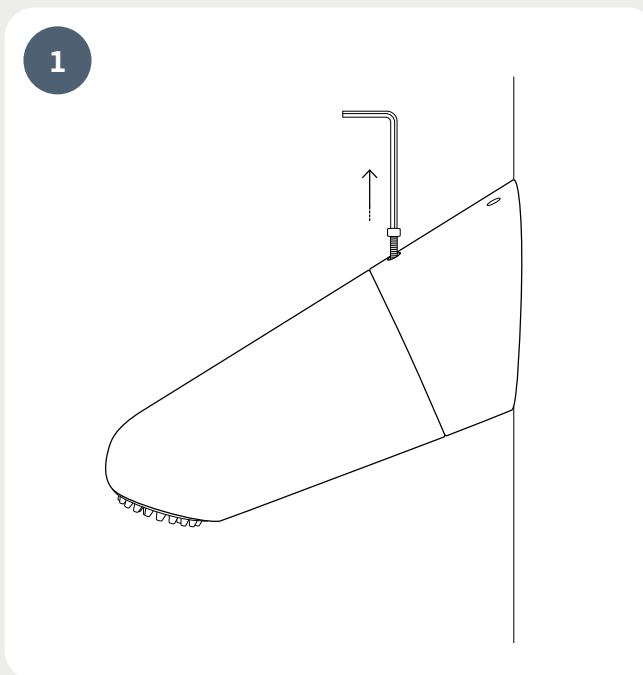


Start med at løsne den skrue, der er placeret over eller under produktet alt afhængigt af modellen.

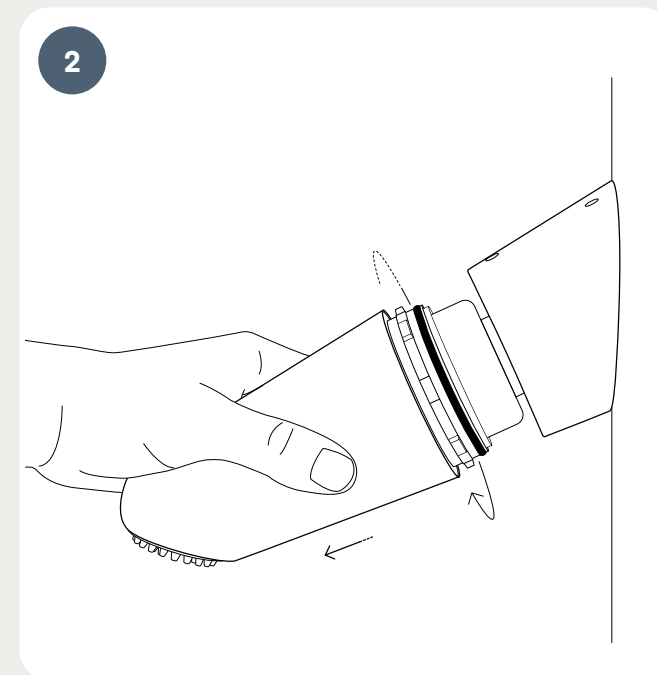


Afmonter brusehovedet ved at dreje det mod uret, samtidig med at du trækker det udad og væk fra væggen.

3

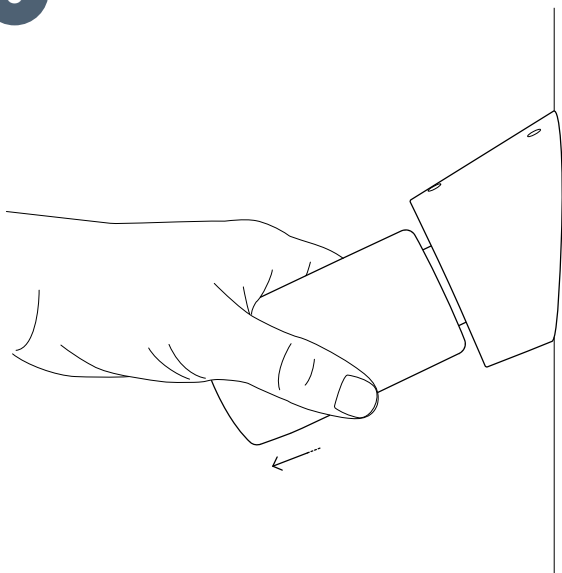


Drej og træk i filteret for at afmontere det.
Bortskaf filteret i henhold til den normale procedure
for bortskaffelse af affald.

4

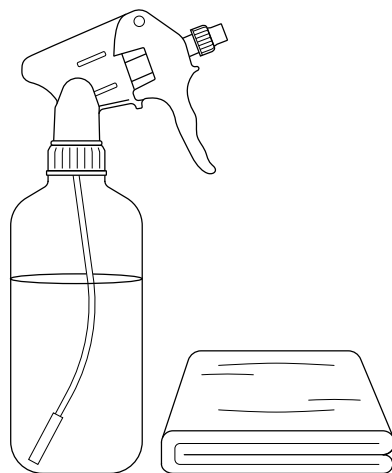


Rengør, afkalk og desinficer brusehovedet og
bundstykket i henhold til de lokale retningslinjer.

5

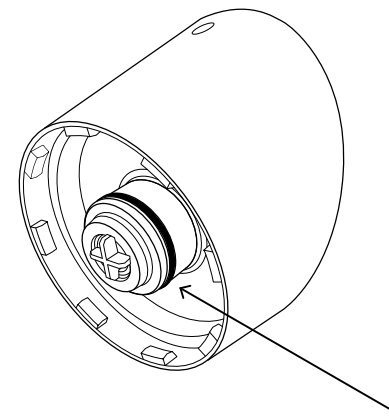


Udskift O-ringen i beslaget.

6

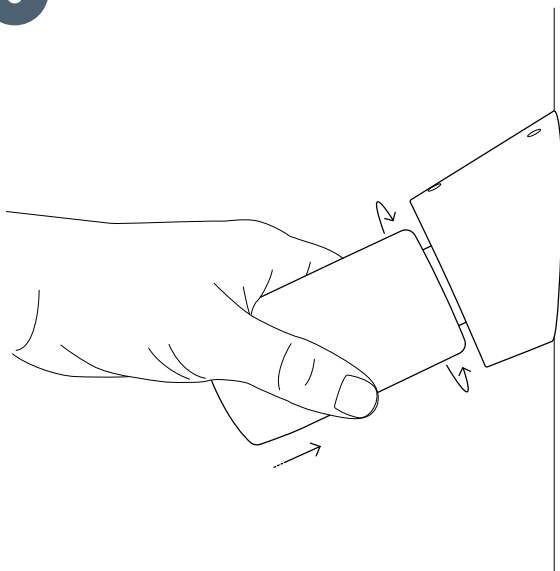

Monter det nye filter ved at trykke det ind og dreje på samme tid.

7

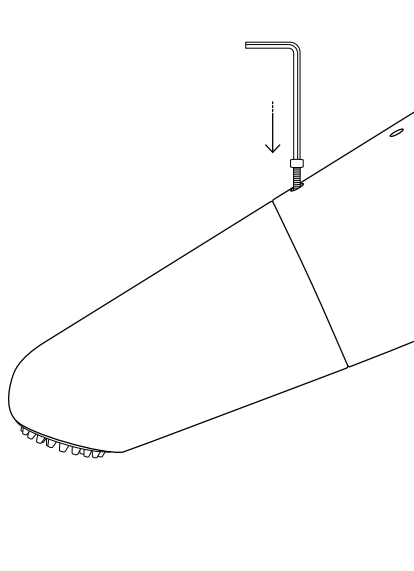

Monter brusehovedet på beslaget igen ved at dreje det med uret. Fastgør brusehovedet ved at stramme den skrue, der er placeret over eller under produktet alt afhængigt af modellen.

Information

Overfladerengøring og desinfektionsmidler

Hvis der er etableret professionelle rengøringsprocedurer, kan filterets udvendige overflader rengøres med en ny engangsklud. Der skal udvises særlig forsigtighed for at undgå kontaminering af nogen af filterets udløb. Filteret må ikke afmonteres under rengøring.

T-safe vandfiltre er kompatible med almindelige overfladedesinfektionsmidler og rengøringsmidler, dog med undtagelse af klorbaserede desinfektionsmidler på grund af produkternes forkromede overflade. Til rengøring og desinfektion kan filterhuset nedsænkes i op til 500.000 ppm citronsyre.

Opbevaring – filter, der ikke er taget i brug

Produktet skal opbevares ved temperaturer mellem 5 °C og 40 °C og ved en fugtighed på maks. 60 %. Udløbsdato: Se etiket på emballagen eller mærkningen på produktet.

Bortskaffelse

Filteret og ikke-metalliske dele kan bortskaffes som almindeligt affald i overensstemmelse med gældende lokale regler under affaldskode 180104 og i overensstemmelse med EU-direktiv 75/442/EØS.

De blyfri messingmetaldele kan rengøres, afkalkes og desinficeres, så de kan genanvendes med en ny filterpatron. Når metaldelene skal bortskaffes, skal det sikres, at de genanvendes korrekt i henhold til de lokale retningslinjer.

Tolerance over for desinfektionsmidler i vandsystemer

T-safe vandfiltre er kompatible med almindelige desinfektionsmidler til vandsystemer. Dette er valideret ved integritetstest af filtrene efter eksponering for følgende desinfektionsmidler ved de angivne koncentrationer og kontakttider:

- 30 ppm klordioxid kombineret med 200 mg/L suspenderede stoffer ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 30 ppm hydrogenperoxid ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 15 ppm frit klor ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 10 ppm ozon ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 10 ppm kloramin ved kontinuerlig drift gennem hele levetiden
- 1000 ppm frit klor ved en 1-times chokbehandling
- 50 ppm hypoklorsyre (HOCl) ved en 2-timers chokbehandling
- 50 ppm klordioxid ved en 2-timers chokbehandling
- 3500 ppm hydrogenperoxid ved en 6-timers chokbehandling
- 3000 ppm sølvstabiliseret hydrogenperoxid ved en 14-timers chokbehandling
- En vandig opløsning med pH 12 ved en 1-times chokbehandling
- 1000 ppm pereddikesyre ved 60 °C ved en 2-timers chokbehandling

Forholdsregler

- Brug ikke filteret, hvis pakken er åben eller beskadiget, eller filteret er synligt beskadiget
- Afmonter ikke filteret i brugsperioden
- Undgå mekanisk påvirkning, og slå ikke på filteret med tunge eller metalliske genstande, da dette kan beskadige filteret
- Filterets udløb må ikke komme i direkte kontakt med hud eller hår
- Filteret må ikke anvendes kontinuerligt ved vandtemperaturer over 60 °C. Det optimale driftsområde er 10 °C – 45 °C
- Filteret kan ikke tåle tryk over 5 bar
- Hvis filteret udsættes for et uforholdsmæssigt stort vandtryk, kan det medføre, at filteret falder sammen (pludseligt fald i vandgennemstrømning). Filteret skal i så fald kasseres
- Filteret må ikke tilbageskylles
- Kontamineringsgraden og mængden af filterblokerende partikler og stoffer i vandet kan forkorte filterets levetid
- Filteret må ikke skylles eller rengøres i en vaskemaskine eller autoklave
- Filteret skal bortskaffes, hvis udløbsdatoen er passeret
- Filteret eller adapteren må ikke modificeres eller ændres
- Vigtigt: Filteret må ikke placeres i et varmt vandbad

Bemærk

- Brug ikke vandet til kontaktlinser
- Vandkvaliteten er ikke egnet til farmaceutisk brug
- Filteret vil hverken ændre smagen eller lugten eller den kemiske sammensætning i vandet og medfører ikke ændringer i koncentrationen af salte, metaller, kalkaflejringer, kemiske stoffer, pesticider og farvestoffer

Der tages forbehold for trykfejl.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com