



Istruzione per l'uso IT

Chrome Wall Shower Filter



Descrizione

Il Chrome Wall Shower Filter della gamma Filtraggio T-Safe Pro Water è stato specificamente progettato per rimuovere batteri tra cui *Legionella pneumophila* e *Pseudomonas aeruginosa* dall'acqua del rubinetto e prevenire le infezioni in ambienti commerciali.


Il filtro tratterà in modo efficace i batteri per un periodo massimo di 92 giorni con i limiti d'uso qui descritti.

Queste Istruzioni d'uso si riferiscono ai seguenti prodotti

Articolo	Codice
Chrome Wall Shower Filter	02-803150
Filtro di Ricambio	02-000143
Cartuccia di Prova	02-000145


Installazione

1

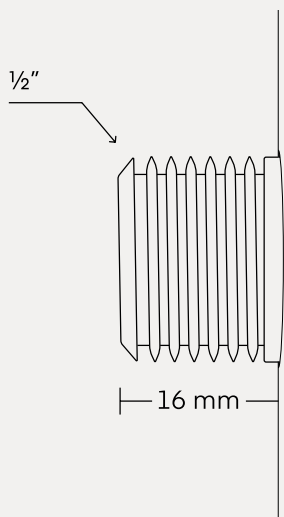


Assicurarsi che il tubo dell'acqua di collegamento sporga per un massimo di 16 mm dalla parete.

2

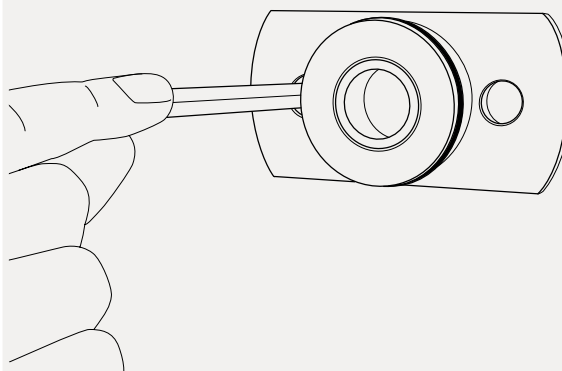


Iniziare fissando la piastra posteriore al tubo. Quindi contrassegnare sulla parete le posizioni in cui praticare i fori. Una volta contrassegnati i punti, rimuovere la piastra posteriore.

3

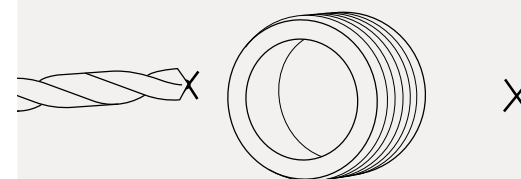


Utilizzare una punta da trapano Ø6 mm per praticare i fori nelle posizioni contrassegnate sulla parete. Inserire i tasselli in dotazione in questi fori.

4

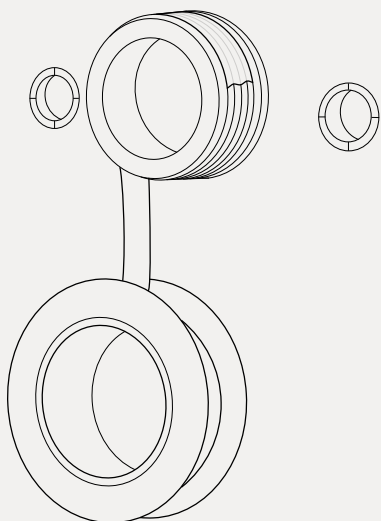


Per garantire un'installazione sicura, applicare un materiale sigillante appropriato attorno al tubo.

5

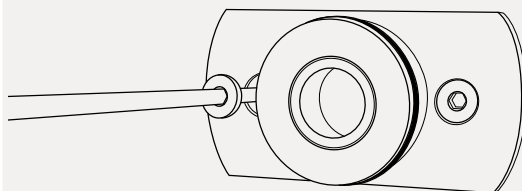

Montare la piastra posteriore sulla parete, utilizzando le viti in dotazione con il prodotto.


6

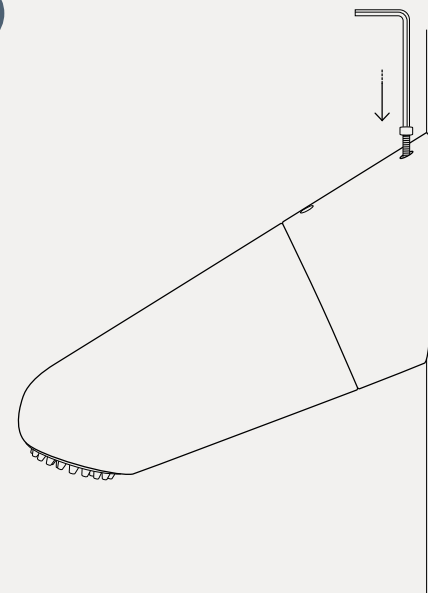


Posizionare il soffione sulla piastra posteriore. Spingerlo in posizione e fissarlo serrando la vite situata in alto o in basso, a seconda del modello della staffa.

Installazione del filtro di ricambio o della cartuccia di prova

Installare il prodotto subito dopo averlo disimballato e assicurarsi che il filtro non entri a contatto con fonti di contaminazione prima dell'installazione.

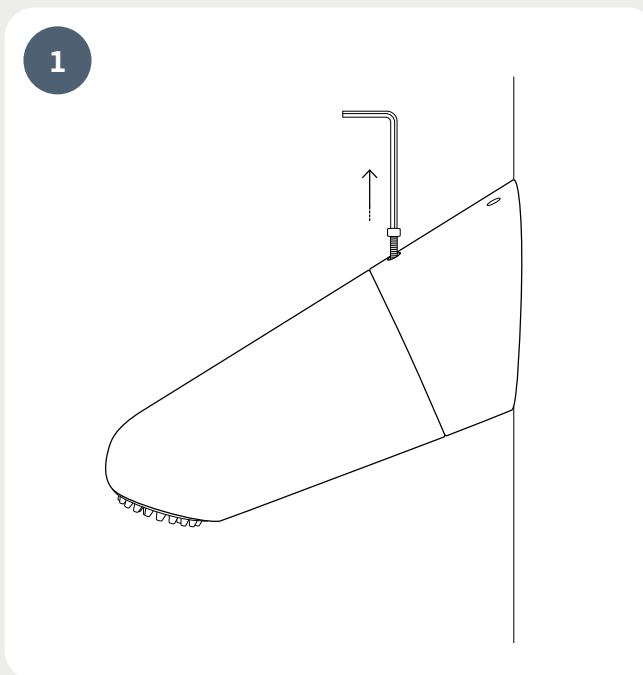


Iniziare allentando la vite situata in basso o in alto, a seconda del modello.

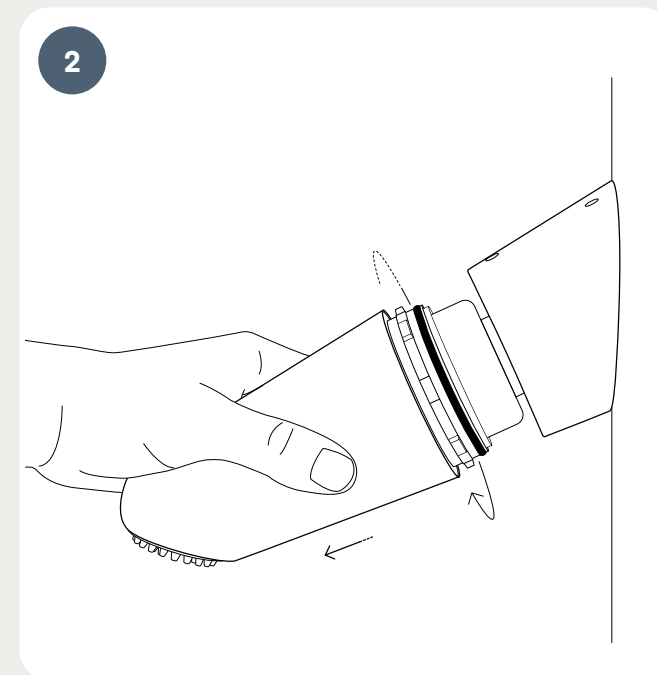


Per rimuovere il soffione, ruotarlo in senso antiorario e contemporaneamente sbloccarlo e tirarlo verso di sé.

3

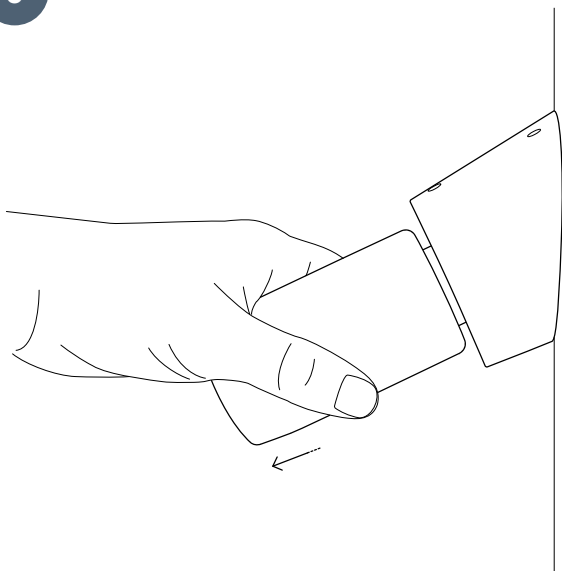


Procedere a ruotare e tirare verso di sé il filtro per estrarlo. Smaltire il filtro secondo le normali procedure di smaltimento.

4

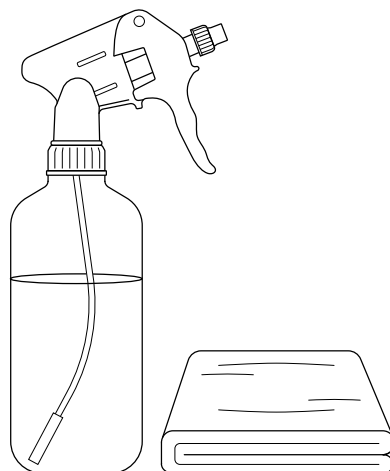


Assicurarsi di pulire, decalcificare e disinfettare il soffione e la base della doccia in conformità con le linee guida locali.

5

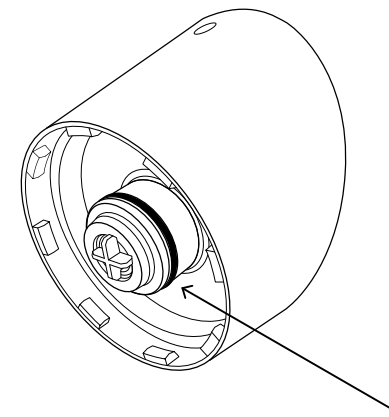


Riposizionare l'O-ring all'interno della staffa.

6

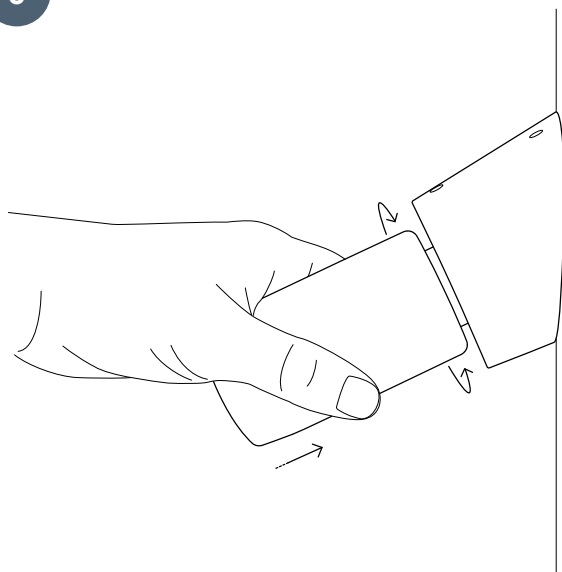

Installare il nuovo filtro spingendolo e ruotandolo contemporaneamente.

7

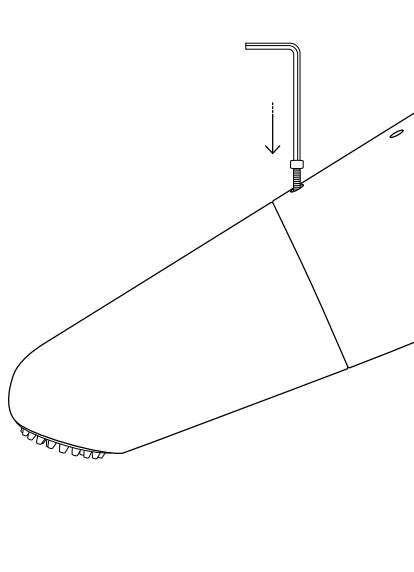

Montare nuovamente il soffione sulla staffa ruotandolo in senso orario. Fissare in posizione il soffione serrando la vite situata in alto o in basso, a seconda del modello.

Informazioni

Pulizia e disinfezione delle superfici

Se sono in atto procedure di pulizia professionale, le superfici esterne del filtro possono essere pulite utilizzando una nuova salvietta monouso. È necessario prestare particolare attenzione per evitare la contaminazione di qualsiasi uscita del filtro. Non scollegare il filtro durante la pulizia.

I filtri per l'acqua T-safe sono compatibili con i comuni disinfettanti e detergenti ad eccezione dei disinfettanti a base di cloro, a causa della superficie cromata. Per la pulizia e la disinfezione, è possibile immergere l'alloggiamento del filtro in acido citrico fino a 500.000 ppm.

Stoccaggio – filtro non messo in servizio

Stoccare a temperature comprese tra 5 °C e 40 °C e a un'umidità massima del 60 %. Data di scadenza: vedere l'etichetta sulla confezione o le indicazioni riportate sul prodotto.

Smaltimento

È possibile smaltire la cartuccia del filtro nei rifiuti ordinari in conformità alle normative locali applicabili nell'ambito della categoria codice rifiuti 180104 e alla direttiva UE 75/442/CEE.

Le parti metalliche in ottone senza piombo possono essere pulite, disincrostate e riutilizzate con una cartuccia di ricambio. Quando si smaltiscono le parti metalliche, assicurarsi di riciclarle in modo corretto attenendosi alle linee guida locali.

Tolleranza ai disinfettanti per impianti idrici

I filtri per l'acqua T-safe sono compatibili con i comuni disinfettanti per impianti idrici. Tale compatibilità è stata convalidata mediante test di integrità dei filtri dopo l'esposizione ai seguenti disinfettanti alle concentrazioni e al tempo di contatto indicati:

- 30 ppm di biossido di cloro in combinazione con 200 mg/L di solidi sospesi in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 30 ppm di perossido di idrogeno in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 15 ppm di cloro libero in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 10 ppm di ozono in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 10 ppm di clorammina in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 1000 ppm di cloro libero tramite un trattamento d'urto della durata di 1 ora
- 50 ppm di acido ipocloroso (HOCL) tramite un trattamento d'urto della durata di 2 ore
- 50 ppm di biossido di cloro tramite un trattamento d'urto della durata di 2 ore
- 3500 ppm di perossido di idrogeno tramite un trattamento d'urto della durata di 6 ore
- 3000 ppm di perossido di idrogeno stabilizzato con argento tramite un trattamento d'urto della durata di 14 ore
- Una soluzione acquosa con pH 12 tramite un trattamento d'urto della durata di 1 ora
- 1000 ppm di acido peracetico a 60 °C tramite un trattamento d'urto della durata di 2 ore

Precauzioni

- Non utilizzare il filtro se la confezione è aperta o danneggiata o se il filtro è visibilmente danneggiato
- Non scollegare il filtro durante il periodo di utilizzo
- Evitare l'impatto meccanico e non colpire il filtro con oggetti pesanti o metallici, in quanto potrebbe danneggiarsi
- L'uscita del filtro non deve venire a contatto diretto con la pelle o i capelli
- Non usare il filtro in modo continuativo con temperature dell'acqua superiori a 60 °C. La temperatura operativa ottimale è compresa tra 10 °C e 45 °C
- Il filtro non è in grado di sostenere una pressione superiore a 5 bar
- Se viene sottoposto a una pressione dell'acqua troppo elevata, il filtro cederà (riduzione improvvisa del flusso d'acqua). In questo caso, smaltire il filtro
- Il filtro non può essere sottoposto a controlavaggio
- Il livello di contaminazione e la quantità di particelle e sostanze presenti nell'acqua in grado di intasare il filtro possono ridurre la durata
- Non risciacquare o lavare il filtro in lavastoviglie o autoclave
- Una volta scaduto, smaltire il filtro
- Non modificare o apportare modifiche al filtro o all'adattatore
- Importante: il filtro non può essere posizionato in un bagno d'acqua calda

Nota

- Non utilizzare soluzioni di pulizia per le lenti a contatto
- La qualità dell'acqua non è idonea all'uso in ambito farmaceutico
- Il filtro non cambia il sapore o l'odore né la composizione chimica dell'acqua e non modifica la concentrazione di sali, metalli, incrostazioni di calcare, sostanze chimiche, pesticidi e coloranti

Nessuna responsabilità per errori tipografici e di stampa.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com