



Gebruiksaanwijzing NL

Wanddouche Filter Chroom



Beschrijving


Het Wanddouche Filter Chroom van de T-safe Pro Water Filtration-serie is speciaal ontworpen om bacteriën zoals o.a. *Legionella pneumophila* en *Pseudomonas aeruginosa* uit het leidingwater te verwijderen om infecties in commerciële omgevingen te voorkomen.

Het filter houdt bacteriën effectief vast voor een duur van maximaal 92 dagen, binnen de gebruiksbeperkingen zoals hierin beschreven.


Deze IFU heeft betrekking op de volgende producten

Artikel	Code
Wanddouche Filter Chroom	02-803150
Vervangend Filter	02-000143
Dummy-patroon	02-000145


Installatie

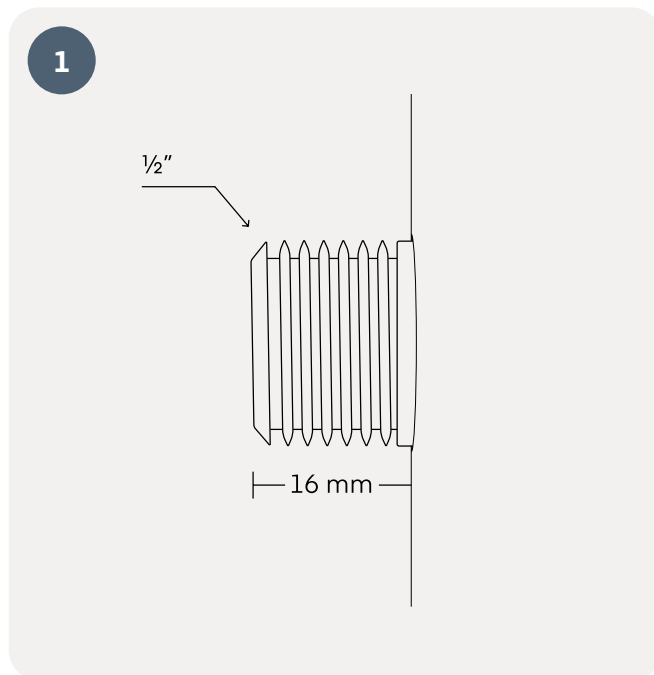

Zorg ervoor dat de aansluitwaterleiding maximaal 16 mm uit de muur steekt.

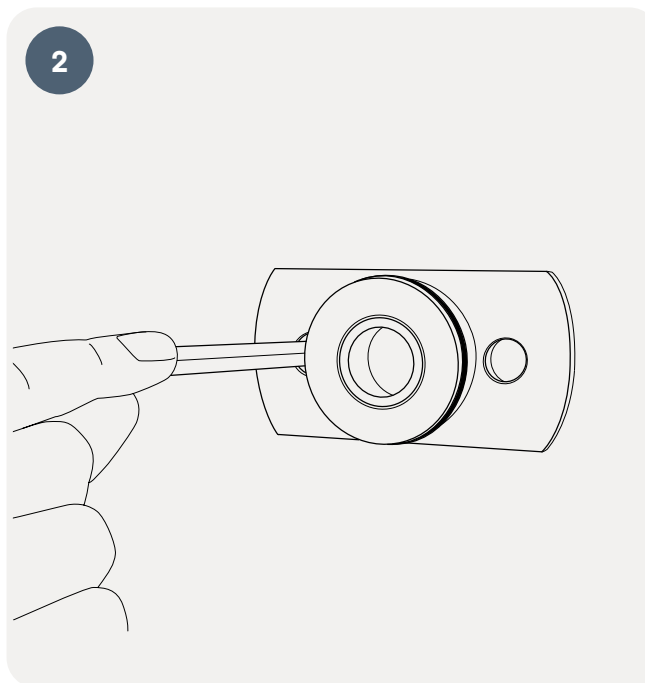


Begin met het bevestigen van de achterplaat aan de leiding. Markeer vervolgens de posities op de muur waar u gaten wilt boren. Zodra u de markeringen heeft aangebracht, verwijdt u de achterplaat.

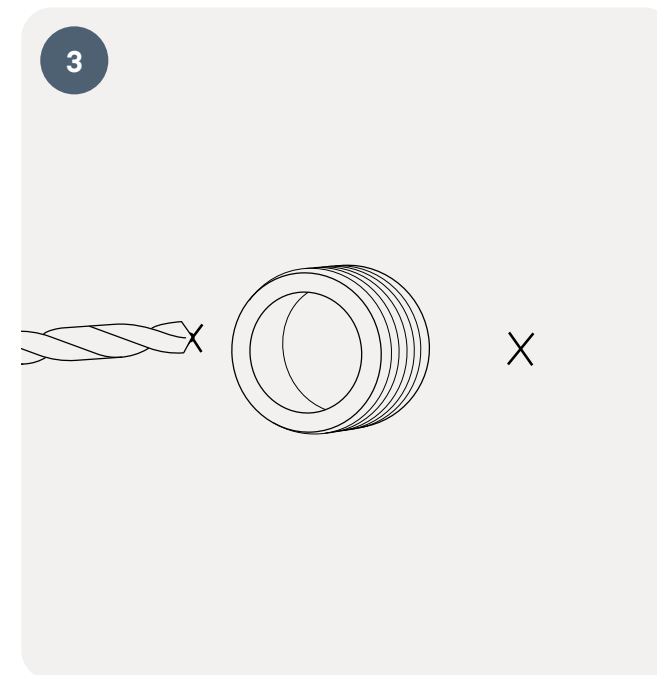


Gebruik een Ø6 mm boor om gaten te maken op de gemarkeerde posities op de muur. Steek de meegeleverde ruwe pluggen in deze gaten.

4

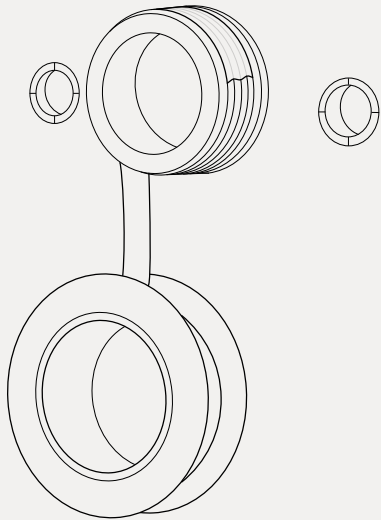


Om veiligheid bij de installatie te garanderen, brengt u een geschikt afdichtingsmateriaal rond de leiding aan.

5

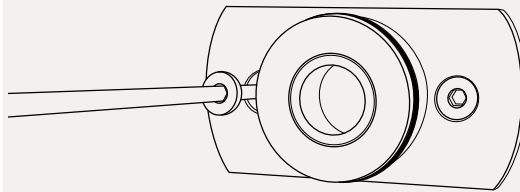

Bevestig de achterplaat opnieuw aan de muur met behulp van de schroeven die met het product zijn meegeleverd.


6

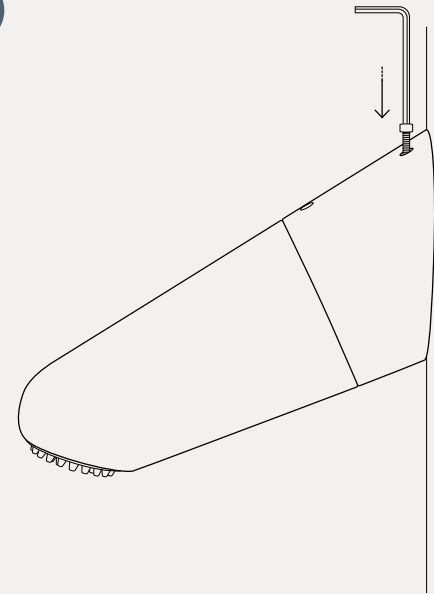


Plaats de douchekop op de achterplaat. Duw deze op zijn plaats en zet vast door de schroef aan de boven- of onderkant aan te draaien, afhankelijk van het model van de beugel.

Vervangend van het filter of installatie van een dummy-patroon

Installeer een nieuw filter rechtstreeks uit de verpakking en zorg ervoor dat het filter niet in contact komt met bronnen van verontreiniging voordat het wordt geïnstalleerd.

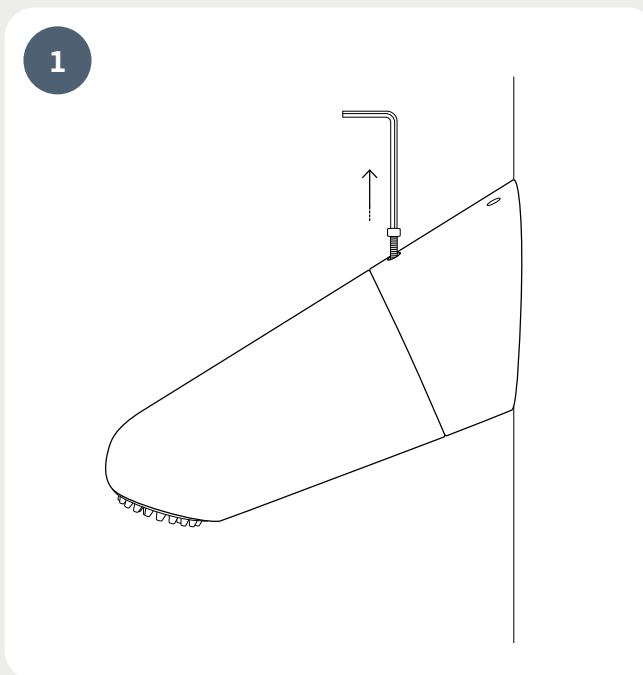


Begin met het losmaken van de schroef aan de onder- of bovenkant, afhankelijk van het model.

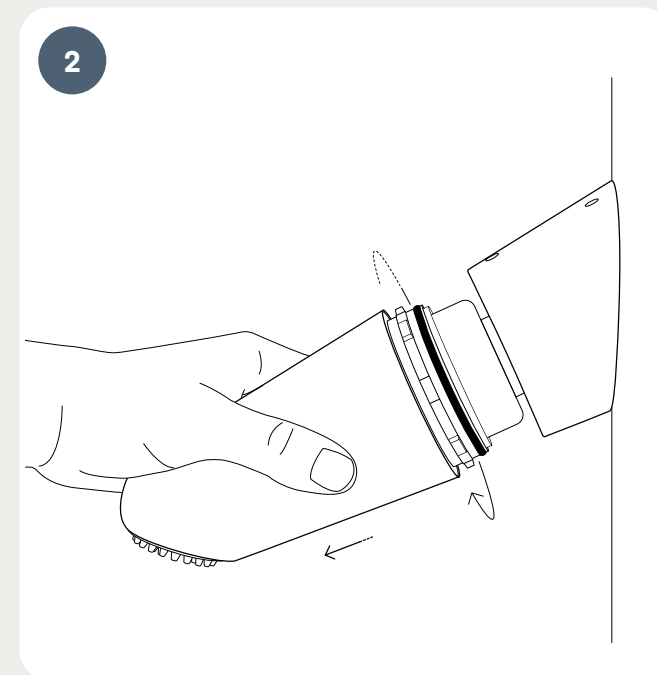


Om de douchekop te verwijderen, draait u deze tegen de klok in terwijl u de kop tegelijk losmaakt en uittrekt.

3

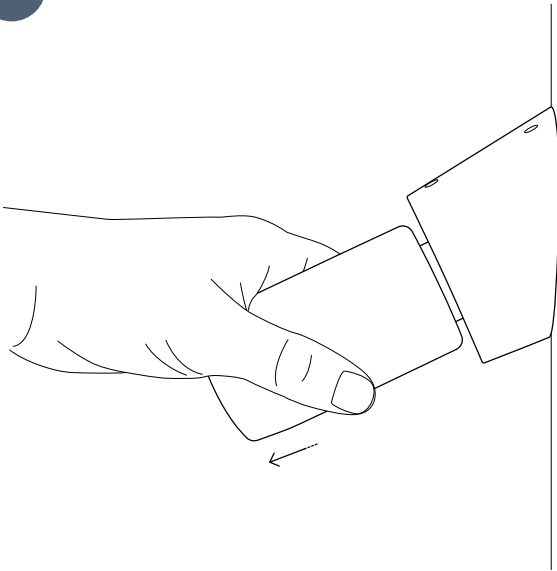


Ga door met draaien en trek aan het filter om het los te koppelen. Gooi het filter weg volgens de gebruikelijke verwijderingsmethoden.

4

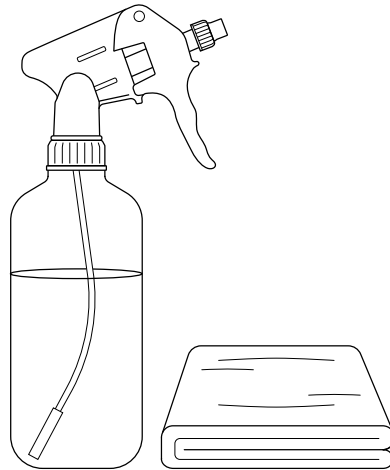


Zorg ervoor dat u de douchekop en -bak reinigt, ontkalkt en desinfecteert in overeenstemming met de lokale richtlijnen.

5

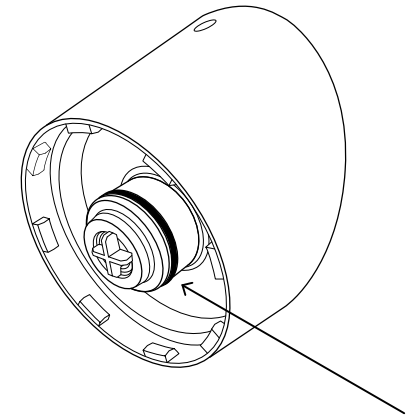


Plaats de O-ring terug in de beugel.

6

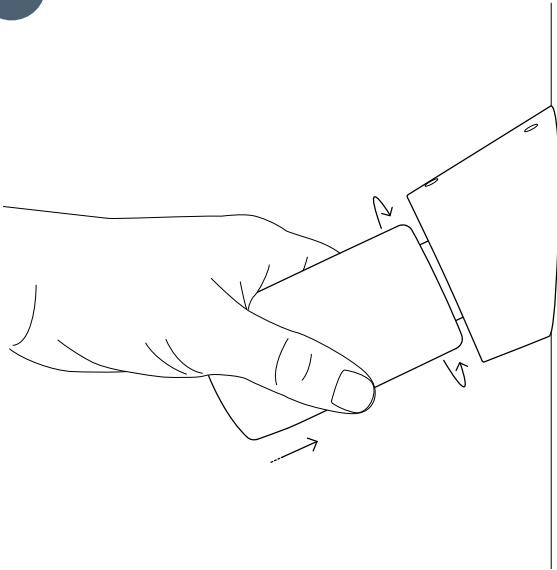

Installeer het nieuwe filter door het al draaiend aan te duwen.

7

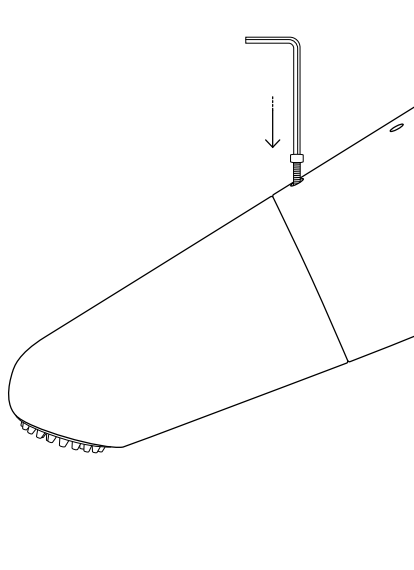

Bevestig de douchekop opnieuw aan de beugel door eraan te draaien met de klok mee. Bevestig de douchekop op zijn plaats door de schroef aan de boven- of onderkant aan te draaien, afhankelijk van het model.

Informatie

Reiniging en desinfectie van oppervlakken

Als er professionele reinigingsprocedures worden gehanteerd, mogen de externe oppervlakken van de filter met een nieuw wegwerpdoekje worden gereinigd. Er moet extra op worden gelet dat de uitgangen van de filter niet besmet raken om onbedoelde besmetting te voorkomen. Maak de filter niet los tijdens het reinigen.

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectie- en -schoonmaakmiddelen voor oppervlakken, met uitzondering van chloorhoudende desinfectiemiddelen vanwege het verchroomde oppervlak. Voor reiniging en desinfectie mag de filterbehuizing worden ondergedompeld in citroenzuur met een concentratie tot 500.000 ppm.

Opslag – niet-geïnstalleerde filter

Het product moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C en bij een luchtvochtigheidsgraad van max. 60 %. Uiterste gebruiksdatum: Zie het etiket op de verpakking of de markering op het product.

Afvalverwijdering

Het filterpatroon en de niet-metalen onderdelen kunnen in de gewone vuilnisbak worden gegooid, in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften onder afvalcategorienummer 180104 en conform EU-richtlijn 75/442/EEG.

De loodvrije messing onderdelen kunnen worden gereinigd, ontkalkt en gedesinfecteerd voor hergebruik met een vervangend filterpatroon. Zorg bij het afvoeren van metalen onderdelen dat deze op de juiste wijze worden gerecycled, volgens de lokale richtlijnen.

Tolerantie voor desinfectiemiddelen voor watersystemen

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectiemiddelen voor watersystemen. Dit is bevestigd door de integriteit van de filters te testen na blootstelling aan de volgende desinfectiemiddelen, bij de vermelde concentraties en contacttijden:

- 30 ppm chloordioxide in combinatie met 200 mg/l zwevende deeltjes bij continu gebruik gedurende de hele levensduur
- 30 ppm waterstofperoxide bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 15 ppm vrij chloor bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm ozon bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm chlooramine bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 1000 ppm vrij chloor tijdens een 1 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm hypochloorzuur (HOCL) tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm chloordioxide tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 3500 ppm waterstofperoxide tijdens een 6 uur durende schokbehandeling
- 3000 ppm met zilver gestabiliseerde waterstofperoxide tijdens een 14 uur durende schokbehandeling
- Een waterige oplossing met pH 12 tijdens een 1 uur durende shockbehandeling
- 1000 ppm perazijnzuur bij 60 °C tijdens een 2 uur durende schokbehandeling

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de filter niet als de verpakking geopend of beschadigd is, of als de filter zichtbaar beschadigd is
- Maak de filter niet los tijdens de gehele gebruiksduur
- Voorkom mechanische belasting en sla niet op de filter met zware of metalen voorwerpen. Dit kan de filter beschadigen
- De uitlaat van de filter mag niet rechtstreeks in contact komen met huid of haar
- De filter mag niet continu worden gebruikt bij een watertemperatuur van meer dan 60 °C. Het optimale bereik voor gebruik is 10 °C – 45 °C
- De filter is niet bestand tegen een druk van meer dan 5 bar
- Als de filter wordt blootgesteld aan een te hoge waterdruk, zal de filter barsten (plotse toename van het waterdebiet). In dat geval moet de filter worden weggegooid
- De filter mag niet tegen de werkingsrichting in worden gespoeld
- Het besmettingsniveau en de hoeveelheid deeltjes en stoffen in het water die de filter blokkeert, kunnen de gebruiksduur van de filter verkorten
- De filter mag niet worden gespoeld of gereinigd in een vaatwasser of autoclaaf
- De filter moet worden weggegooid als de uiterste gebruiksdatum is verstreken
- Breng geen wijzigingen aan de filter of de adapter aan
- Belangrijk: De filter mag niet in een bad met heet water worden geplaatst

Opmerking

- Gebruik het water niet voor contactlenzen
- De kwaliteit van het water is niet geschikt voor farmaceutisch gebruik
- De filter wijzigt de smaak, de geur en de chemische samenstelling van het water niet en leidt evenmin tot verandering in de concentratie van zouten, metalen, kalk, chemicaliën, pesticiden en kleurstoffen

Niet aansprakelijk voor druk- of typfouten.



T-safe A/S

Gydevang 1
3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82
info@t-safe.com
t-safe.com