



Gebrauchsanweisung DE

Aegis Handbrausefilter



Beschreibung

Der Filter der T-safe Pro Wasserfilter Reihe nutzt die Hohlfasermembran-Technologie, um Bakterien, wie beispielsweise *Legionella pneumophila*, gezielt aus dem Leitungswasser zu filtern und so Infektionen in gewerblichen Einrichtungen zu verhindern.

Der T-safe Aegis Handbrausefilter ist mit einem 1/2-Zoll-Außengewinde ausgestattet. Er wird mit einem Wasserdurchflussregler geliefert, der vor plötzlichen Wasserdruckspitzen schützt.


Der T-safe Aegis Handbrausefilter hält, bei Einhaltung der hier beschriebenen Nutzungsbeschränkungen, Bakterien für einen Zeitraum von bis zu 92 Tagen zurück.

Diese Gebrauchsanweisung gilt für die folgenden Produkte

Artikel	Artikelnr.
Aegis Handbrausefilter	02-803400
Ersatzfilterkartusche	02-000300
Dummykartusche	02-000122

Installation


1

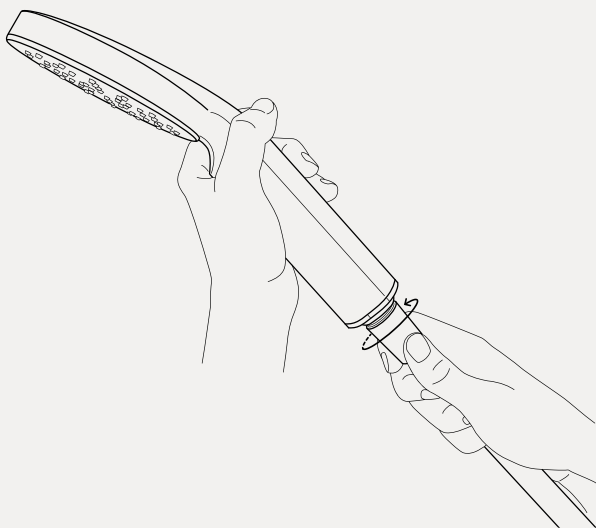

Ziehen Sie den Duschfilter handfest am Schlauch an.

Die Dichtung ist im Produkt integriert, um sicherzustellen, dass sie bei jedem Filterwechsel ausgetauscht wird, sodass keine Leckage auftritt.

2

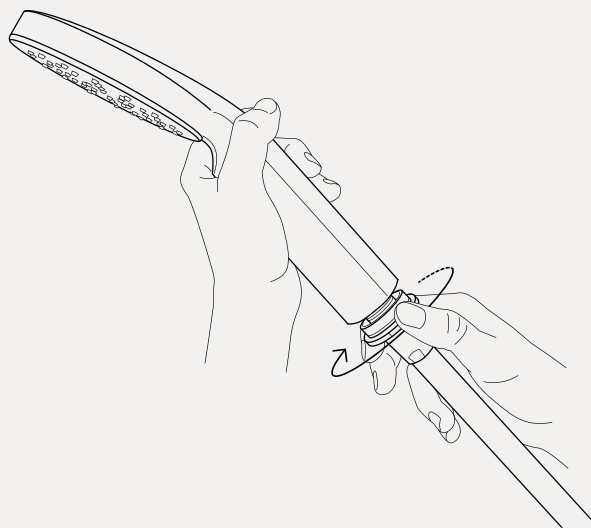


Lösen Sie den Sicherungsring an der Unterseite des Duschfilters, indem Sie ihn von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen.

3




Nehmen Sie anschließend den Duschgriff vom Filter ab. Achten Sie darauf, dass der Filter fest mit dem Schlauch verbunden ist, damit kein Wasser ausläuft.

4

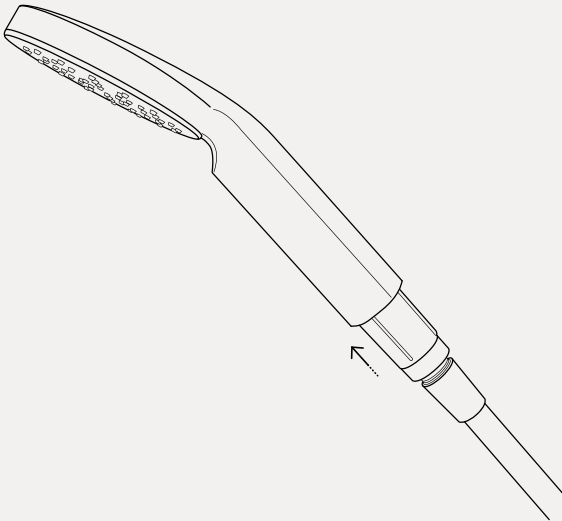

Schieben Sie den Filter anschließend wieder in den Duschgriff.


5

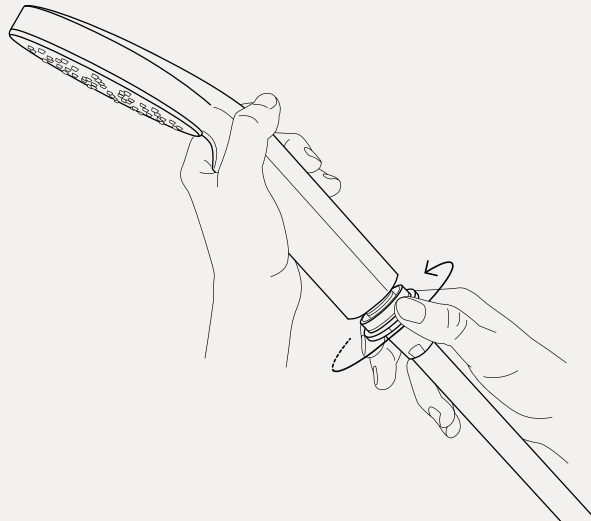

Bringen Sie zum Schluss den Verschlussring am Duschgriff an, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um den Filter sicher zu fixieren.


Austausch des Filters oder Installation der Dummykartusche

1

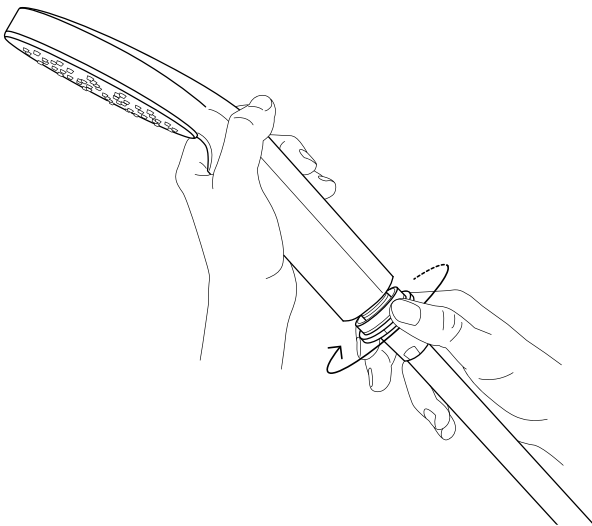


Lösen Sie den Sicherungsring an der Unterseite des Duschfilters, indem Sie ihn von Hand gegen den Uhrzeigersinn drehen.

2

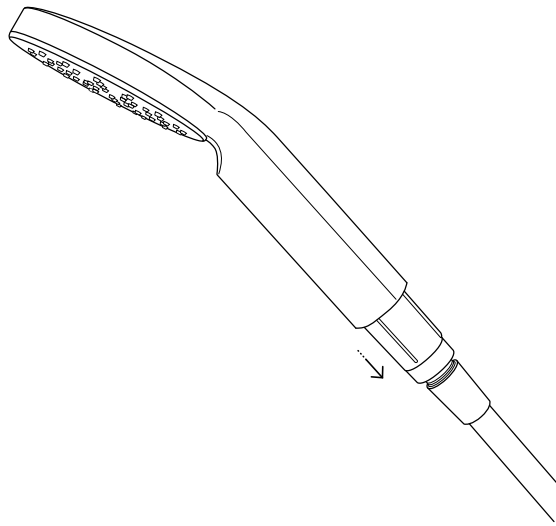


Nehmen Sie anschließend den Duschgriff vom Filter ab. Ersetzen Sie den gebrauchten Filter durch einen neuen oder setzen Sie eine Blindpatrone ein, wenn Sie ungefiltertes Wasser wünschen.

3

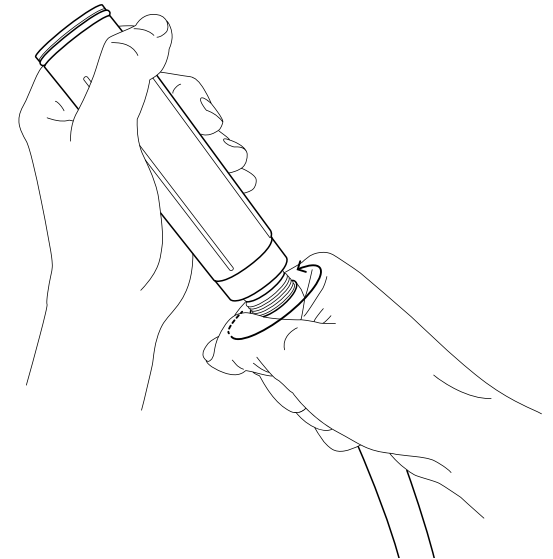


Stellen Sie sicher, dass der Filter fest mit dem Schlauch verbunden ist, um zu verhindern, dass Wasser ausläuft.

4

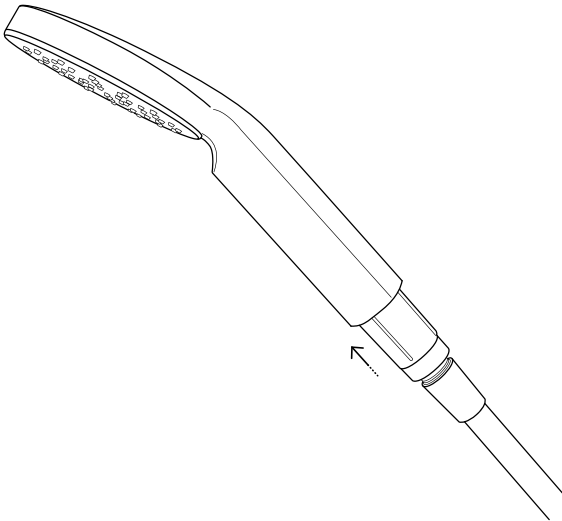

Schieben Sie den Filter anschließend wieder in den Duschgriff.

5

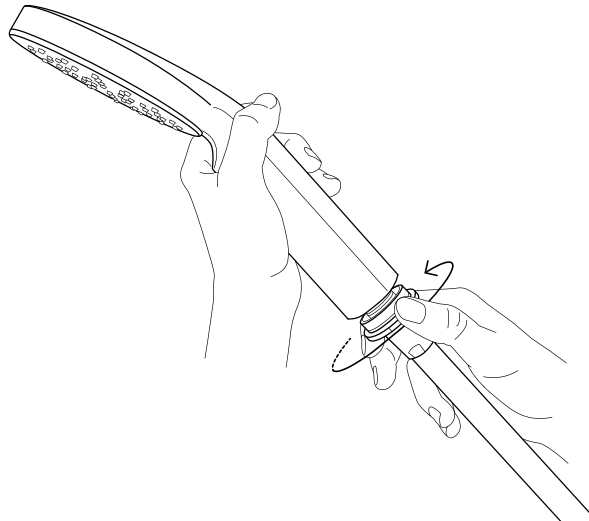

Bringen Sie zum Schluss den Verschlussring am Duschgriff an, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um den Filter sicher zu fixieren.

Information

Oberflächenreinigung und -desinfektion

Wenn es professionelle Reinigungsverfahren vorgesehen sind, können die Außenflächen des Filters mit einem neuen Einwegtuch. Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Kontamination ist besonders darauf zu achten, dass kein Ausgang des Filters verunreinigt wird. Entfernen Sie den Filter während der Reinigung nicht.

T-safe Wasserfilter sind mit gängigen Flächendesinfektions- und Reinigungsmitteln kompatibel, wobei chlorbasierte Desinfektionsmittel aufgrund ihrer verchromten Oberfläche ausgenommen sind. Zur Reinigung und Desinfektion kann das Filtergehäuse in Zitronensäure (bis zu 500.000 ppm) eingetaucht werden.

Lagerung – vor Verwendung

Das Produkt muss bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von max. 60 % gelagert werden. Verfallsdatum: Siehe Etikett auf der Verpackung oder Markierung auf dem Produkt.

Entsorgung

Die Filterkartusche und die nichtmetallischen Teile können in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Vorschriften unter der Abfallkategorie 180104 und gemäß der EU-Richtlinie 75/442/EWG über Abfälle entsorgt werden.

Toleranz gegenüber Desinfektionsmitteln des Leitungssystems

T-safe Filter sind mit gängigen Desinfektionsmitteln des Leitungssystems kompatibel. Dies wurde durch Integritätsprüfungen der Filter nach Kontakt gegenüber den folgenden Desinfektionsmitteln in den angegebenen Konzentrationen und Kontaktzeiten bestätigt:

- 30 ppm Chlordioxid in Kombination mit 200 mg/l Schwebstoffen im Dauerbetrieb über die Standzeit
- 30 ppm Wasserstoffperoxid im Dauerbetrieb über die Standzeit
- 15 ppm freies Chlor im Dauerbetrieb über die Standzeit
- 10 ppm Ozon im Dauerbetrieb über die Standzeit
- 10 ppm Chloramin im Dauerbetrieb über die Standzeit
- 1000 ppm freies Chlor bei 1-stündiger Schockbehandlung
- 50 ppm Hypochlorsäure (HOCl) bei 2-stündiger Schockbehandlung
- 50 ppm Chlordioxid bei 2-stündiger Schockbehandlung
- 3500 ppm Wasserstoffperoxid bei 6-stündiger Schockbehandlung
- 3000 ppm mit Silber stabilisiertes Wasserstoffperoxid bei 14-stündiger Schockbehandlung
- Eine wässrige Lösung mit pH 12 bei 1-stündiger Schockbehandlung
- 1000 ppm Peressigsäure bei 60 °C bei 2-stündiger Schockbehandlung

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Filter nicht, wenn die Verpackung offen oder beschädigt oder der Filter augenscheinlich beschädigt ist
- Entfernen Sie den Filter während der Verwendungsdauer nicht
- Vermeiden Sie mechanische Belastungen und schlagen Sie nicht mit schweren oder metallischen Gegenständen gegen den Filter, da dies den Filter beschädigen kann.
- Der Ausgang des Filters darf nicht in direkten Kontakt mit Haut oder Haaren kommen
- Der Filter darf nicht dauerhaft bei Wassertemperaturen über 60 °C verwendet werden. Der optimale Arbeitsbereich liegt bei 10 °C – 45 °C
- Der Filter ist nicht für Druck von mehr als 5 Bar geeignet
- Wird der Filter einem zu hohen Wasserdruck ausgesetzt, führt dies zu einem Kollaps der Filtermembran (plötzliche Abnahme des Wasserdurchflusses). In diesem Fall muss der Filter entsorgt werden
- Der Filter kann nicht „rückgespült“ werden
- Der Verschmutzungsgrad und die Menge an filterblockierenden Partikeln und Substanzen im Wasser können die Lebensdauer des Filters verkürzen
- Der Filter darf nicht in der Spülmaschine oder im Autoklaven gespült oder gereinigt werden
- Wenn das Verfallsdatum abgelaufen ist, muss der Filter entsorgt werden
- Der Filter und der Adapter dürfen nicht modifiziert werden
- Wichtig: Der Filter darf nicht in ein Heißwasserbad gelegt werden

Achtung

- Das Wasser nicht für Kontaktlinsen verwenden
- Die Wasserqualität eignet sich nicht für die pharmazeutische Verwendung
- Der Filter verändert den Geschmack, den Geruch oder die chemische Zusammensetzung des Wassers nicht und verursacht keine Veränderungen in der Konzentration von Salzen, Metallen, Kalkablagerungen, Chemikalien, Pestiziden und Farbstoffen

Es wird keine Haftung für Druck- oder Tippfehler übernommen.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Dänemark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com