



Istruzione per l'uso IT

Filtro Doccia Easy-Fix



Descrizione

Il Filtro T-safe per Doccia a Parete Easy-Fix della gamma Filtraggio T-Safe Pro Water è stato specificamente progettato per rimuovere batteri tra cui *Legionella pneumophila* e *Pseudomonas aeruginosa* dall'acqua del rubinetto e prevenire le infezioni in ambienti commerciali.

Il Filtro Doccia T-Safe Easy-Fix a Parete è un'unità completa con filettatura femmina da ½". Il filtro viene fornito con un regolatore di flusso dell'acqua che lo protegge da picchi di pressione improvvisi dell'acqua.


Il filtro tratterà in modo efficace i batteri per un periodo massimo di 92 giorni con i limiti d'uso qui descritti.

Queste Istruzioni d'uso si riferiscono ai seguenti prodotti

Articolo	Codice
Filtro Doccia Easy-Fix	02-092031
Filtro di Ricambio (solo filtro)	02-000200
Filtro di Ricambio (dispositivo completo)	02-000201

Installazione

1

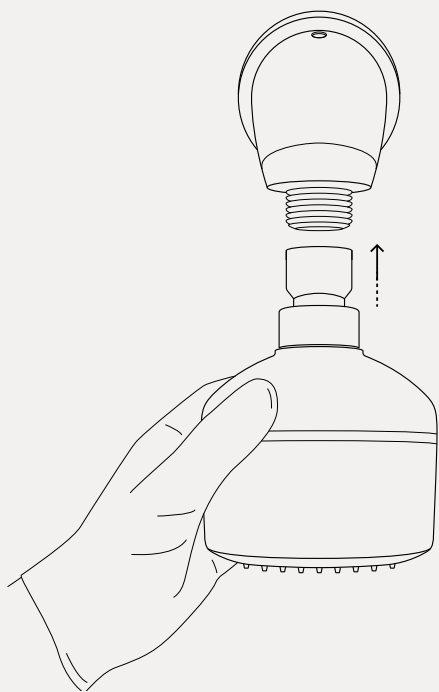


Montare l'unità completa su una filettatura standard da ½" (maschio). Assicurarsi di serrare in modo da evitare perdite.

Installazione del filtro di ricambio (solo filtro)

Installare il prodotto subito dopo averlo disimballato e assicurarsi che il filtro non entri a contatto con fonti di contaminazione prima dell'installazione.




Rimuovere la copertura dal corpo. Utilizzare lo strumento in dotazione e ruotare l'anello di bloccaggio verso sinistra (in senso orario).

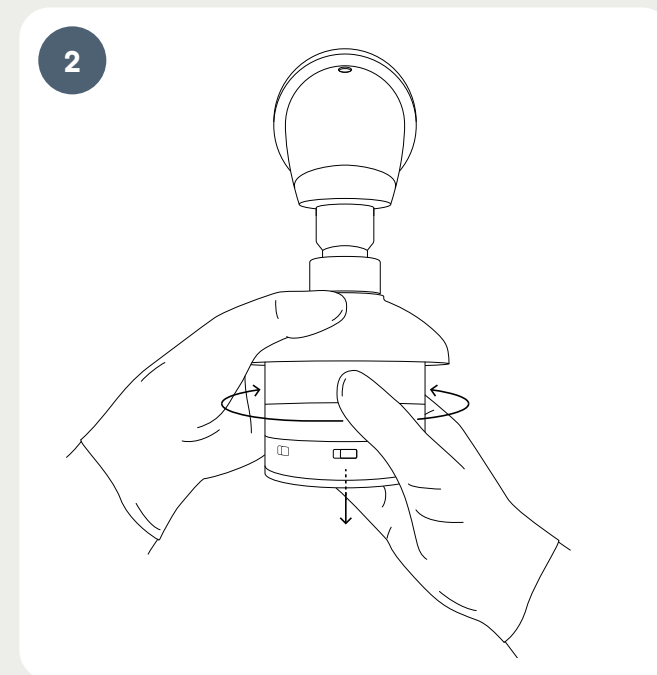


Ruotando delicatamente e tirando il filtro, la rimozione del filtro utilizzato risulta facile. Assicurarsi che il filtro utilizzato sia smaltito correttamente.

3

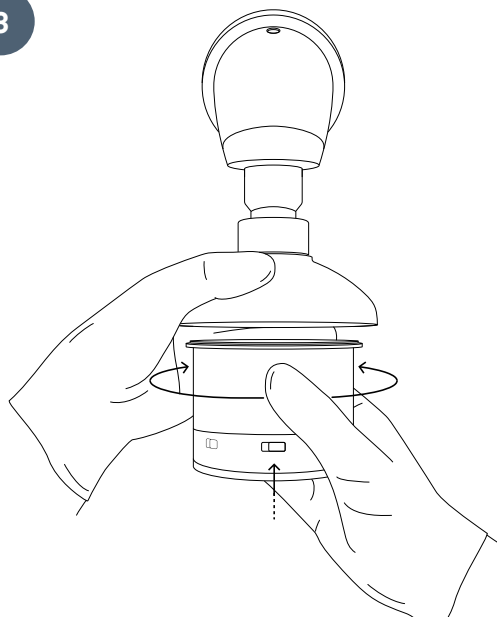

Inserire il nuovo filtro premendo e ruotando.

4

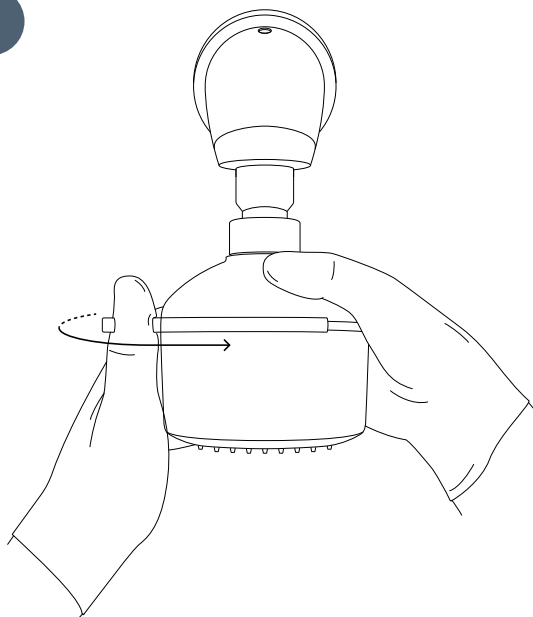


Applicare il coperchio sul corpo. Fissare il coperchio al corpo ruotando l'anello di bloccaggio in senso antiorario.

Installazione del filtro di ricambio (dispositivo completo)



Rimuovere il filtro utilizzato dal giunto sferico svitando l'unità completa.

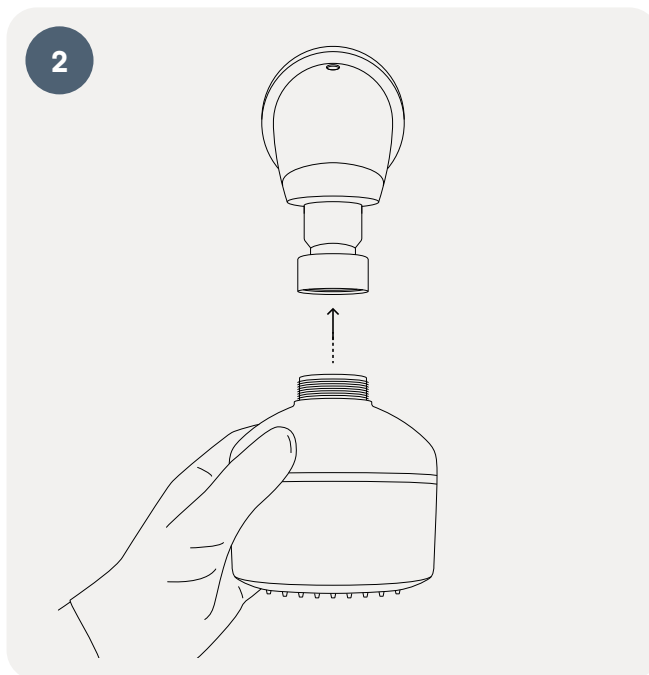

Montare la nuova unità filtro completa. Assicurarsi di serrare in modo che non si verifichino perdite.

Informazioni

Pulizia e disinfezione delle superfici

Se sono in atto procedure di pulizia professionale, le superfici esterne del filtro possono essere pulite utilizzando una nuova salvietta monouso. È necessario prestare particolare attenzione per evitare la contaminazione di qualsiasi uscita del filtro. Non scollegare il filtro durante la pulizia.

I filtri per l'acqua T-safe sono compatibili con i comuni disinfettanti e detergenti ad eccezione dei disinfettanti a base di cloro, a causa della superficie cromata. Per la pulizia e la disinfezione, è possibile immergere l'alloggiamento del filtro in acido citrico fino a 500.000 ppm.

Stoccaggio – filtro non messo in servizio

Stoccare a temperature comprese tra 5 °C e 40 °C e a un'umidità massima del 60 %. Data di scadenza: vedere l'etichetta sulla confezione o le indicazioni riportate sul prodotto.

Smaltimento

È possibile smaltire la cartuccia del filtro nei rifiuti ordinari in conformità alle normative locali applicabili nell'ambito della categoria codice rifiuti 180104 e alla direttiva UE 75/442/CEE.

Le parti metalliche in ottone senza piombo possono essere pulite, disincrostate e riutilizzate con una cartuccia di ricambio. Quando si smaltiscono le parti metalliche, assicurarsi di riciclarle in modo corretto attenendosi alle linee guida locali.

Tolleranza ai disinfettanti per impianti idrici

I filtri per l'acqua T-safe sono compatibili con i comuni disinfettanti per impianti idrici. Tale compatibilità è stata convalidata mediante test di integrità dei filtri dopo l'esposizione ai seguenti disinfettanti alle concentrazioni e al tempo di contatto indicati:

- 30 ppm di biossido di cloro in combinazione con 200 mg/L di solidi sospesi in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 30 ppm di perossido di idrogeno in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 15 ppm di cloro libero in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 10 ppm di ozono in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 10 ppm di clorammina in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 1000 ppm di cloro libero tramite un trattamento d'urto della durata di 1 ora
- 50 ppm di acido ipocloroso (HOCL) tramite un trattamento d'urto della durata di 2 ore
- 50 ppm di biossido di cloro tramite un trattamento d'urto della durata di 2 ore
- 3500 ppm di perossido di idrogeno tramite un trattamento d'urto della durata di 6 ore
- 3000 ppm di perossido di idrogeno stabilizzato con argento tramite un trattamento d'urto della durata di 14 ore
- Una soluzione acquosa con pH 12 tramite un trattamento d'urto della durata di 1 ora
- 1000 ppm di acido peracetico a 60 °C tramite un trattamento d'urto della durata di 2 ore

Precauzioni

- Non utilizzare il filtro se la confezione è aperta o danneggiata o se il filtro è visibilmente danneggiato
- Non scollegare il filtro durante il periodo di utilizzo
- Evitare l'impatto meccanico e non colpire il filtro con oggetti pesanti o metallici, in quanto potrebbe danneggiarsi
- L'uscita del filtro non deve venire a contatto diretto con la pelle o i capelli
- Non usare il filtro in modo continuativo con temperature dell'acqua superiori a 60 °C. La temperatura operativa ottimale è compresa tra 10 °C e 45 °C
- Il filtro non è in grado di sostenere una pressione superiore a 5 bar
- Se viene sottoposto a una pressione dell'acqua troppo elevata, il filtro cederà (riduzione improvvisa del flusso d'acqua). In questo caso, smaltire il filtro
- Il filtro non può essere sottoposto a controlavaggio
- Il livello di contaminazione e la quantità di particelle e sostanze presenti nell'acqua in grado di intasare il filtro possono ridurre la durata
- Non risciacquare o lavare il filtro in lavastoviglie o autoclave
- Una volta scaduto, smaltire il filtro
- Non modificare o apportare modifiche al filtro o all'adattatore
- Importante: il filtro non può essere posizionato in un bagno d'acqua calda

Nota

- Non utilizzare soluzioni di pulizia per le lenti a contatto
- La qualità dell'acqua non è idonea all'uso in ambito farmaceutico
- Il filtro non cambia il sapore o l'odore né la composizione chimica dell'acqua e non modifica la concentrazione di sali, metalli, incrostazioni di calcare, sostanze chimiche, pesticidi e coloranti

Nessuna responsabilità per errori tipografici e di stampa.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com