



Gebruiksaanwijzing NL

Wanddouche Filter Flex



Beschrijving

Het Wanddouche Filter Flex uit het assortiment T-safe Pro waterfiltratie is speciaal ontworpen om bacteriën, waaronder *Legionella pneumophila* en *Pseudomonas aeruginosa* uit leidingwater te verwijderen, en zo infecties te voorkomen in commerciële en openbare omgevingen.

De T-safe Wanddouche Filter Flex houdt bacteriën effectief tegen gedurende een periode van maximaal 92 dagen, mits gebruikt binnen de in deze gebruiksaanwijzing beschreven voorwaarden.


Deze IFU heeft betrekking op de volgende producten

Artikel	Code
Wanddouche Filter Flex	02-803170
Vervangend Filter	02-000187
Dummy-patroon	02-000186

Installatie

Met interne leidingen


1

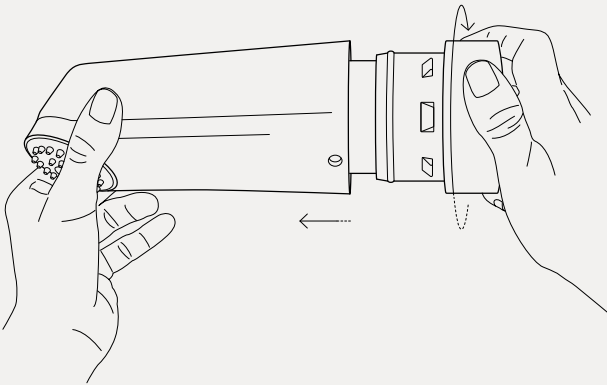

Begin met het loskoppelen van de douchekop van de zwarte achterplaat door de douchekop tegen de klok in te draaien.


Verwijder vervolgens het filterpatroon van de achterplaat.

2

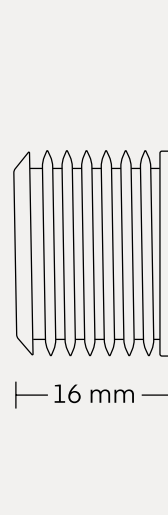

Zorg ervoor dat de aan te sluiten waterleiding maximaal 16 mm uit de muur steekt.


3

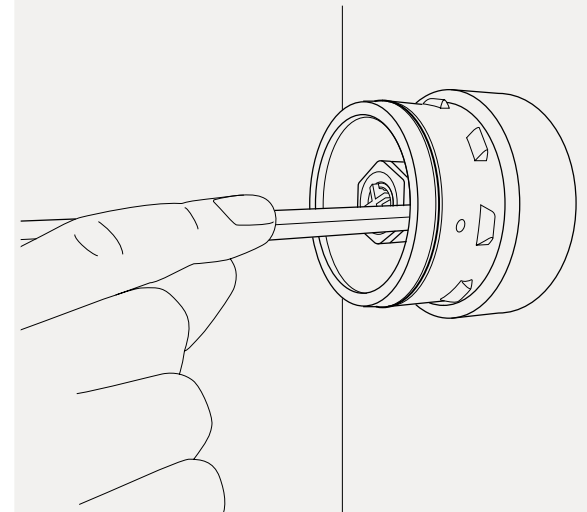

Bevestig de achterplaat aan de leiding en markeer de boorposities op de muur. Zorg ervoor dat de gaten waterpas zijn.


Verwijder daarna de achterplaat.

4

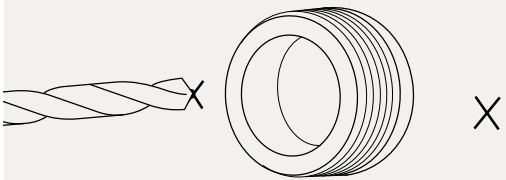


Boor gaten op de gemarkeerde posities met een Ø8 mm boor.

5

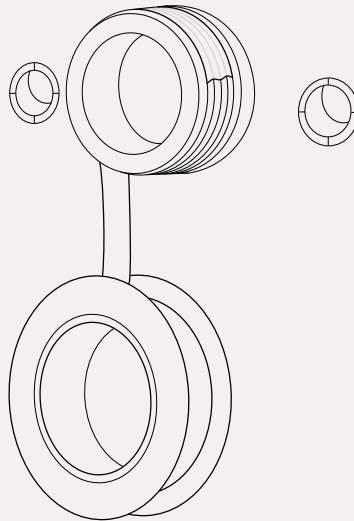


Breng een geschikt afdichtingsmateriaal aan rond de leiding om een waterdichte installatie te garanderen.

6

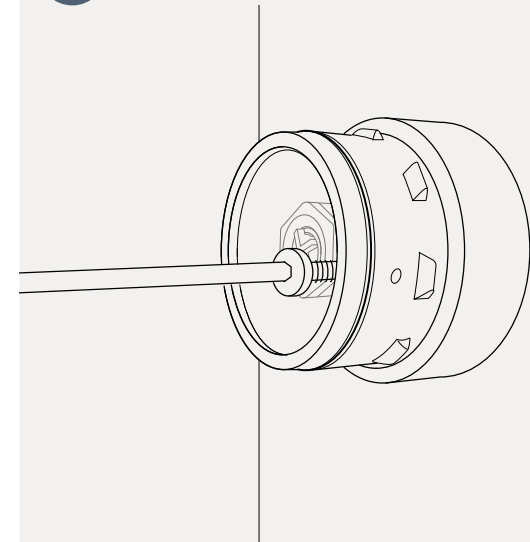

Bevestig de achterplaat aan de muur met de meegeleverde schroeven.


7

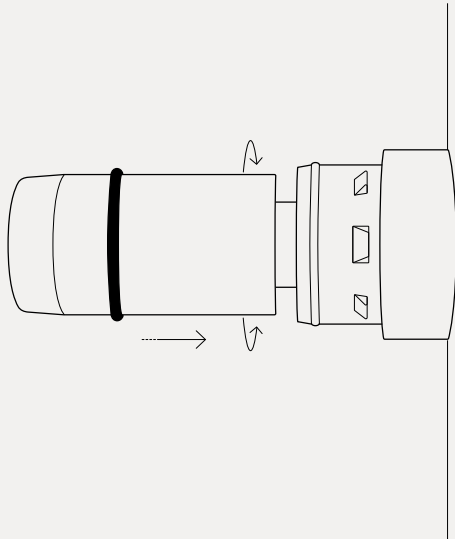

Installeer het filter op de achterplaat door het in te duwen en tegelijkertijd te draaien.

Zorg ervoor dat u de O-ring correct plaatst, tot tegen de achterplaat.

8

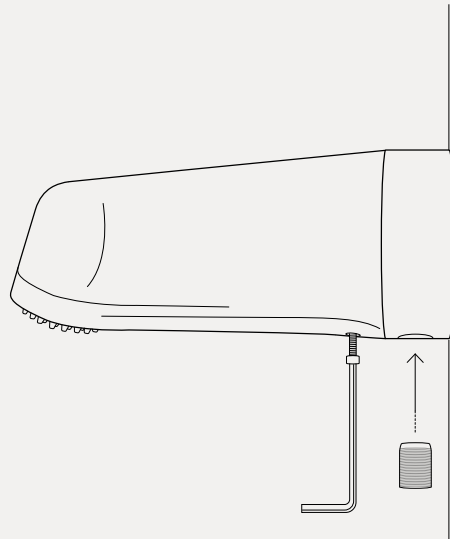


Bevestig de douchekop aan de achterplaat door deze met de klok mee te draaien. Zet de douchekop vast door de schroef aan te draaien. Plaats vervolgens de blinde plug.

Installatie

Met externe leidingen


1

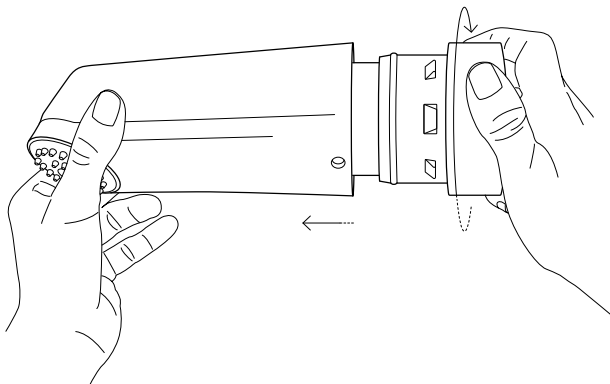

Begin met het loskoppelen van de douchekop van de zwarte achterplaat door de douchekop tegen de klok in te draaien.


Verwijder vervolgens het filterpatroon van de achterplaat.

2

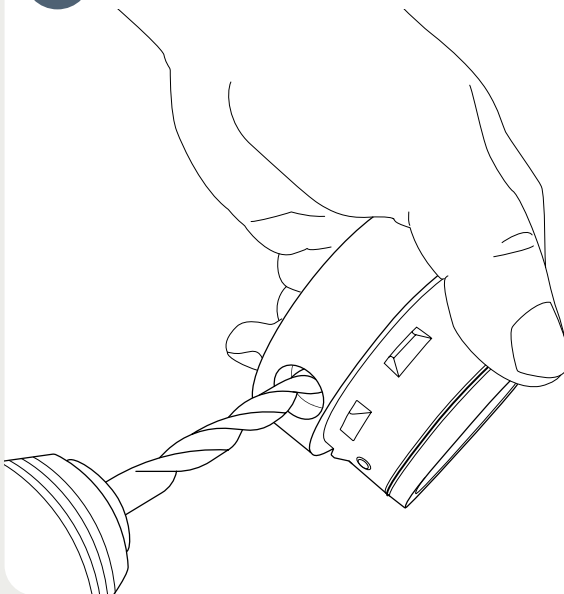


Boor met een Ø8 mm boor een gat in de achterplaat, zoals aangegeven in de tekening, zodat het water kan doorstromen. Stop zodra de boor volledig door het materiaal is.

3

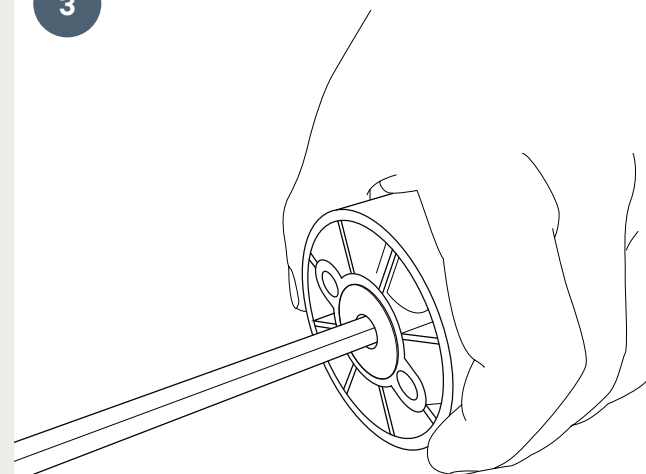

Plaats de blinde plug en draai deze vast met een 8 mm inbussleutel. **Dit is belangrijk om te voorkomen dat ongefilterd water terugstroomt.**


4

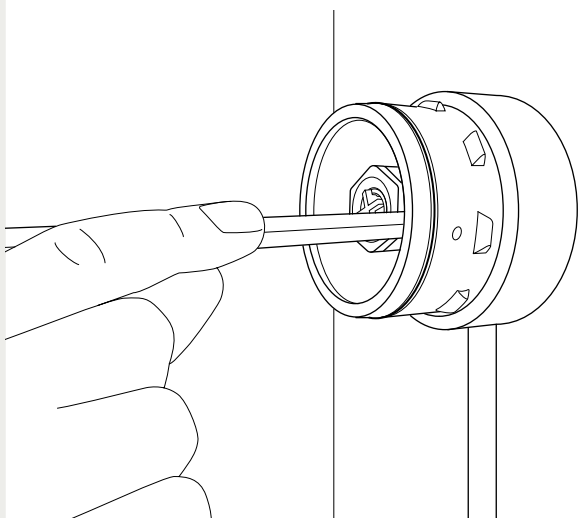

Bevestig de achterplaat aan de externe leiding en markeer de boorposities op de muur. Zorg ervoor dat de gaten waterpas zijn.

Zodra de markeringen zijn aangebracht, maakt u de achterkant los.


5

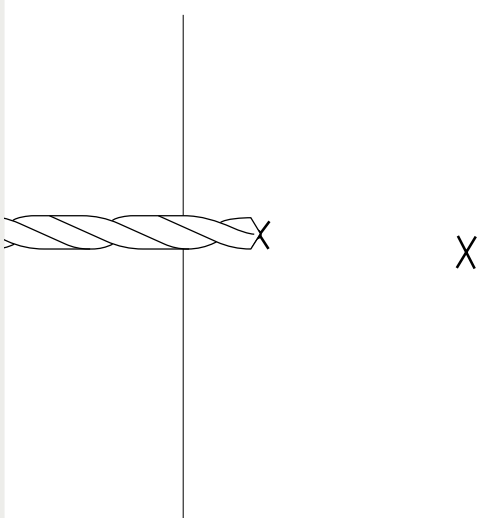

Boor gaten op de gemarkeerde posities met een Ø8 mm boor.


Plaats de meegeleverde muurpluggen in deze gaten.

6

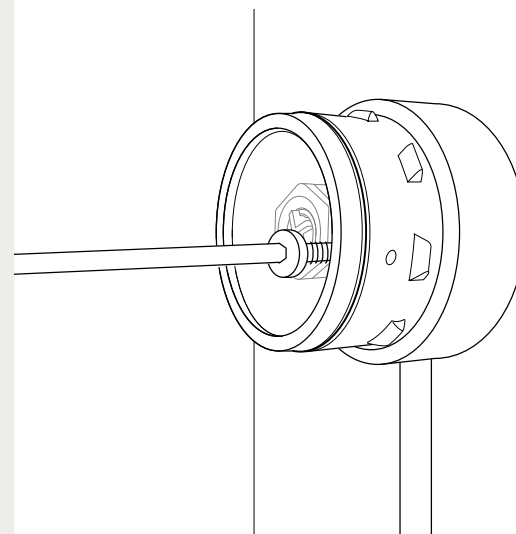

Bevestig de achterplaat aan de muur met de meegeleverde schroeven.


7

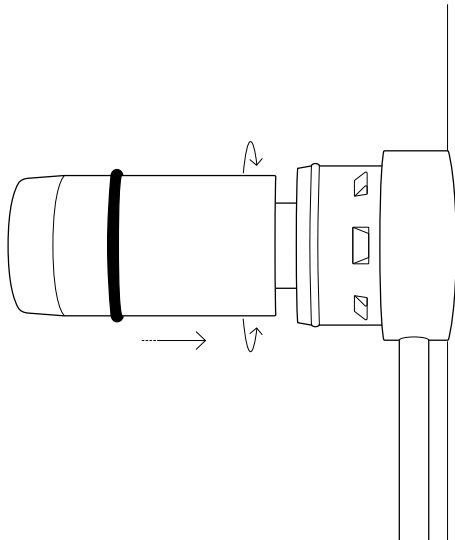

Installeer het filter op de achterplaat door het in te duwen en tegelijkertijd te draaien.

Zorg ervoor dat u de O-ring correct plaatst, tot tegen de achterplaat.


8

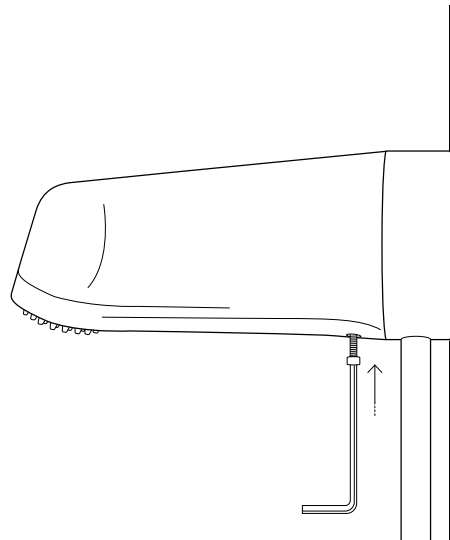

Bevestig de douchekop aan de achterplaat door deze met de klok mee te draaien. Zet de douchekop vast door de schroef aan te draaien.


Vervangend van het filter of installatie van een dummy-patroon

1

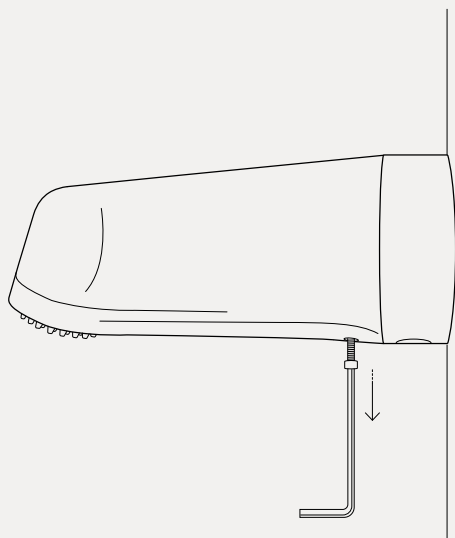


Begin met het losdraaien van de schroef aan de onder- of bovenkant, afhankelijk van het model.

2

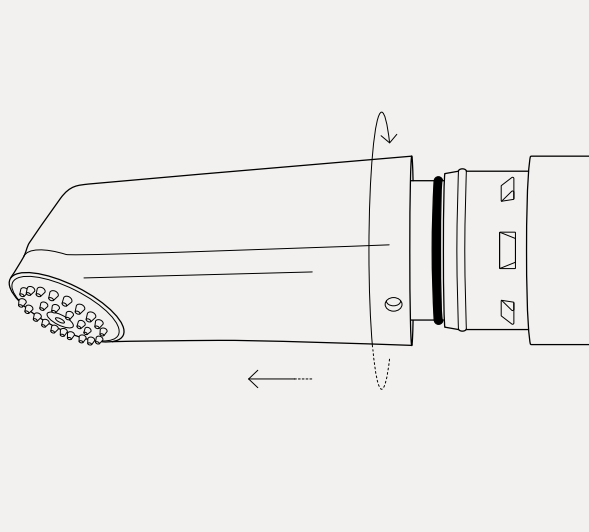

Om de douchekop te verwijderen, draait u die tegen de klok in terwijl u hem tegelijkertijd loslaat en wegtrekt.


3

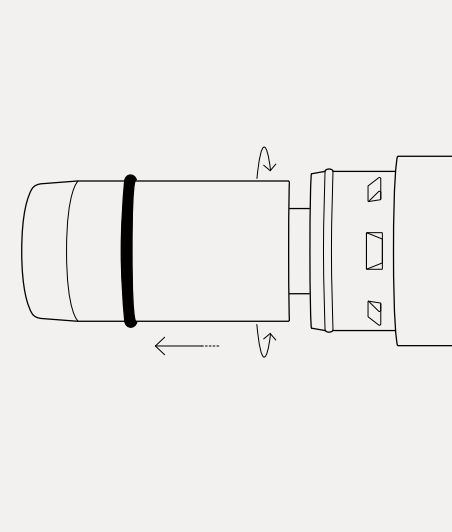

Draai en trek vervolgens aan het filter om het los te maken.


Voer het filter af volgens de normale afvalverwerkingsmethoden.

4

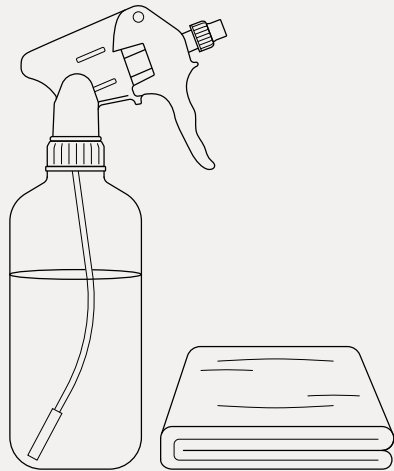


Reinig, ontkalk en desinfecteer de douchekop en achterplaat volgens de lokale richtlijnen.

5

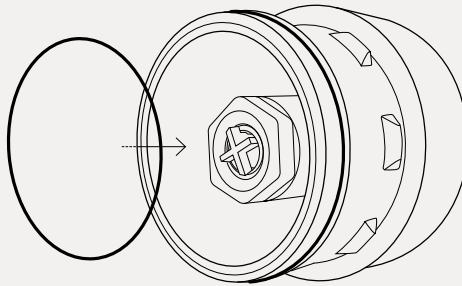


Vervang de O-ring in de houder.

6

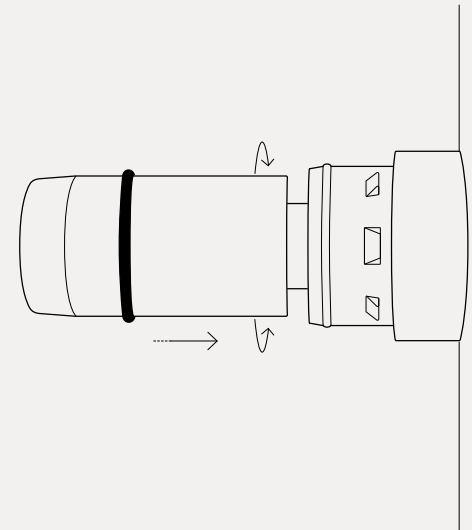

Plaats het nieuwe filter door het in te duwen en gelijktijdig te draaien.

7

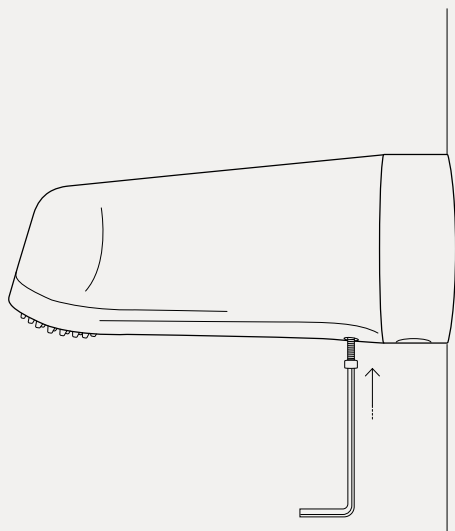

Bevestig de douchekop weer aan de houder door hem met de klok mee te draaien. Zet de douchekop vast door de schroef aan de bovenkant of onderkant vast te draaien, afhankelijk van het model.

Informatie

Reiniging en desinfectie van oppervlakken

Als er professionele reinigingsprocedures worden gehanteerd, mogen de externe oppervlakken van de filter met een nieuw wegwerpdoekje worden gereinigd. Er moet extra op worden gelet dat de uitgangen van de filter niet besmet raken om onbedoelde besmetting te voorkomen. Maak de filter niet los tijdens het reinigen.

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectie- en -schoonmaakmiddelen voor oppervlakken, met uitzondering van chloorhoudende desinfectiemiddelen vanwege het verchroomde oppervlak. Voor reiniging en desinfectie mag de filterbehuizing worden ondergedompeld in citroenzuur met een concentratie tot 500.000 ppm.

Opslag – niet-geïnstalleerde filter

Het product moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C en bij een luchtvochtigheidsgraad van max. 60 %. Uiterste gebruiksdatum: Zie het etiket op de verpakking of de markering op het product.

Afvalverwijdering

Het filterpatroon en de niet-metalen onderdelen kunnen in de gewone vuilnisbak worden gegooid, in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften onder afvalcategorienummer 180104 en conform EU-richtlijn 75/442/EEG.

Tolerantie voor desinfectiemiddelen voor watersystemen

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectiemiddelen voor watersystemen. Dit is bevestigd door de integriteit van de filters te testen na blootstelling aan de volgende desinfectiemiddelen, bij de vermelde concentraties en contacttijden:

- 30 ppm chloordioxide in combinatie met 200 mg/l zwevende deeltjes bij continu gebruik gedurende de hele levensduur
- 30 ppm waterstofperoxide bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 15 ppm vrij chloor bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm ozon bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm chlooramine bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 1000 ppm vrij chloor tijdens een 1 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm hypochloorzuur (HOCL) tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm chloordioxide tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 3500 ppm waterstofperoxide tijdens een 6 uur durende schokbehandeling
- 3000 ppm met zilver gestabiliseerde waterstofperoxide tijdens een 14 uur durende schokbehandeling
- Een waterige oplossing met pH 12 tijdens een 1 uur durende shockbehandeling
- 1000 ppm perazijnzuur bij 60 °C tijdens een 2 uur durende schokbehandeling

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de filter niet als de verpakking geopend of beschadigd is, of als de filter zichtbaar beschadigd is
- Maak de filter niet los tijdens de gehele gebruiksduur
- Voorkom mechanische belasting en sla niet op de filter met zware of metalen voorwerpen. Dit kan de filter beschadigen
- De uitlaat van de filter mag niet rechtstreeks in contact komen met huid of haar
- De filter mag niet continu worden gebruikt bij een watertemperatuur van meer dan 60 °C. Het optimale bereik voor gebruik is 10 °C – 45 °C
- De filter is niet bestand tegen een druk van meer dan 5 bar
- Als de filter wordt blootgesteld aan een te hoge waterdruk, zal de filter barsten (plotse toename van het waterdebiet). In dat geval moet de filter worden weggegooid
- De filter mag niet tegen de werkingsrichting in worden gespoeld
- Het besmettingsniveau en de hoeveelheid deeltjes en stoffen in het water die de filter blokkeert, kunnen de gebruiksduur van de filter verkorten
- De filter mag niet worden gespoeld of gereinigd in een vaatwasser of autoclaaf
- De filter moet worden weggegooid als de uiterste gebruiksdatum is verstreken
- Breng geen wijzigingen aan de filter of de adapter aan
- Belangrijk: De filter mag niet in een bad met heet water worden geplaatst

Opmerking

- Gebruik het water niet voor contactlenzen
- De kwaliteit van het water is niet geschikt voor farmaceutisch gebruik
- De filter wijzigt de smaak, de geur en de chemische samenstelling van het water niet en leidt evenmin tot verandering in de concentratie van zouten, metalen, kalk, chemicaliën, pesticiden en kleurstoffen

Niet aansprakelijk voor druk- of typfouten.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com