



Istruzione per l'uso IT

Filtri per Doccia Pro



Descrizione

Il filtro della gamma Filtraggio T-Safe Pro Water è basato sulla tecnologia a membrana cava ed è progettato specificamente per rimuovere batteri, tra cui la *Pseudomonas aeruginosa* e la *Legionella pneumophila* dall'acqua di rubinetto, in modo da prevenire malattie causate da infezioni in ospedali e strutture sanitarie.

I Filtri per Doccia Pro T-safe sono dotati di un attacco maschio da 1/2". I filtri sono forniti con un regolatore di flusso d'acqua, che protegge i filtri da improvvisi picchi di pressione dell'acqua.


T-safe Filtri per Doccia Pro trattiene efficacemente i batteri per un periodo massimo di 92 giorni, entro i limiti di utilizzo descritti nel presente documento.

Queste Istruzioni d'uso si riferiscono ai seguenti prodotti

Articolo	Codice
Filtro per Doccia Cromato	02-803102
Filtro per Doccia Bianco	02-803103
Filtro per Doccia di Emergenza	02-803112
Filtro di Ricambio	02-000077

Installazione


1

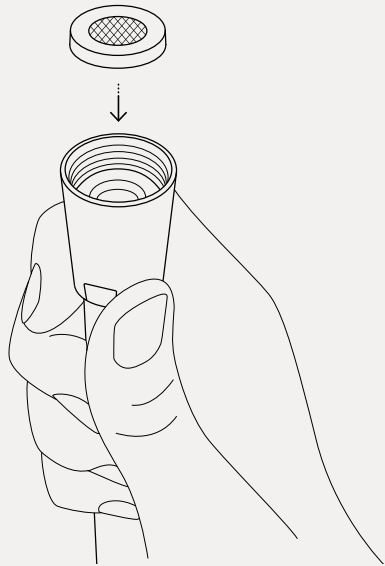

Installare sul tubo flessibile della doccia la guarnizione fornita al posto di quella esistente.

Effettuare questa operazione ogni volta che si installa un nuovo filtro T-safe, per garantire la perfetta tenuta del raccordo.


2

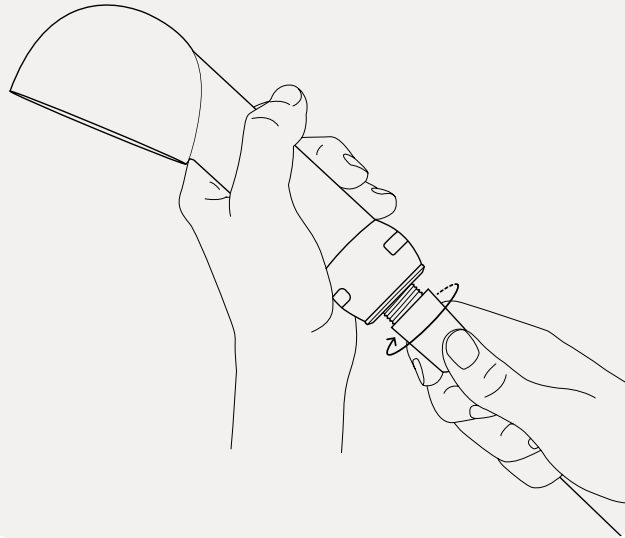


Fissare saldamente il tubo flessibile della doccia al Filtro per Doccia.

Installazione del filtro di ricambio

Installare il prodotto subito dopo averlo disimballato e assicurarsi che il filtro non entri a contatto con fonti di contaminazione prima dell'installazione.

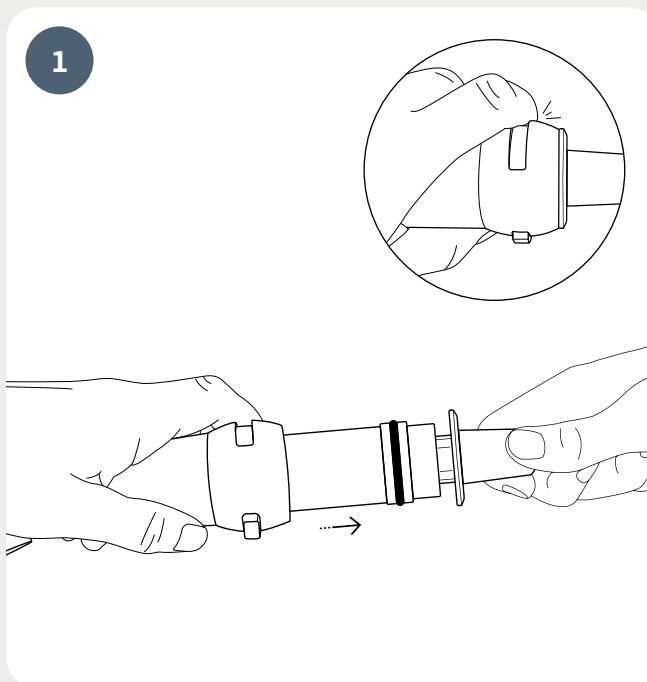


Sbloccare il filtro premendo verso il basso la linguetta di bloccaggio sull'impugnatura. Estrarre quindi il filtro dall'impugnatura.

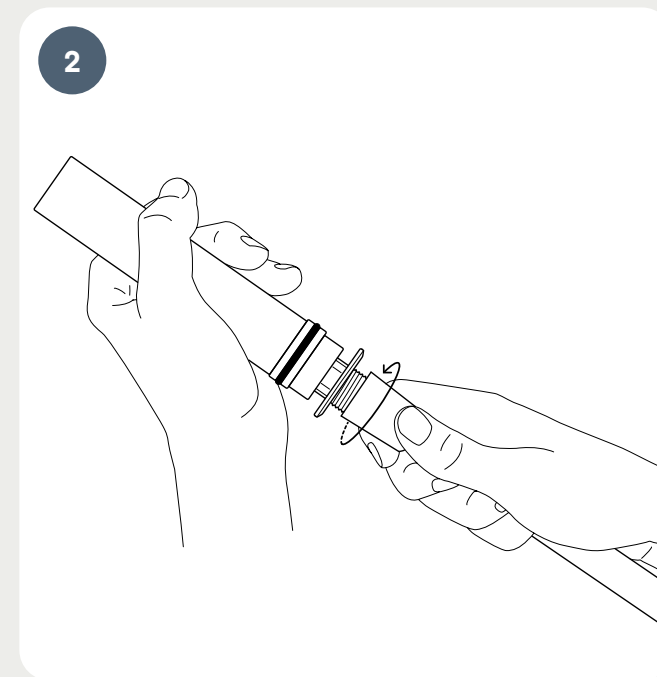

Svitare il flessibile della doccia dal filtro.


3

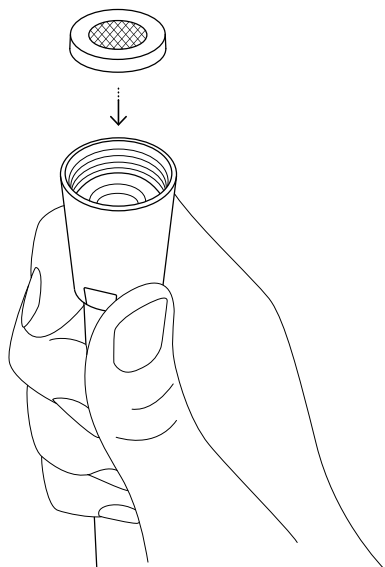

Installare sul tubo flessibile della doccia la guarnizione fornita al posto di quella esistente.


Effettuare questa operazione ogni volta che si installa un nuovo filtro T-safe, per garantire la perfetta tenuta del raccordo.

4

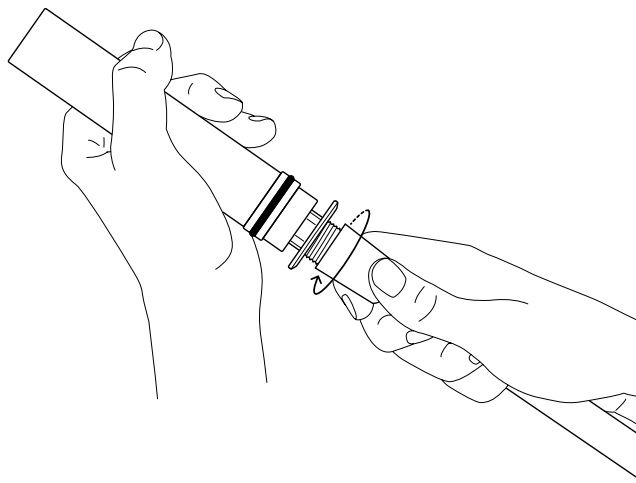


Fissare saldamente il tubo flessibile della doccia al filtro.

5

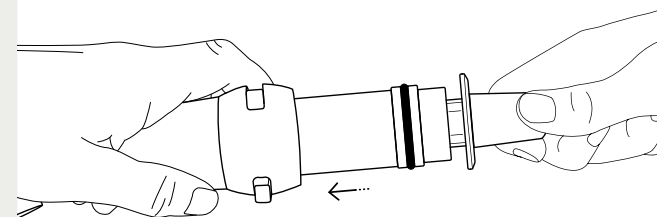

Inserire il filtro nell'impugnatura.

6

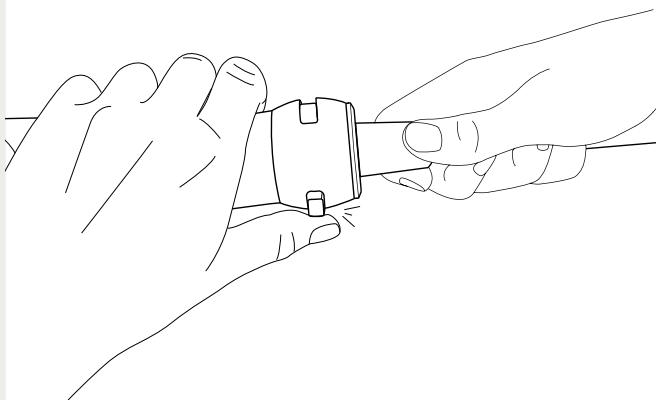

Una volta che il filtro è correttamente inserito nell'impugnatura, riportare la linguetta di bloccaggio nella posizione iniziale. Il filtro è ora saldamente fissato all'impugnatura. Il filtro doccia è pronto per l'uso.

Informazioni

Pulizia e disinfezione delle superfici

Se sono in atto procedure di pulizia professionale, le superfici esterne del filtro possono essere pulite utilizzando una nuova salvietta monouso. È necessario prestare particolare attenzione per evitare la contaminazione di qualsiasi uscita del filtro. Non scollegare il filtro durante la pulizia.

I filtri per l'acqua T-safe sono compatibili con i comuni disinfettanti e detergenti ad eccezione dei disinfettanti a base di cloro, a causa della superficie cromata. Per la pulizia e la disinfezione, è possibile immergere l'alloggiamento del filtro in acido citrico fino a 500.000 ppm.

Stoccaggio – filtro non messo in servizio

Stoccare a temperature comprese tra 5 °C e 40 °C e a un'umidità massima del 60 %. Data di scadenza: vedere l'etichetta sulla confezione o le indicazioni riportate sul prodotto.

Smaltimento

È possibile smaltire la cartuccia del filtro nei rifiuti ordinari in conformità alle normative locali applicabili nell'ambito della categoria codice rifiuti 180104 e alla direttiva UE 75/442/CEE.

Tolleranza ai disinfettanti per impianti idrici

I filtri per l'acqua T-safe sono compatibili con i comuni disinfettanti per impianti idrici. Tale compatibilità è stata convalidata mediante test di integrità dei filtri dopo l'esposizione ai seguenti disinfettanti alle concentrazioni e al tempo di contatto indicati:

- 30 ppm di biossido di cloro in combinazione con 200 mg/L di solidi sospesi in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 30 ppm di perossido di idrogeno in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 15 ppm di cloro libero in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 10 ppm di ozono in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 10 ppm di clorammina in funzionamento continuo per tutto il ciclo di vita
- 1000 ppm di cloro libero tramite un trattamento d'urto della durata di 1 ora
- 50 ppm di acido ipocloroso (HOCL) tramite un trattamento d'urto della durata di 2 ore
- 50 ppm di biossido di cloro tramite un trattamento d'urto della durata di 2 ore
- 3500 ppm di perossido di idrogeno tramite un trattamento d'urto della durata di 6 ore
- 3000 ppm di perossido di idrogeno stabilizzato con argento tramite un trattamento d'urto della durata di 14 ore
- Una soluzione acquosa con pH 12 tramite un trattamento d'urto della durata di 1 ora
- 1000 ppm di acido peracetico a 60 °C tramite un trattamento d'urto della durata di 2 ore

Precauzioni

- Non utilizzare il filtro se la confezione è aperta o danneggiata o se il filtro è visibilmente danneggiato
- Non scollegare il filtro durante il periodo di utilizzo
- Evitare l'impatto meccanico e non colpire il filtro con oggetti pesanti o metallici, in quanto potrebbe danneggiarsi
- L'uscita del filtro non deve venire a contatto diretto con la pelle o i capelli
- Non usare il filtro in modo continuativo con temperature dell'acqua superiori a 60 °C. La temperatura operativa ottimale è compresa tra 10 °C e 45 °C
- Il filtro non è in grado di sostenere una pressione superiore a 5 bar
- Se viene sottoposto a una pressione dell'acqua troppo elevata, il filtro cederà (riduzione improvvisa del flusso d'acqua). In questo caso, smaltire il filtro
- Il filtro non può essere sottoposto a controlavaggio
- Il livello di contaminazione e la quantità di particelle e sostanze presenti nell'acqua in grado di intasare il filtro possono ridurre la durata
- Non risciacquare o lavare il filtro in lavastoviglie o autoclave
- Una volta scaduto, smaltire il filtro
- Non modificare o apportare modifiche al filtro o all'adattatore
- Importante: il filtro non può essere posizionato in un bagno d'acqua calda

Nota

- Non utilizzare soluzioni di pulizia per le lenti a contatto
- La qualità dell'acqua non è idonea all'uso in ambito farmaceutico
- Il filtro non cambia il sapore o l'odore né la composizione chimica dell'acqua e non modifica la concentrazione di sali, metalli, incrostazioni di calcare, sostanze chimiche, pesticidi e coloranti

Nessuna responsabilità per errori tipografici e di stampa.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com