



Gebruiksaanwijzing NL

Pro Handdouche Filters



Beschrijving

De filter van het T-safe Pro waterfiltratie-assortiment is gebaseerd op holle-vezeltechnologie en specifiek ontworpen voor het uit leidingwater verwijderen van bacteriën zoals, maar niet beperkt tot, *Pseudomonas aeruginosa* en *Legionella pneumophila* om te voorkomen dat door infecties veroorzaakte ziekten zich in ziekenhuizen en zorginstellingen verspreiden.

T-safe Pro handdouchefilters zijn voorzien van een mannelijke ½"-schroefdraad. De filters worden voorzien van constante stromingstechnologie, die de filters beschermt tegen plotselinge pieken in de waterdruk.


T-safe Pro Handdouche Filters houdt op doeltreffende wijze bacteriën tegen gedurende een maximale periode van 92 dagen, binnen de hier beschreven gebruikslimieten.

Deze IFU heeft betrekking op de volgende producten

Artikel	Code
Handdouche Filter Chroom	02-803102
Witte Handdouche Filter	02-803103
Handdouche Filter voor noodgevallen	02-803112
Vervangend Filter	02-000077

Installatie


1

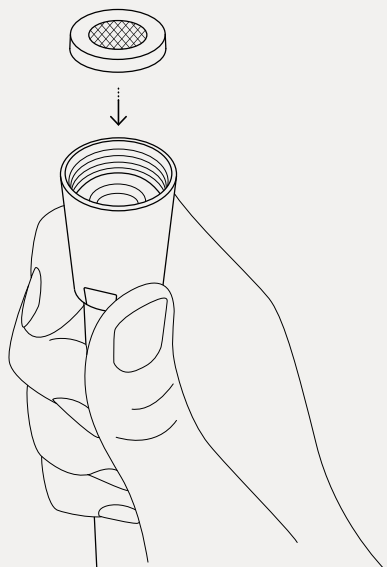

De bijgesloten nieuwe pakkingring in de doucheslang plaatsen en de oude pakkingring vervangen.

Dit dient telkens herhaald te worden als er een nieuw T-safe filter wordt geplaatst om er zeker van te zijn dat het filter goed op de doucheslang aansluit.


2

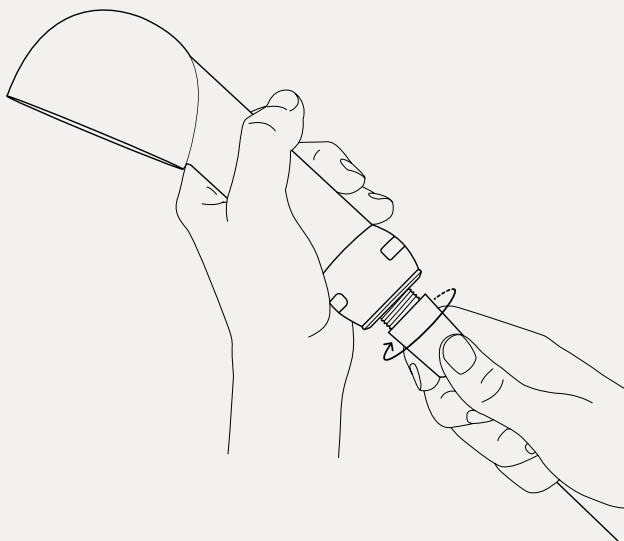


Draai de doucheslang strak op het filterdouche.

Installatie van de vervangende filter

Installeer een nieuw filter rechtstreeks uit de verpakking en zorg ervoor dat het filter niet in contact komt met bronnen van verontreiniging voordat het wordt geïnstalleerd.

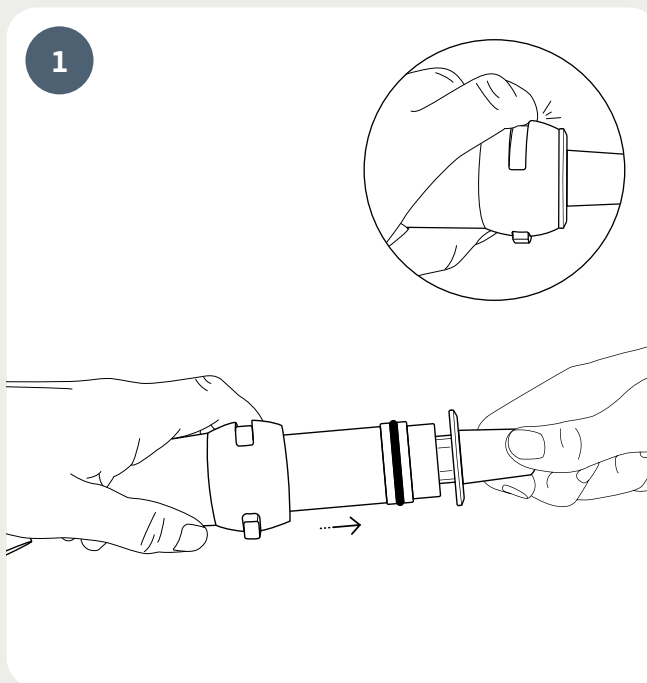


Maak het filter los door de vergrendelingspal op de handgreep naar beneden te drukken. Trek vervolgens het filter uit de handgreep.

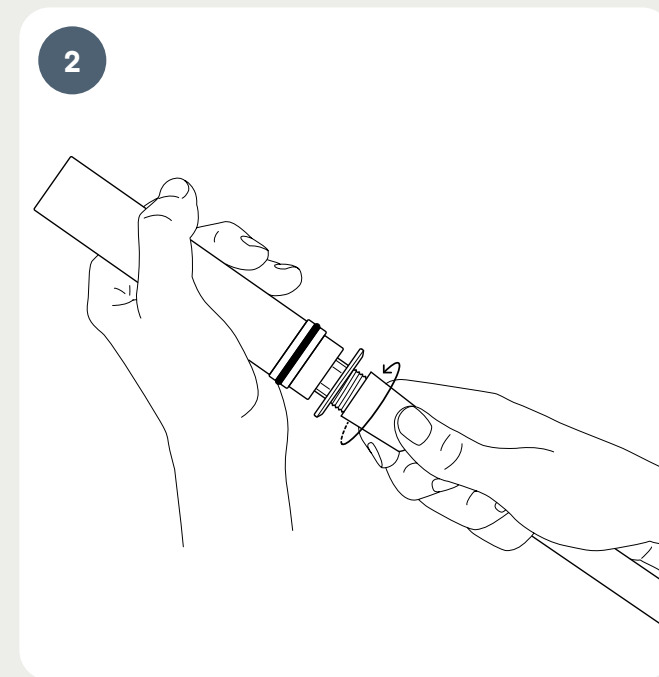

Schroef de doucheslang los van het filter.


3

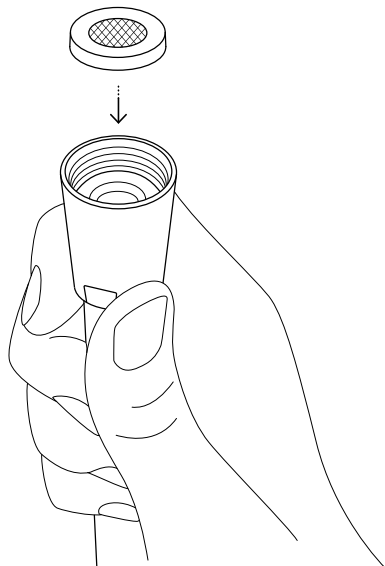

De bijgesloten nieuwe pakkingring in de doucheslang plaatsen en de oude pakkingring vervangen.


Dit dient telkens herhaald te worden als er een nieuw T-safe filter wordt geplaatst om er zeker van te zijn dat het filter goed op de doucheslang aansluit.

4

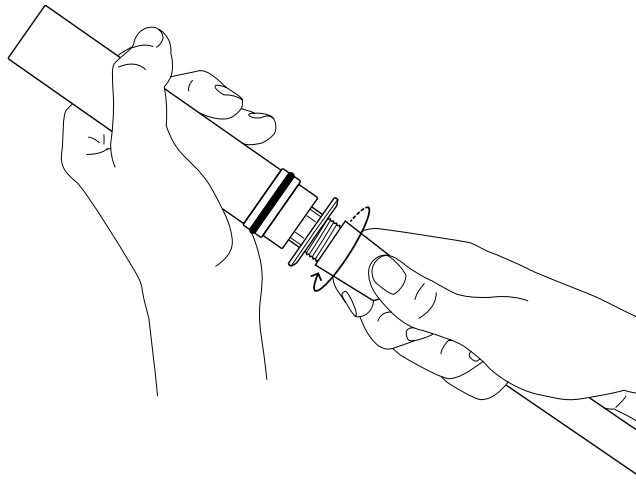


Draai de doucheslang strak op het filter.

5

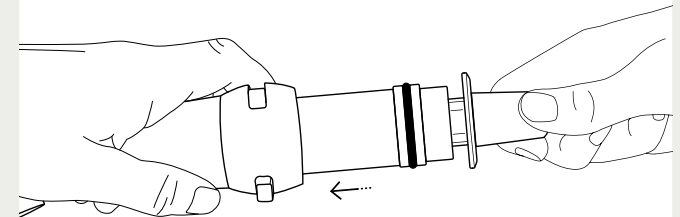

Plaats het filter in de handgreep.

6

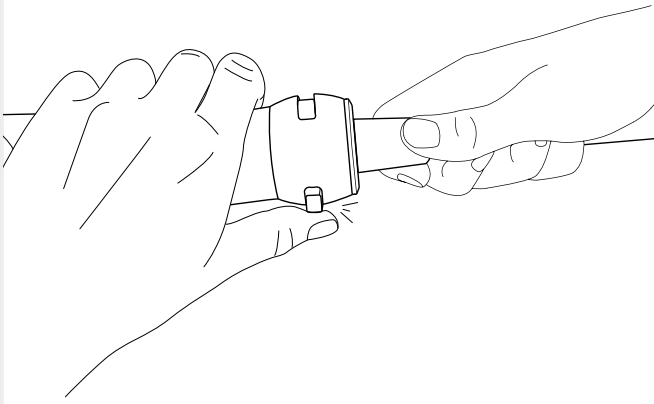

Zodra het filter volledig in de handgreep is geplaatst, drukt u de vergrendelingspal terug op zijn plaats. Het filter is nu stevig in de handgreep bevestigd. Het filterdouchesysteem is klaar voor gebruik.

Informatie

Reiniging en desinfectie van oppervlakken

Als er professionele reinigingsprocedures worden gehanteerd, mogen de externe oppervlakken van de filter met een nieuw wegwerpdoekje worden gereinigd. Er moet extra op worden gelet dat de uitgangen van de filter niet besmet raken om onbedoelde besmetting te voorkomen. Maak de filter niet los tijdens het reinigen.

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectie- en -schoonmaakmiddelen voor oppervlakken, met uitzondering van chloorhoudende desinfectiemiddelen vanwege het verchroomde oppervlak. Voor reiniging en desinfectie mag de filterbehuizing worden ondergedompeld in citroenzuur met een concentratie tot 500.000 ppm.

Opslag – niet-geïnstalleerde filter

Het product moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C en bij een luchtvochtigheidsgraad van max. 60 %. Uiterste gebruiksdatum: Zie het etiket op de verpakking of de markering op het product.

Afvalverwijdering

Het filterpatroon en de niet-metalen onderdelen kunnen in de gewone vuilnisbak worden gegooid, in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften onder afvalcategorienummer 180104 en conform EU-richtlijn 75/442/EEG.

Tolerantie voor desinfectiemiddelen voor watersystemen

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectiemiddelen voor watersystemen. Dit is bevestigd door de integriteit van de filters te testen na blootstelling aan de volgende desinfectiemiddelen, bij de vermelde concentraties en contacttijden:

- 30 ppm chloordioxide in combinatie met 200 mg/l zwevende deeltjes bij continu gebruik gedurende de hele levensduur
- 30 ppm waterstofperoxide bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 15 ppm vrij chloor bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm ozon bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm chlooramine bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 1000 ppm vrij chloor tijdens een 1 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm hypochloorzuur (HOCL) tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm chloordioxide tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 3500 ppm waterstofperoxide tijdens een 6 uur durende schokbehandeling
- 3000 ppm met zilver gestabiliseerde waterstofperoxide tijdens een 14 uur durende schokbehandeling
- Een waterige oplossing met pH 12 tijdens een 1 uur durende shockbehandeling
- 1000 ppm perazijnzuur bij 60 °C tijdens een 2 uur durende schokbehandeling

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de filter niet als de verpakking geopend of beschadigd is, of als de filter zichtbaar beschadigd is
- Maak de filter niet los tijdens de gehele gebruiksduur
- Voorkom mechanische belasting en sla niet op de filter met zware of metalen voorwerpen. Dit kan de filter beschadigen
- De uitlaat van de filter mag niet rechtstreeks in contact komen met huid of haar
- De filter mag niet continu worden gebruikt bij een watertemperatuur van meer dan 60 °C. Het optimale bereik voor gebruik is 10 °C – 45 °C
- De filter is niet bestand tegen een druk van meer dan 5 bar
- Als de filter wordt blootgesteld aan een te hoge waterdruk, zal de filter barsten (plotse toename van het waterdebiet). In dat geval moet de filter worden weggegooid
- De filter mag niet tegen de werkingsrichting in worden gespoeld
- Het besmettingsniveau en de hoeveelheid deeltjes en stoffen in het water die de filter blokkeert, kunnen de gebruiksduur van de filter verkorten
- De filter mag niet worden gespoeld of gereinigd in een vaatwasser of autoclaaf
- De filter moet worden weggegooid als de uiterste gebruiksdatum is verstreken
- Breng geen wijzigingen aan de filter of de adapter aan
- Belangrijk: De filter mag niet in een bad met heet water worden geplaatst

Opmerking

- Gebruik het water niet voor contactlenzen
- De kwaliteit van het water is niet geschikt voor farmaceutisch gebruik
- De filter wijzigt de smaak, de geur en de chemische samenstelling van het water niet en leidt evenmin tot verandering in de concentratie van zouten, metalen, kalk, chemicaliën, pesticiden en kleurstoffen

Niet aansprakelijk voor druk- of typfouten.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com