



Gebruiksaanwijzing NL

Handdouche Filter Aegis



Beschrijving

Het filter van het T-safe Pro Waterfiltratie-assortiment is gebaseerd op hollevezelmembraantechnologie en is specifiek ontworpen om bacteriën zoals, maar niet beperkt tot, *Legionella pneumophila* uit leidingwater te verwijderen om infecties in commerciële omgevingen te voorkomen.

T-safe Handdouche Filter Aegis is voorzien van een mannelijke ½" schroefdraad. De filters worden geleverd met een waterstroomregelaar, die de filters beschermt tegen plotselinge waterdrukpieken.


T-safe Handdouche Filter Aegis houdt bacteriën effectief vast voor een maximale periode van maximaal 92 dagen, binnen de gebruiksbependingen zoals hierin beschreven.

Deze IFU omvat de volgende producten

Product	Productcode
Handdouche Filter Aegis	02-803400
Vervangend Filter	02-000300
Dummy-patroon	02-000122

Installatie


1

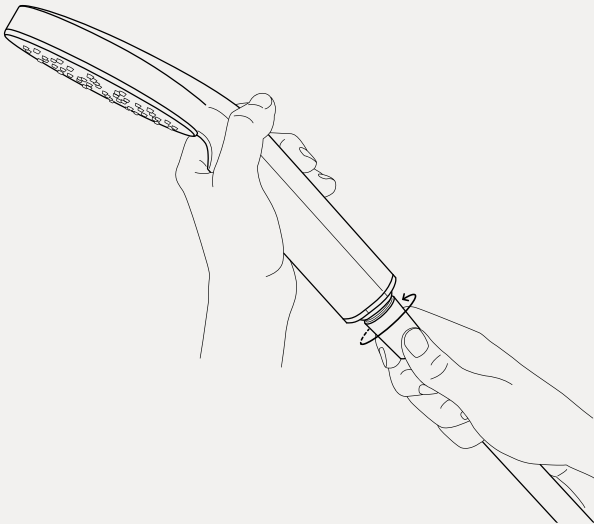

Draai het douchefilter met de hand vast aan de slang.


De pakking is in het product geïntegreerd om ervoor te zorgen dat deze bij elke filterwissel wordt vervangen, zodat er geen lekkage optreedt.

2

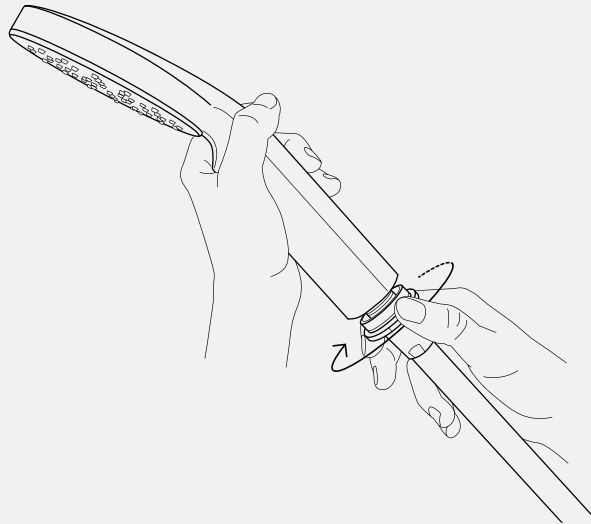


Schroef de sluitring aan de onderkant van het douchefilter los door deze met de hand tegen de klok in te draaien.

3

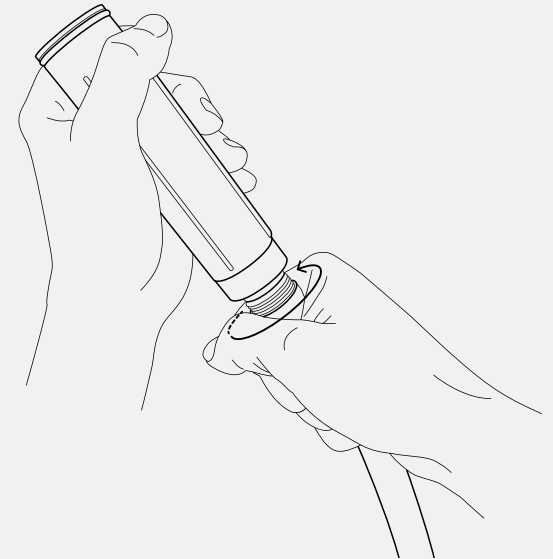


Verwijder de douchehendel van het filter. Zorg er vervolgens voor dat het filter stevig aan de slang is vastgedraaid, zodat er geen waterlekkage optreedt.

4

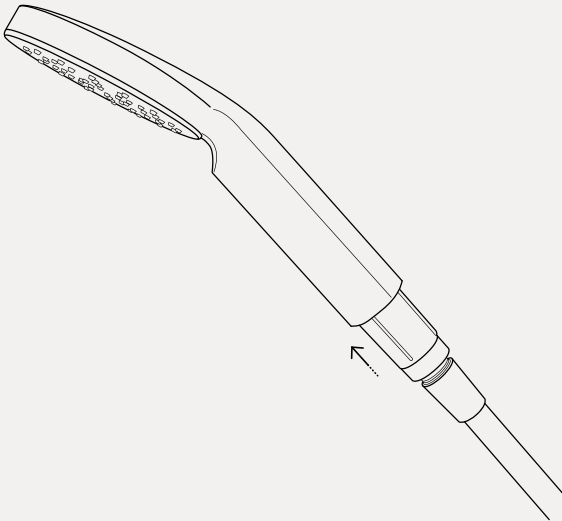

Duw het filter terug in de douchehendel.


5

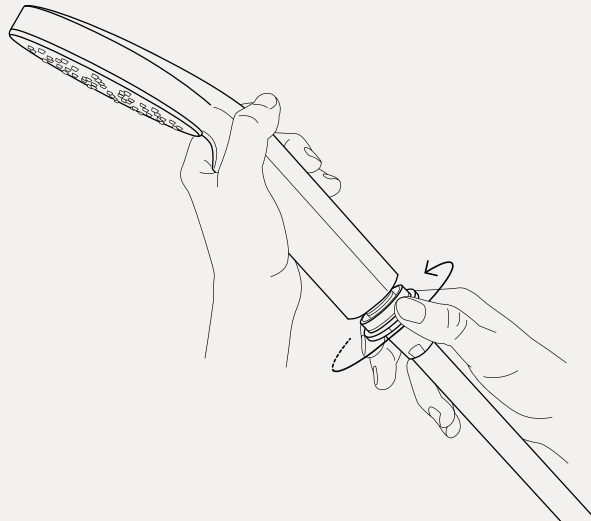

Bevestig de sluitring weer aan de douchehendel door deze met de klok mee te draaien om het filter stevig op zijn plaats te houden.


Vervangend van het filter of installatie van een dummy-patroon

1

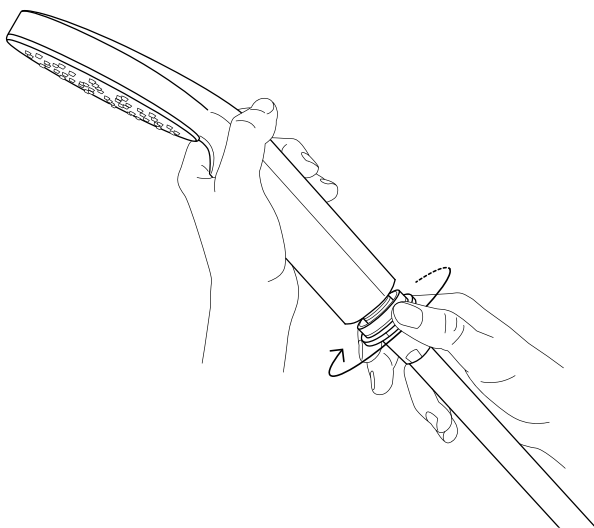


Schroef de sluitring aan de onderkant van het douchefilter los door deze met de hand tegen de klok in te draaien.

2

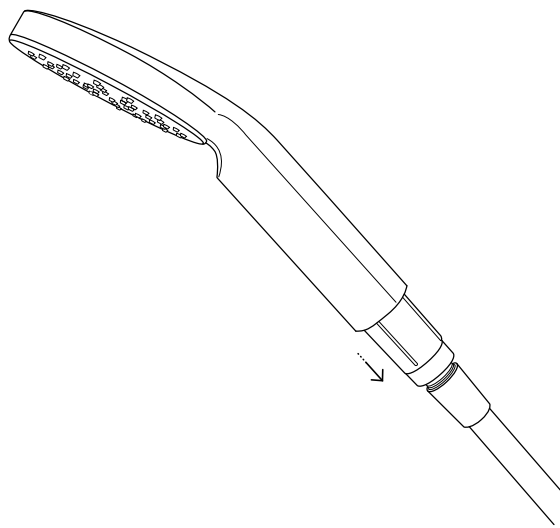


Verwijder de douchehendel van het filter. Vervang het gebruikte filter door een nieuwe of installeer een dummy cartridge indien ongefilterd water gewenst is.

3

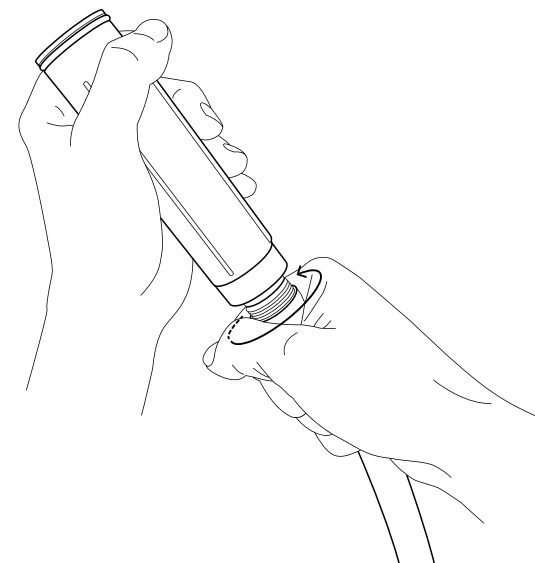


Zorg ervoor dat het filter stevig aan de slang is vastgedraaid om waterlekage te voorkomen.

4

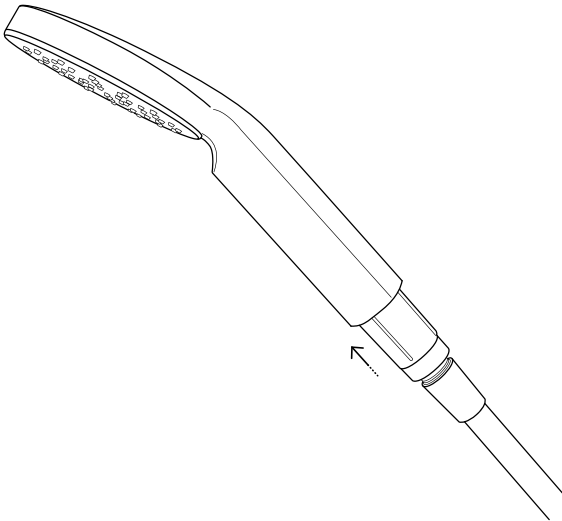

Duw het filter terug in de douchehendel.

5

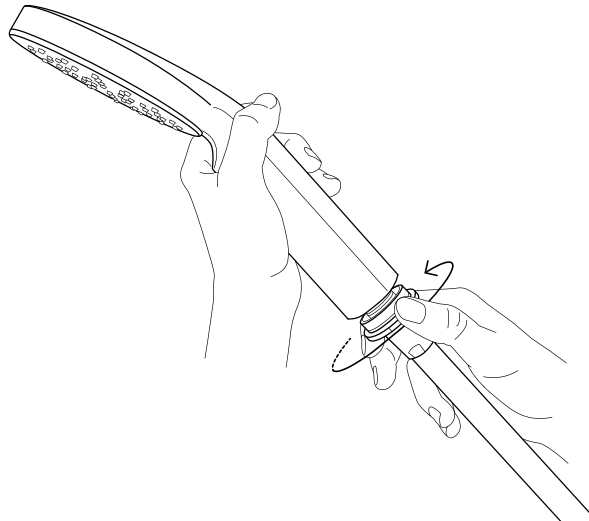

Bevestig de sluitring weer aan de douchehendel door deze met de klok mee te draaien om het filter stevig op zijn plaats te houden.

Informatie

Reiniging en desinfectie van oppervlakken

Als er professionele reinigingsprocedures worden gehanteerd, mogen de externe oppervlakken van de filter met een nieuw wegwerpdoekje worden gereinigd. Er moet extra op worden gelet dat de uitgangen van de filter niet besmet raken om onbedoelde besmetting te voorkomen. Maak de filter niet los tijdens het reinigen.

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectie- en -schoonmaakmiddelen voor oppervlakken, met uitzondering van chloorhoudende desinfectiemiddelen vanwege het verchroomde oppervlak. Voor reiniging en desinfectie mag de filterbehuizing worden ondergedompeld in citroenzuur met een concentratie tot 500.000 ppm.

Opslag – niet-geïnstalleerde filter

Het product moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C en bij een luchtvochtigheidsgraad van max. 60 %. Uiterste gebruiksdatum: Zie het etiket op de verpakking of de markering op het product.

Afvalverwijdering

Het filterpatroon en de niet-metalen onderdelen kunnen in de gewone vuilnisbak worden gegooit, in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften onder afvalcategorienummer 180104 en conform EU-richtlijn 75/442/EEG.

Tolerantie voor desinfectiemiddelen voor watersystemen

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectiemiddelen voor watersystemen. Dit is bevestigd door de integriteit van de filters te testen na blootstelling aan de volgende desinfectiemiddelen, bij de vermelde concentraties en contacttijden:

- 30 ppm chloordioxide in combinatie met 200 mg/l zwevende deeltjes bij continu gebruik gedurende de hele levensduur
- 30 ppm waterstofperoxide bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 15 ppm vrij chloor bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm ozon bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm chlooramine bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 1000 ppm vrij chloor tijdens een 1 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm hypochloorzuur (HOCL) tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm chloordioxide tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 3500 ppm waterstofperoxide tijdens een 6 uur durende schokbehandeling
- 3000 ppm met zilver gestabiliseerde waterstofperoxide tijdens een 14 uur durende schokbehandeling
- Een waterige oplossing met pH 12 tijdens een 1 uur durende shockbehandeling
- 1000 ppm perazijnzuur bij 60 °C tijdens een 2 uur durende schokbehandeling

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de filter niet als de verpakking geopend of beschadigd is, of als de filter zichtbaar beschadigd is
- Maak de filter niet los tijdens de gehele gebruiksduur
- Voorkom mechanische belasting en sla niet op de filter met zware of metalen voorwerpen. Dit kan de filter beschadigen
- De uitlaat van de filter mag niet rechtstreeks in contact komen met huid of haar
- De filter mag niet continu worden gebruikt bij een watertemperatuur van meer dan 60 °C. Het optimale bereik voor gebruik is 10 °C – 45 °C
- De filter is niet bestand tegen een druk van meer dan 5 bar
- Als de filter wordt blootgesteld aan een te hoge waterdruk, zal de filter barsten (plotse toename van het waterdebiet). In dat geval moet de filter worden weggegooid
- De filter mag niet tegen de werkingsrichting in worden gespoeld
- Het besmettingsniveau en de hoeveelheid deeltjes en stoffen in het water die de filter blokkeert, kunnen de gebruiksduur van de filter verkorten
- De filter mag niet worden gespoeld of gereinigd in een vaatwasser of autoclaaf
- De filter moet worden weggegooid als de uiterste gebruiksdatum is verstreken
- Breng geen wijzigingen aan de filter of de adapter aan
- Belangrijk: De filter mag niet in een bad met heet water worden geplaatst

Opmerking

- Gebruik het water niet voor contactlenzen
- De kwaliteit van het water is niet geschikt voor farmaceutisch gebruik
- De filter wijzigt de smaak, de geur en de chemische samenstelling van het water niet en leidt evenmin tot verandering in de concentratie van zouten, metalen, kalk, chemicaliën, pesticiden en kleurstoffen

Niet aansprakelijk voor druk- of typfouten.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denemarken

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com