



Gebruiksaanwijzing NL

Knijpdouche Filter



Beschrijving

Het Knijpdouche Filter van de T-safe Pro Water Filtration-serie is speciaal ontworpen om bacterien zoals o.a. *Legionella pneumophila* en *Pseudomonas aeruginosa* uit het leidingwater te verwijderen om infecties in commerciële omgevingen te voorkomen.


Het filter houdt bacteriën effectief vast voor een duur van maximaal 92 dagen, binnen de gebruiksbeperkingen zoals hierin beschreven.

Deze IFU heeft betrekking op de volgende producten

Artikel	Code
Knijpdouche Filter	02-803200
Vervangend Filter	02-000153
Dummy-patroon	02-000106


Installatie

1

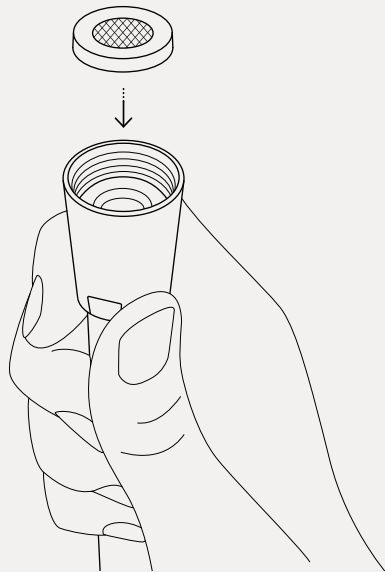

De meegeleverde pakking is voor de slang en is bedoeld om de eerder geïnstalleerde pakking te vervangen. Dit gebeurt elke keer dat er een nieuw T-safe filter wordt gemonteerd, om ervoor te zorgen dat de verbinding altijd goed vastzit.


2

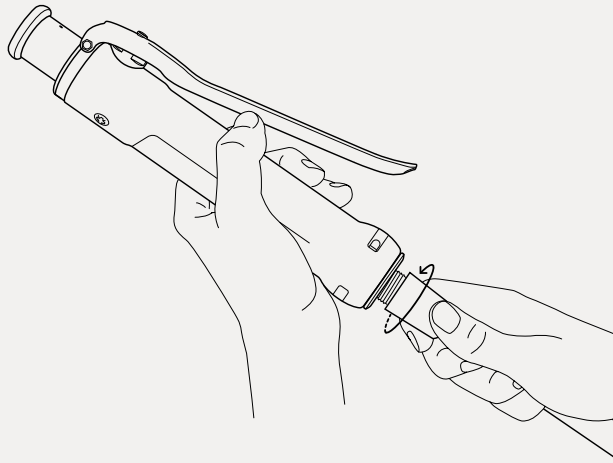


Bevestig de slang stevig aan het Knijpdouche Filter: het is nu klaar voor gebruik.

Vervangend van het filter of installatie van een dummy-patroon

Installeer een nieuw filter rechtstreeks uit de verpakking en zorg ervoor dat het filter niet in contact komt met bronnen van verontreiniging voordat het wordt geïnstalleerd.

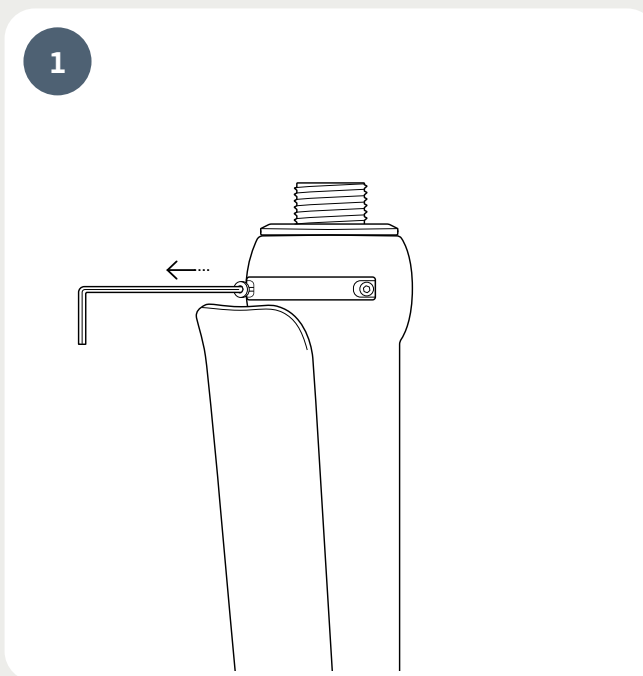


Begin met het losdraaien van de twee schroeven aan de onderkant van het Knijpdouche Filter. Gebruik een inbussleutel van 1,5 mm.

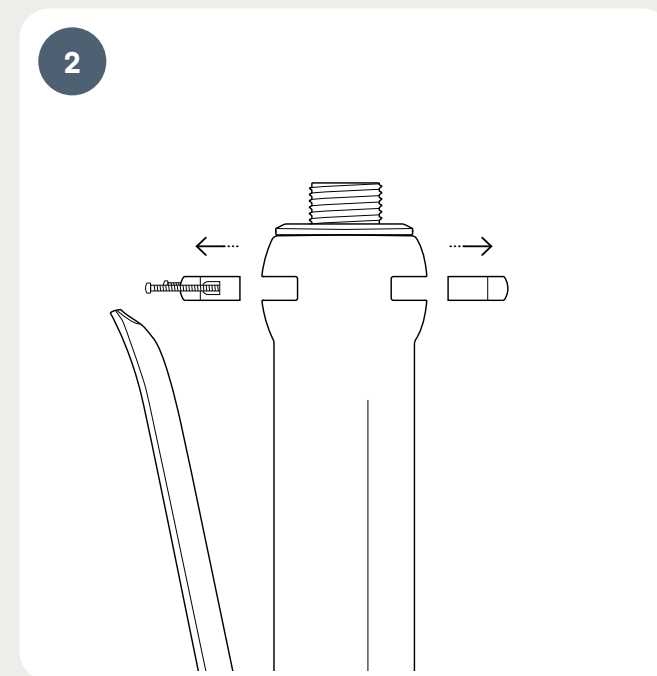


Trek de twee vergrendelingspallen aan beide kanten naar buiten om het filter los te maken.

3

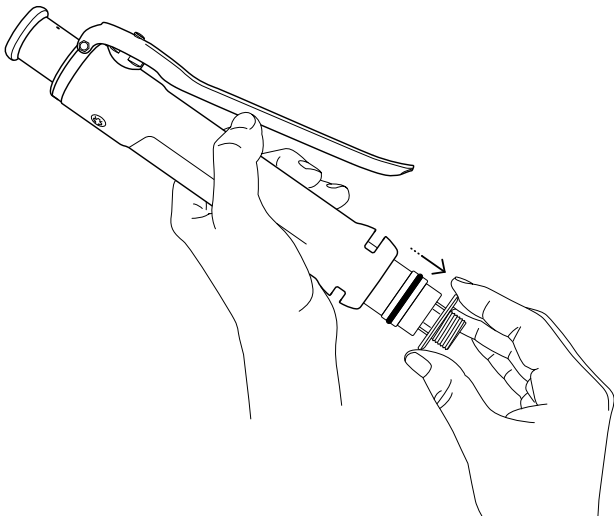


Verwijder het filter van het handvat en gooi het weg op de gebruikelijke manier.

4

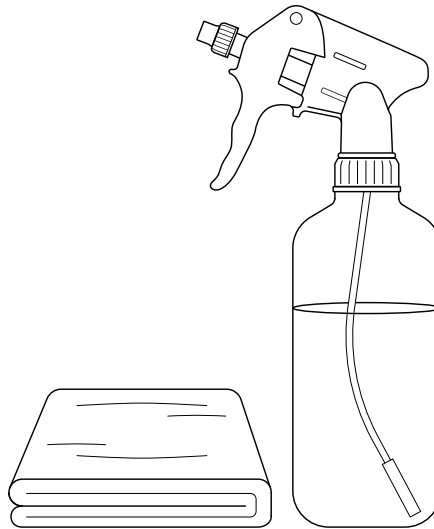


Reinig, ontkalk en desinfecteer de behuizing van het Knijpdouche in overeenstemming met de lokale richtlijnen.

5

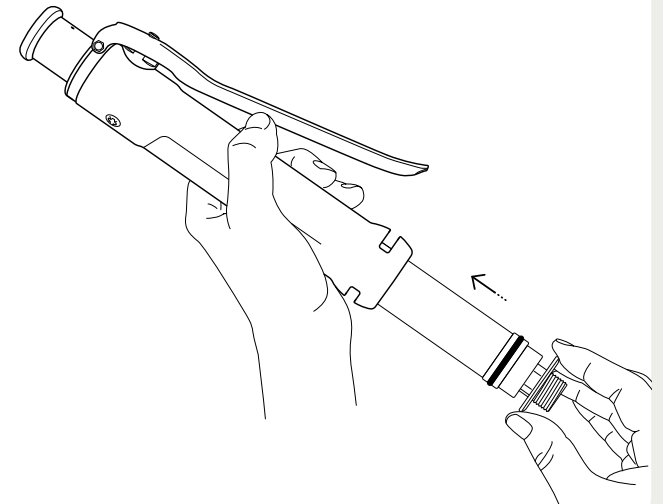


Plaats het nieuwe filter of de dummy.

6

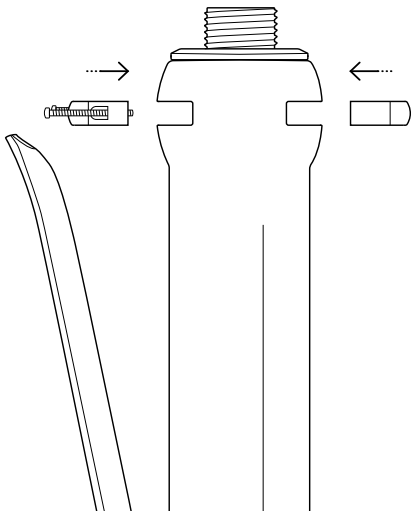

Plaats de vergrendelingspallen en draai de schroeven vast met een inbussleutel van maat 1,5 mm.

7

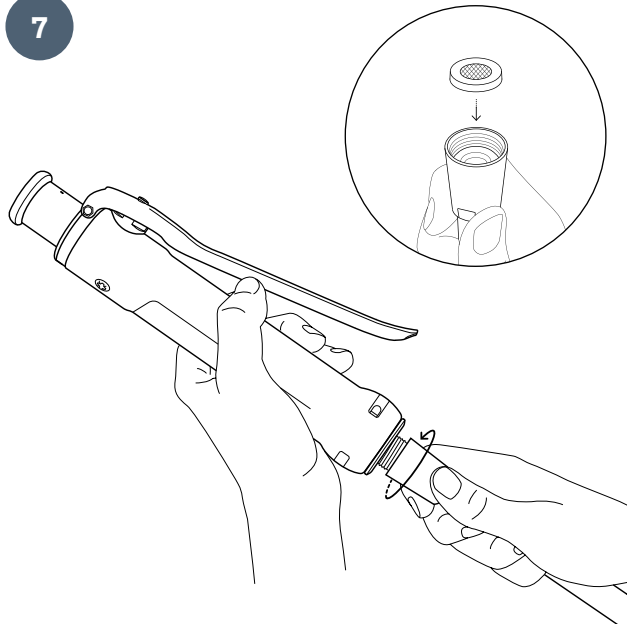

Vervang de eerder geïnstalleerde pakking in de slang op conische wijze en bevestig de slang stevig aan het Knijpdouche Filter. Het is nu klaar voor gebruik.

Informatie

Reiniging en desinfectie van oppervlakken

Als er professionele reinigingsprocedures worden gehanteerd, mogen de externe oppervlakken van de filter met een nieuw wegwerpdoekje worden gereinigd. Er moet extra op worden gelet dat de uitgangen van de filter niet besmet raken om onbedoelde besmetting te voorkomen. Maak de filter niet los tijdens het reinigen.

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectie- en -schoonmaakmiddelen voor oppervlakken, met uitzondering van chloorhoudende desinfectiemiddelen vanwege het verchromde oppervlak. Voor reiniging en desinfectie mag de filterbehuizing worden ondergedompeld in citroenzuur met een concentratie tot 500.000 ppm.

Opslag – niet-geïnstalleerde filter

Het product moet worden bewaard bij een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C en bij een luchtvochtigheidsgraad van max. 60 %. Uiterste gebruiksdatum: Zie het etiket op de verpakking of de markering op het product.

Afvalverwijdering

Het filterpatroon en de niet-metalen onderdelen kunnen in de gewone vuilnisbak worden gegooid, in overeenstemming met de geldende plaatselijke voorschriften onder afvalcategorienummer 180104 en conform EU-richtlijn 75/442/EEG.

De loodvrije messing onderdelen kunnen worden gereinigd, ontkalkt en gedesinfecteerd voor hergebruik met een vervangend filterpatroon. Zorg bij het afvoeren van metalen onderdelen dat deze op de juiste wijze worden gerecycled, volgens de lokale richtlijnen.

Tolerantie voor desinfectiemiddelen voor watersystemen

De waterfilters van T-safe zijn geschikt voor gebruik met gangbare desinfectiemiddelen voor watersystemen. Dit is bevestigd door de integriteit van de filters te testen na blootstelling aan de volgende desinfectiemiddelen, bij de vermelde concentraties en contacttijden:

- 30 ppm chloordioxide in combinatie met 200 mg/l zwevende deeltjes bij continu gebruik gedurende de hele levensduur
- 30 ppm waterstofperoxide bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 15 ppm vrij chloor bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm ozon bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 10 ppm chlooramine bij continu gebruik gedurende de volledige levensduur
- 1000 ppm vrij chloor tijdens een 1 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm hypochloorzuur (HOCL) tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 50 ppm chloordioxide tijdens een 2 uur durende schokbehandeling
- 3500 ppm waterstofperoxide tijdens een 6 uur durende schokbehandeling
- 3000 ppm met zilver gestabiliseerde waterstofperoxide tijdens een 14 uur durende schokbehandeling
- Een waterige oplossing met pH 12 tijdens een 1 uur durende shockbehandeling
- 1000 ppm perazijnzuur bij 60 °C tijdens een 2 uur durende schokbehandeling

Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik de filter niet als de verpakking geopend of beschadigd is, of als de filter zichtbaar beschadigd is
- Maak de filter niet los tijdens de gehele gebruiksduur
- Voorkom mechanische belasting en sla niet op de filter met zware of metalen voorwerpen. Dit kan de filter beschadigen
- De uitlaat van de filter mag niet rechtstreeks in contact komen met huid of haar
- De filter mag niet continu worden gebruikt bij een watertemperatuur van meer dan 60 °C. Het optimale bereik voor gebruik is 10 °C – 45 °C
- De filter is niet bestand tegen een druk van meer dan 5 bar
- Als de filter wordt blootgesteld aan een te hoge waterdruk, zal de filter barsten (plotse toename van het waterdebiet). In dat geval moet de filter worden weggegooid
- De filter mag niet tegen de werkingsrichting in worden gespoeld
- Het besmettingsniveau en de hoeveelheid deeltjes en stoffen in het water die de filter blokkeert, kunnen de gebruiksduur van de filter verkorten
- De filter mag niet worden gespoeld of gereinigd in een vaatwasser of autoclaaf
- De filter moet worden weggegooid als de uiterste gebruiksdatum is verstreken
- Breng geen wijzigingen aan de filter of de adapter aan
- Belangrijk: De filter mag niet in een bad met heet water worden geplaatst

Opmerking

- Gebruik het water niet voor contactlenzen
- De kwaliteit van het water is niet geschikt voor farmaceutisch gebruik
- De filter wijzigt de smaak, de geur en de chemische samenstelling van het water niet en leidt evenmin tot verandering in de concentratie van zouten, metalen, kalk, chemicaliën, pesticiden en kleurstoffen

Niet aansprakelijk voor druk- of typfouten.



T-safe A/S

Gydevang 1

3450 Allerød, Denmark

+45 48 17 22 82

info@t-safe.com

t-safe.com